



Sistema seguro y sin malla para  
el tratamiento transvaginal de  
Prolapso de Órganos Pélvicos

**ANCORIS**  
POP REPAIR SYSTEM

## TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

**ANCORIS** es un sistema de anclaje transvaginal al ligamento sacroespinoso para tratar a mujeres que presentan prolapso apical, mediante un procedimiento seguro, confiable y mínimamente invasivo. Se puede utilizar para tratar defectos apicales aislados o para realizar una fijación apical concomitante que mejore el resultado al efectuar una reparación con tejido nativo.<sup>1</sup>




## SISTEMA UNIVERSAL

Teniendo en cuenta las características clínicas de cada paciente y el defecto que se debe tratar, **ANCORIS POP Repair System** se puede insertar en el ligamento sacroespinoso mediante dos abordajes transvaginales diferentes: Anterior (paravesical) o Posterior (pararrectal). El uso de ANCORIS ofrece la posibilidad de realizar una suspensión apical en una intervención quirúrgica de corta duración.<sup>2</sup>

## PROCEDIMIENTO EFICAZ Y MÍNIMAMENTE INVASIVO

Una fijación sacroespínosa debe soportar las altas presiones que afectan el piso pélvico. Según estudios clínicos realizados, los sistemas de anclaje ofrecen una fijación primaria superior en comparación con los dispositivos de sutura, en cuanto a la resistencia a la extracción en los tejidos. Con la ayuda de dispositivos de anclaje como **ANCORIS**, es posible reducir el riesgo de recurrencia de prolapso apical después de la fijación sacroespínosa.<sup>3,5</sup>

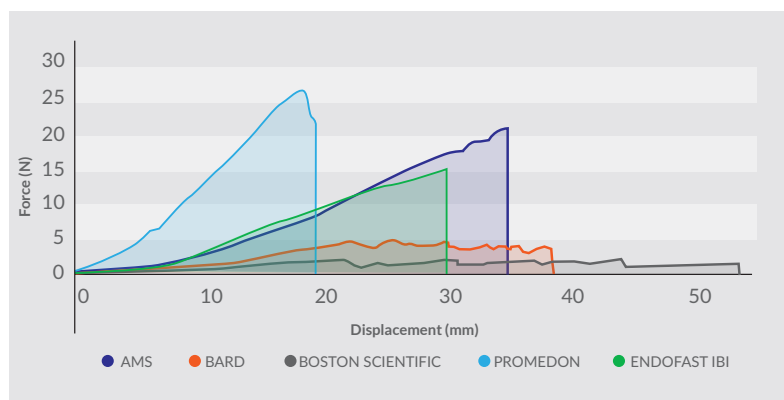

1: Sahrif J, et. al.: Recurrent pelvic organ prolapse: International Urogynecological Association Research and Development Committee opinion – Int Urogynecol J (2016). /2: IUGA Congress 2019, Poster 30 (Suppl. 1):S320. /3: Halaska M, Sedlacek R, Lincova M, Nanka O, Maxova K, Charles University Czech TU Prague: Fixation ability of contemporary used vaginal kits in prolapse surgery. /4: Data on file. /5: Castro R, et. al.: Vaginal sacrospinous ligament fixation using tissue anchor system vs. a traditional technique for women with apical vaginal prolapse: A randomized controlled trial – Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery (2020)

## SISTEMA DE ANCLAJE TISULAR (TAS)

Los **arpones TAS (Tissue Anchoring System)** fueron desarrollados para ofrecer un anclaje confiable de dos suturas de polipropileno de fijación al ligamento sacroespinoso. Con sus seis puntas de polipropileno distribuidas en 360° y el tope de seguridad en la parte inferior del arpón, el sistema TAS ofrece lo siguiente:

- Alta resistencia de fijación y precisión.
- Fijación confiable.
- Seguridad para las estructuras vasculares y nerviosas debido al tubo de protección provisto para el procedimiento de implantación.

9,8 mm

5,4 mm

## GUÍA RETRÁCTIL DE INSERCIÓN (RIG)

La **guía de inserción retráctil (RIG)** se desarrolló para llegar al área específica y realizar una inserción de anclaje precisa y segura. La configuración del RIG, con su tubo protector, garantiza la integridad del tejido circundante durante la implantación del TAS en el ligamento sacroespinoso. Con su diseño ergonómico, pequeño diámetro y mecanismo retráctil para conectar y soltar los arpones, proporciona:

- Precisión y seguridad en las maniobras quirúrgicas.
- Disección mínima.
- Control total de la inserción y la liberación de los arpones TAS.

### Mecanismo retráctil

Facilidad de inserción y liberación del arpón TAS.

### Guía curva

Fácil acceso al ligamento sacroespinoso a través del abordaje anterior o posterior. Disección mínima requerida.

### Tubo protector

Protección del tejido circundante durante el procedimiento de implantación.

### Mecanismo de bloqueo y liberación del tubo protector

Fácil bloqueo y liberación del tubo protector

### Mango ergonómico

Seguridad en las maniobras.

## ANCORIS en la práctica

- Prolapso uterino
- Prolapso de cúpula vaginal
- Prolapso anterior con defecto apical
- Prolapso posterior con defecto apical
- Soporte apical para lograr resultados duraderos en la reparación anterior y posterior.

**100.000**  
**+ TAS** ↑  
**IMPLANTADOS<sub>4</sub>**



**SIMPLE. SIN MALLA.**  
**CONFIABLE. VERSÁTIL.**

## CONTRAINDICACIONES & PRECAUCIONES

ANCORIS no debe utilizarse en:

- Mujeres fértiles
- Pacientes con alguna infección activa o latente de la vagina, el cuello uterino o el útero
- Pacientes con cáncer vaginal, cervical o uterino anterior o actual
- Radioterapia pélvica previa, actual o planificada
- Alergia conocida al polipropileno.

La implantación de ANCORIS debe basarse en una evaluación exhaustiva del paciente junto con las características y preferencias individuales de la paciente. También se deben considerar los siguientes elementos:

- ANCORIS debe ser utilizado exclusivamente por cirujanos con experiencia en la reconstrucción transvaginal del suelo pélvico.

Para obtener más información sobre "precauciones y advertencias", consulte nuestras Instrucciones de uso.

## INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

**ANCORIS**  
POP REPAIR SYSTEM

Número de pedido: KIT-ANC-01

- 3 arpones TAS con suturas (Ref.: TAS)
- 1 Guía de inserción retráctil diseñada para la implantación de TAS (Ref.: DPN-MNL)
- 1 aguja de sutura con ojal (Ref.: ESN)
- 1 baja nudos (Ref.: KP)

[www.promedon-urologypf.com/ancoris](http://www.promedon-urologypf.com/ancoris)

**Promedon**  
Urology and Pelvic Floor