

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

Starter Kits		
DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE MANGUITO	CÓDIGO
VICTO STARTER KIT 3.7	3.7	KITVICTO-37
VICTO STARTER KIT 4.0	4.0	KITVICTO-40
VICTO STARTER KIT 4.5	4.5	KITVICTO-45
VICTO STARTER KIT 5.0	5.0	KITVICTO-50
VICTO STARTER KIT 5.5	5.5	KITVICTO-55

Kit de Accesorios	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
KIT DE ACCESORIOS VICTO	KITAC-02

[victosphincter.com](http://victosphincter.com)

### Entorno de Resonancia Magnética

Pruebas no clínicas realizadas con el producto han demostrado que VICTO tiene compatibilidad condicional con las técnicas de resonancia magnética. Se puede examinar de manera segura a un paciente con este dispositivo en un sistema de resonancia magnética que cumpla las siguientes condiciones:



Campo magnético estático de 1,5 tesla y 3 tesla, con:

- Gradiente de campo espacial máximo de 12.800 G/cm (128 T/m).
- Producto de fuerza máxima de 231 T<sup>2</sup>/m.
- Tasa de absorción específica máxima promediada en todo el cuerpo teóricamente estimada de < 2 W/kg (modo normal de operación).

**Promedon**  
Urology and Pelvic Floor



**LLEVANDO EL CONCEPTO**  
DEL ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL A OTRO NIVEL

- Ajustabilidad mínimamente invasiva
- Dispositivo preconectado
- Diseño ergonómico de la bomba

# VICTO EL ESFÍNTER URINARIO AJUSTABLE

VICTO es un esfínter urinario artificial preconectado, que permite realizar ajustes de la presión del sistema mediante un procedimiento ambulatorio mínimamente invasivo.


## AJUSTABILIDAD MÍNIMAMENTE INVASIVA

Gracias al diseño único de la bomba de VICTO, la presión del sistema puede ser fácilmente ajustada a través del puerto autosellable, durante un sencillo procedimiento ambulatorio.



## DISEÑO ERGONÓMICO DE LA BOMBA

La bomba de control de silicona tiene un diseño que resulta sencillo de localizar y manipular para el paciente. Con apretar la bomba una sola vez, se libera la presión sobre la uretra y se habilita la micción.

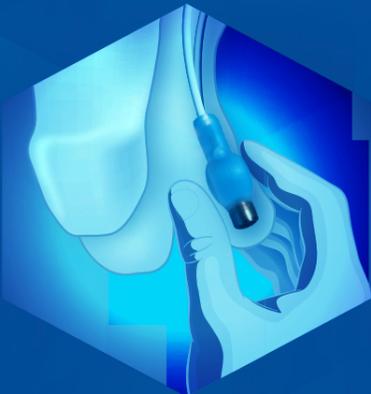

## DISPOSITIVO PRECONECTADO

VICTO es un dispositivo que no necesita la conexión de sus componentes durante la cirugía, al estar preconectado está listo para el llenado e implantación.



VICTO está disponible en 5 tamaños de manguito diferentes. Durante la cirugía se selecciona el tamaño indicado para el paciente, utilizando la cinta de selección de manguito provista en el kit de accesorios.

3.7 CM

4.0 CM

4.5 CM

5.0 CM

5.5 CM

## PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y AJUSTE

Preparación durante la cirugía +13ml

Activación de VICTO +4ml

Ajustes individuales (+1 ml) si son necesarios



## RECOMENDACIÓN DE AGUJAS:

Es recomendado el uso de agujas no perfiladas para los procedimientos de llenado o remoción de líquido en VICTO, como preparación, activación, ajustes o desactivación.

## INTENCIÓN DE USO

VICTO está destinado al restablecimiento de la continencia urinaria masculina en la población definida para su indicación.

## INDICACIÓN

VICTO está indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina causada por una deficiencia intrínseca del esfínter (DIE).

## CONTRAINDICACIONES

- Inestabilidad del músculo detrusor no controlada.
- Problemas que afectan la habilidad manual o la motivación y que pueden impedirle al paciente activar el dispositivo.
- Infección aguda o crónica del tracto urinario, que puede derivar en complicaciones posoperatorias.
- Infecciones agudas o crónicas en la zona quirúrgica e infecciones sistémicas (sepsis), que pueden derivar en complicaciones posoperatorias.
- Cirugía abdominal anterior, estado posterior a la peritonitis y otras afecciones que causan adherencia peritoneal, fibrosis y cicatrices que podrían llegar a afectar el funcionamiento del producto.
- Pacientes que el cirujano considera conveniente no operar, debido a los riesgos asociados con los procedimientos quirúrgicos abiertos o con la historia clínica del paciente (problemas físicos o mentales).
- Sensibilidad conocida a la silicona.