

PROCESSO DE DESATIVAÇÃO

VICTO
Adjustable Artificial Sphincter

ANVISA N°: 10306840191

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

- Seringa esteril de 10 ml.
- Agulha não perfilada de 25G x 5/8".

OUTRAS AGULHAS NÃO PERFILADAS RECOMENDADAS:

- Gripper Micro® Blunt Cannula, Non coring safety needle 20G x 1" (Ref: 21-3257-24).
- Surecan® prosty 20G x 40mm (Ref: 04439953).
- Surecan® Straight non-coring needle 22G x 30mm (Ref: 04439848).

ETAPAS DO PROCESSO

Se o paciente necessitar de cateterismo ou de um procedimento transuretral para qualquer intervenção médica, o VICTO deve ser desativado extraindo líquido do sistema da seguinte forma:

- 1 Identifique a bomba de controle no escroto do paciente. A pele escrotal deve ser limpa com uma substância antisséptica para minimizar o risco de infecção.

NOTA Pode-se aplicar anestesia local na região de acordo com o procedimento aprovado pelo hospital, tendo o cuidado de não danificar a bomba de controle durante o processo.

- 2 Utilizando luvas limpas, palpe a bomba de controle através da pele escrotal e localize o portal de acesso. (Fig. 1)

NOTA Deve-se identificar o portal redondo da bomba sob a pele e segurá-lo firmemente em uma posição fixa. (Fig. 2)


- 3 Conecte uma seringa vazia de 10 ml a uma agulha não perfilada esterilizada.

- 4 Introduza a agulha não perfilada no portal de acesso até que ela faça contato com a copa de titânio. A inserção da agulha deve ser perpendicular e concêntrica ao portal. (Fig. 3)

ADVERTÊNCIA Não utilize uma agulha diferente das indicadas, pois isso poderia danificar o portal autovedante e afetar a funcionalidade do implante. Devem ser tomadas precauções ao inserir a agulha para não perfurar as paredes da bomba em áreas que não sejam o portal autovedante.

- 5 Extraia 7 ml do VICTO puxando o êmbolo da seringa. (Fig. 4)

- 6 Retire a agulha do portal da bomba.

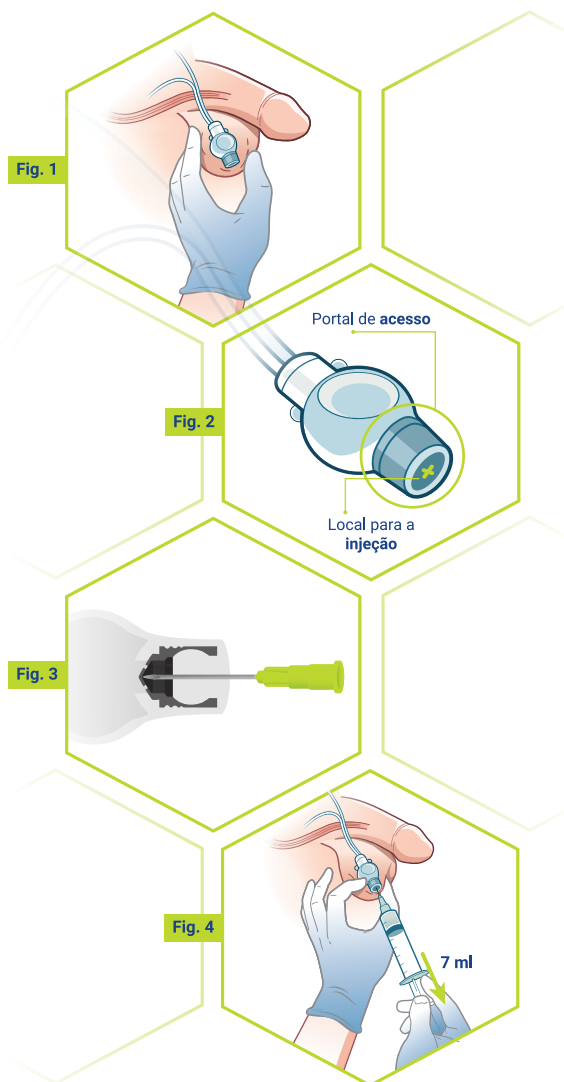

PSD-00000633 (01) / JUL-2026

IMPORTANTE: Após realizar o processo de desativação, o esfíncter Victo não fornecerá mais pressão ao redor da uretra. Para restaurar o seu funcionamento normal assim que a intervenção médica do paciente for concluída, devem ser injetados novamente 7 ml no sistema Victo.

Por favor, entre em contato com o cirurgião indicado no cartão de identificação do dispositivo (Cartão de Identificação do Dispositivo) para reativar o produto.