



Adjustable Artificial Sphincter

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Starter Kits

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE MANGUITO	CÓDIGO
VICTO STARTER KIT 3.7	3.7	KIT-AUS-37-WS
VICTO STARTER KIT 4.0	4.0	KIT-AUS-40-WS
VICTO STARTER KIT 4.5	4.5	KIT-AUS-45-WS
VICTO STARTER KIT 5.0	5.0	KIT-AUS-50-WS
VICTO STARTER KIT 5.5	5.5	KIT-AUS-55-WS

Accessories Kit

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
KIT DE ACCESORIOS VICTO	KITAC-01

Adjustment Kit

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
KIT DE AJUSTE VICTO	KIT-AD-06

www.promedon-upf.com

Entorno de Resonancia Magnética

Pruebas no clínicas realizadas con el producto han demostrado que VICTO tiene compatibilidad condicional con las técnicas de resonancia magnética. Se puede examinar de manera segura a un paciente con este dispositivo en un sistema de resonancia magnética que cumpla las siguientes condiciones:



Campo magnético estático de 1,5 tesla y 3 tesla, con:

- Gradiente de campo espacial máximo de 12.800 g/cm (128 T/m).
- Producto de fuerza máxima de 231 T²/m.
- Tasa de absorción específica máxima promediada en todo el cuerpo teóricamente estimada de < 2 W/kg (modo normal de operación).

Promedon
Urology and Pelvic Floor

Información de la compañía: Promedon S.A. | Av. Gral. Manuel Savio s/n Lote 3, Manzana 3 Parque Industrial Ferreyra X5925XAD Córdoba Argentina

Manufacturado por: PROMEDON SA | www.promedon-upf.com

PSD-00000236 (05) / FEB-2026



Adjustable Artificial Sphincter



LLEVANDO EL CONCEPTO DEL ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL A OTRO NIVEL


- Ajustabilidad mínimamente invasiva
- Dispositivo preconectado
- Diseño ergonómico de la bomba

VICTO EL ESFÍNTER URINARIO AJUSTABLE

VICTO es un esfínter urinario artificial preconectado, que permite realizar ajustes de la presión del sistema mediante un procedimiento ambulatorio mínimamente invasivo.


AJUSTABILIDAD MÍNIMAMENTE INVASIVA

Gracias al diseño único de la bomba de VICTO, la presión del sistema puede ser fácilmente ajustada a través del puerto autosellable, durante un sencillo procedimiento ambulatorio.

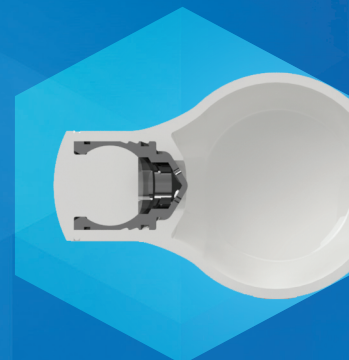


DISEÑO ERGONÓMICO DE LA BOMBA

La bomba de control de silicona tiene un diseño que resulta sencillo de localizar y manipular para el paciente. Con apretar la bomba una sola vez, se libera la presión sobre la uretra y se habilita la micción.

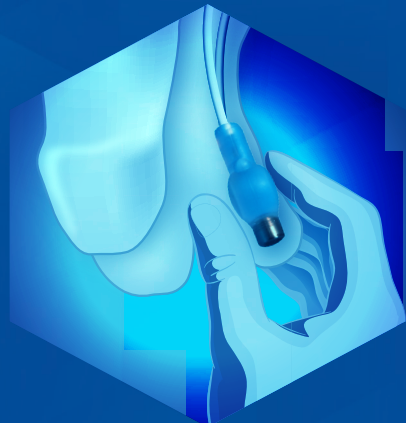

DISPOSITIVO PRECONECTADO

VICTO es un dispositivo que no necesita la conexión de sus componentes durante la cirugía, al estar preconectado está listo para el llenado e implantación.

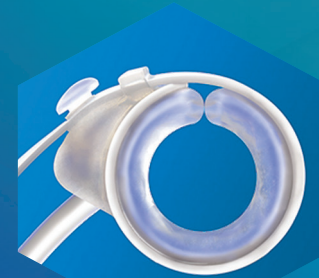

VICTO está disponible en 5 tamaños de manguito diferentes. Durante la cirugía se selecciona el tamaño indicado para el paciente, utilizando la cinta de selección de manguito provista en el kit de accesorios.

3.7_{CM}

4.0_{CM}

4.5_{CM}

5.0_{CM}


5.5_{CM}

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y AJUSTE

Preparación durante la cirugía +13ml

Activación de VICTO +4ml

Ajustes individuales (+1 ml) si son necesarios

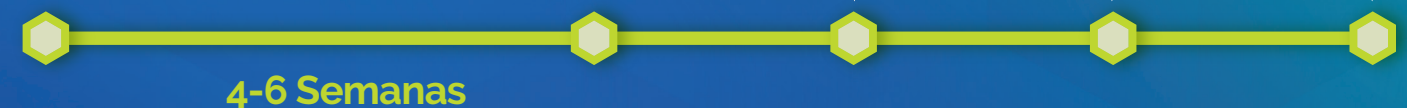

RECOMENDACIÓN DE AGUJAS:

Es recomendado el uso de agujas no perfiladas para los procedimientos de llenado o remoción de líquido en VICTO, como preparación, activación, ajustes o desactivación.

INTENCIÓN DE USO

VICTO está destinado al restablecimiento de la continencia urinaria masculina en la población definida para su indicación.

INDICACIÓN

VICTO está indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina causada por una deficiencia intrínseca del esfínter (DIE).

CONTRAINDICACIONES

- Inestabilidad incontrolada del músculo detrusor.
- Problemas que afecten a la destreza manual o a la motivación, y que puedan impedir que el paciente haga uso del dispositivo.
- Infección aguda de las vías urinarias que pueda provocar complicaciones postoperatorias.
- Pacientes considerados no aptos por el cirujano debido a riesgos asociados a las intervenciones quirúrgicas abiertas o a los antecedentes médicos (problemas físicos o mentales)
- Sensibilidad conocida a la goma de silicona.