


Système sûr et sans treillis pour le
traitement transvaginal du
Prolapsus des Organes Pelviens

ANCORIS
POP REPAIR SYSTEM

● TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION

ANCORIS est un système transvaginal d'ancrage au ligament sacro-épineux permettant le traitement chirurgical du prolapsus apical chez la femme grâce à une procédure sûre, fiable et peu invasive. Il peut être utilisé pour traiter des défauts apicaux isolés ou pour réaliser un ancrage apical concomitant afin d'éviter la réparation à répétition des tissus naturels.¹

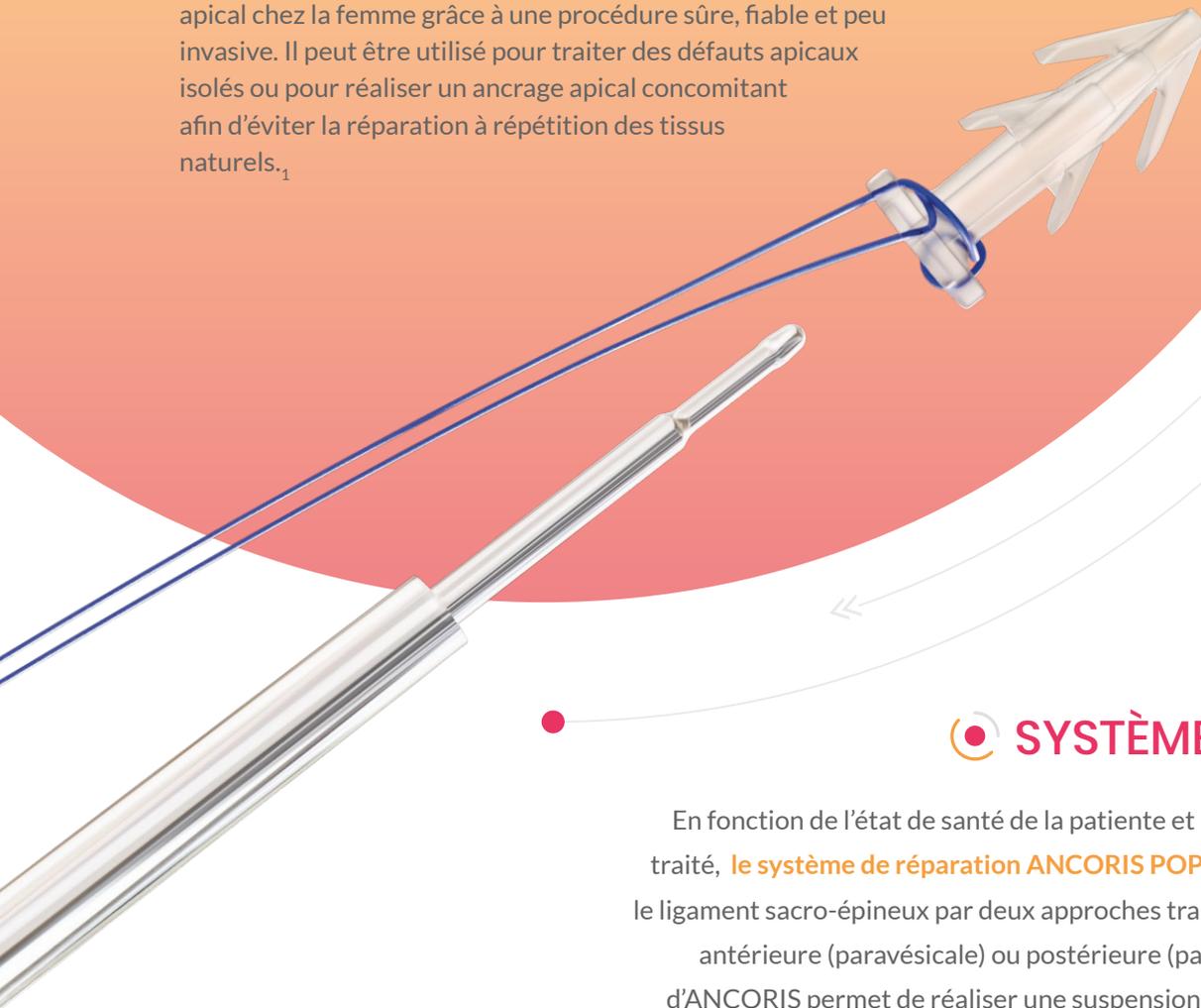


● SYSTÈME UNIVERSEL

En fonction de l'état de santé de la patiente et du défaut qui doit être traité, **le système de réparation ANCORIS POP** peut être inséré dans le ligament sacro-épineux par deux approches transvaginales distinctes, antérieure (paravésicale) ou postérieure (pararectale). L'utilisation d'ANCORIS permet de réaliser une suspension vaginale apicale en un temps opératoire réduit.²

● PROCÉDURE EFFICACE ET PEU INVASIVE

Une fixation sacro-épineuse doit supporter les pressions importantes qui affectent le plancher pelvien. Les études cliniques montrent que les systèmes d'ancrage dans les tissus offrent une fixation primaire supérieure par rapport aux dispositifs de suture en termes de résistance à l'arrachement. Grâce aux dispositifs d'ancrage comme **ANCORIS**, **le risque de réapparition du prolapsus apical après un ancrage sacro-épineux peut être réduit.**^{3,5}

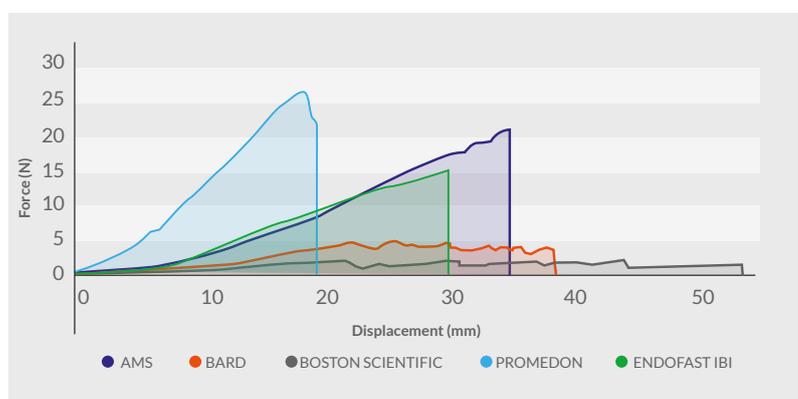


1: Sahrif J, et. al.: Recurrent pelvic organ prolapse: International Urogynecological Association Research and Development Committee opinion – Int Urogynecol J (2016). **/2:** IUGA Congress 2019, Poster 30 (Suppl. 1):S320. **/3:** Halaska M, Sedlacek R, Lincova M, Nanka O, Maxova K, Charles University Czech TU Prague: Fixation ability of contemporary used vaginal kits in prolapse surgery. **/4:** Data on file. **/5:** Castro R, et. al.: Vaginal sacrospinous ligament fixation using tissue anchor system vs. a traditional technique for women with apical vaginal prolapse: A randomized controlled trial – Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery (2020)

● SYSTÈME D'ANCRAGE TISSULAIRE – TAS

Les ancrages **TAS** ont été conçus pour permettre la fixation fiable de deux sutures de fixation en polypropylène au ligament sacro-épineux. Avec ses six pointes en polypropylène disposées sur sa circonférence et sa butée de sécurité en bas, le TAS assure:

- Une grande résistance à l'arrachement et une grande précision
- Un ancrage fiable
- Une sécurité par rapport aux structures nerveuses et vasculaires, grâce au tube fourni pour la procédure d'implantation qui apporte une protection supplémentaire

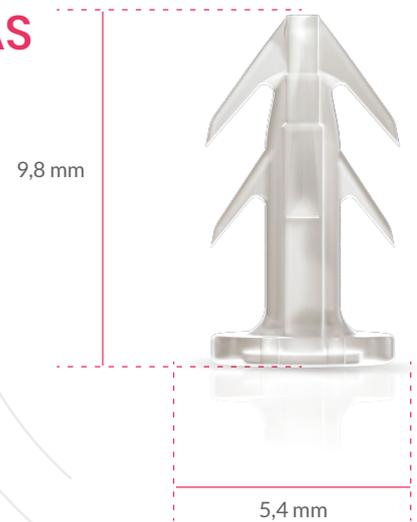

● GUIDE D'INSERTION RÉTRACTABLE – RIG

Le **Guide d'Insertion Rétractable** a été développé pour atteindre la zone d'ancrage de façon à réaliser une insertion précise et sûre de l'ancre. La configuration du RIG, avec son tube protecteur, garantit l'intégrité des tissus environnants pendant l'implantation du TAS dans le ligament sacro-épineux. Avec son **design ergonomique, son petit diamètre et son mécanisme rétractable pour clipper et libérer les ancrs**, il apporte:

- Précision et sécurité lors des manœuvres chirurgicales
- Réduction de la dissection au minimum
- Contrôle total de la fixation et de la libération des ancrs

Mécanisme rétractable

Insertion et libération simples de l'ancre

Guide incurvé

Accès facile au ligament sacro-épineux par l'approche transvaginale. Dissection requise limitée.

Tube protecteur

Protection des tissus environnants durant la procédure d'implantation.

Mécanisme de verrouillage et libération du tube protecteur

Blocage et déblocage faciles du tube protecteur

Poignée ergonomique

Prise en main facile et sûre.

● ANCORIS en pratique

- Prolapsus utérin
- Prolapsus du dôme vaginal
- Prolapsus antérieur avec défaut apical
- Prolapsus postérieur avec défaut apical
- Soutien apical pour des résultats durables sur des réparations antérieures et postérieures.

100.000
+ TAS ↑
IMPLANTÉS₄



SIMPLE. SANS TREILLIS. FIABLE. POLYVALENT.

● CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS D'USAGE

ANCORIS ne doit pas être utilisé sur les patientes:

- ▶ fertiles
- ▶ ayant une infection déclarée ou latente du vagin, du col de l'utérus ou de l'utérus
- ▶ ayant, ou ayant eu, un cancer du vagin, du col de l'utérus ou de l'utérus
- ▶ ayant une radiothérapie en cours ou prévue
- ▶ ayant une allergie connue au polypropylène.

L'implantation d'ANCORIS doit être basée sur une évaluation complète de la patiente, de ses caractéristiques individuelles et préférences. Les points suivants doivent être considérés:

- ▶ ANCORIS doit être utilisé uniquement par des chirurgiens familiarisés avec les procédures chirurgicales de réparation des défauts vaginaux par approche transvaginale.

Pour davantage de précautions et mises en garde, se référer aux instructions d'utilisation de la notice.

● INFORMATIONS POUR LA COMMANDE:

ANCORIS
POP REPAIR SYSTEM

Numéro de commande : KIT-ANC-01

- ▶ 1 unité de distribution avec trois Systèmes d'Ancre Tissulaire (Réf.: TAS)
- ▶ 1 Guide d'Insertion Rétractable conçu pour l'implantation des TAS (Réf.: DPN-MNL)
- ▶ 1 aiguille de suture à chas (Réf.: ESN)
- ▶ 1 pousse-nœuds (Réf.: KP)

www.promedon-urologypf.com/ancoris

Promedon
Urology and Pelvic Floor