


Endourologia

Portfólio de produtos para o tratamento da litíase urinária.

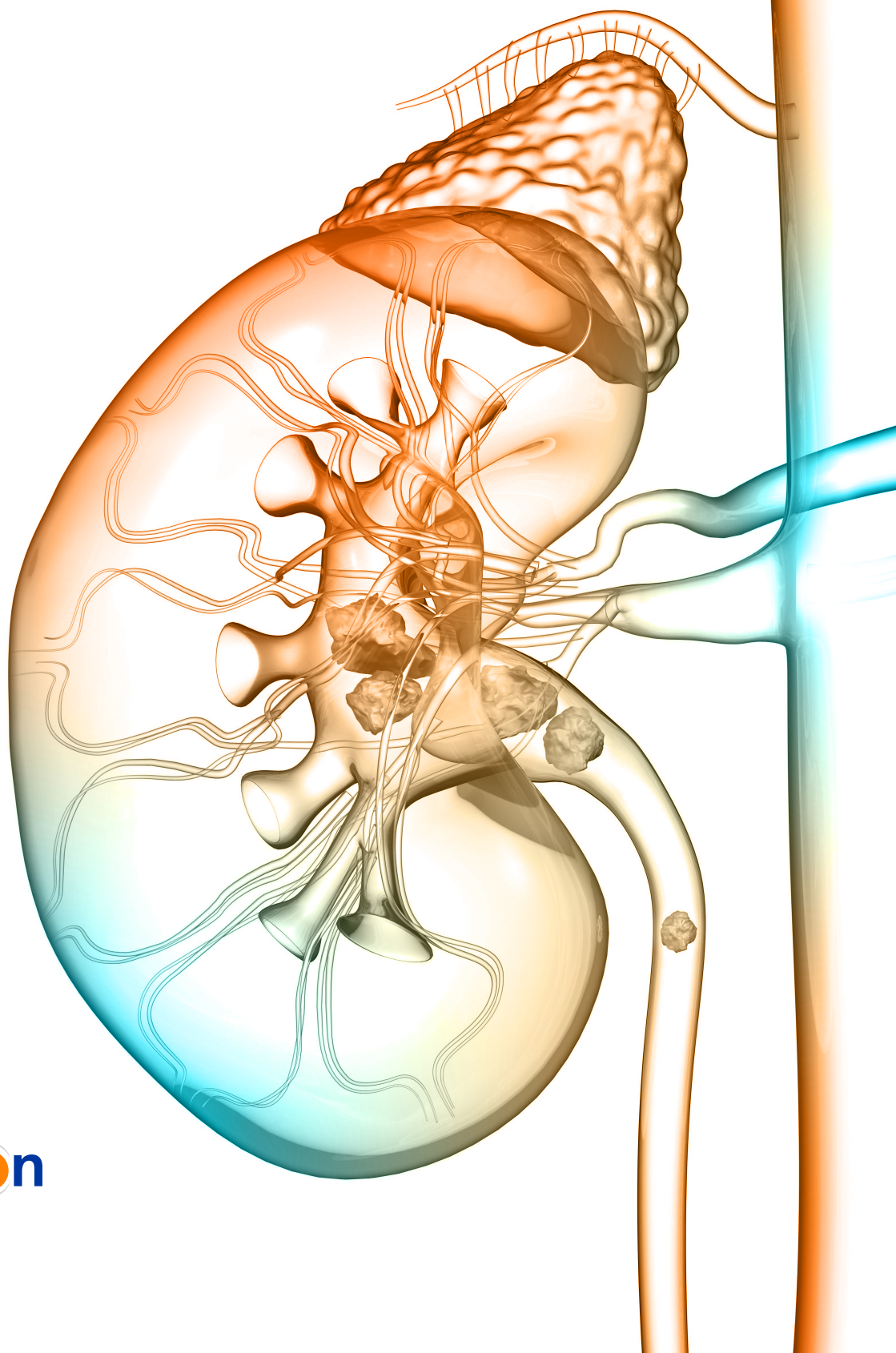

Promedon

Urology and Pelvic Floor

Promedon
Urology and Pelvic Floor

Contribuir para a restauração da qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo e proporcionando aos profissionais da saúde tecnologia médica segura e eficaz.

É por isso que nós trabalhamos todos os dias.

Índice

Acesso

Fio-Guias

Fluenz, Fio-Guia Combinado	06
Fio-Guia de Nitinol Hidrofílico	07
Fio-Guia de PTFE	07
Fio-Guia Zebrada Nitinol	08

Bainha de acesso ureteral

Indrive, Bainha de acesso ureteral	09
------------------------------------	----

Extração

Stratone Frontal	12
Stratone Tipless	13
Stratone	14

Drenagem


Stents Ureterais Urodrain Flex	16
Stents Ureterais Urodrain Soft	17
Kit de Nefrostomia	18
Cateter Ureteral	19
Nefrodrain	19

Dilatação

Kit de Dilatadores

Kit Dilatador Amplatz - Perkut	22
Kit Dilatador Amplatz - Perkut Mini	23
Balão de Dilatação Ureteral	24



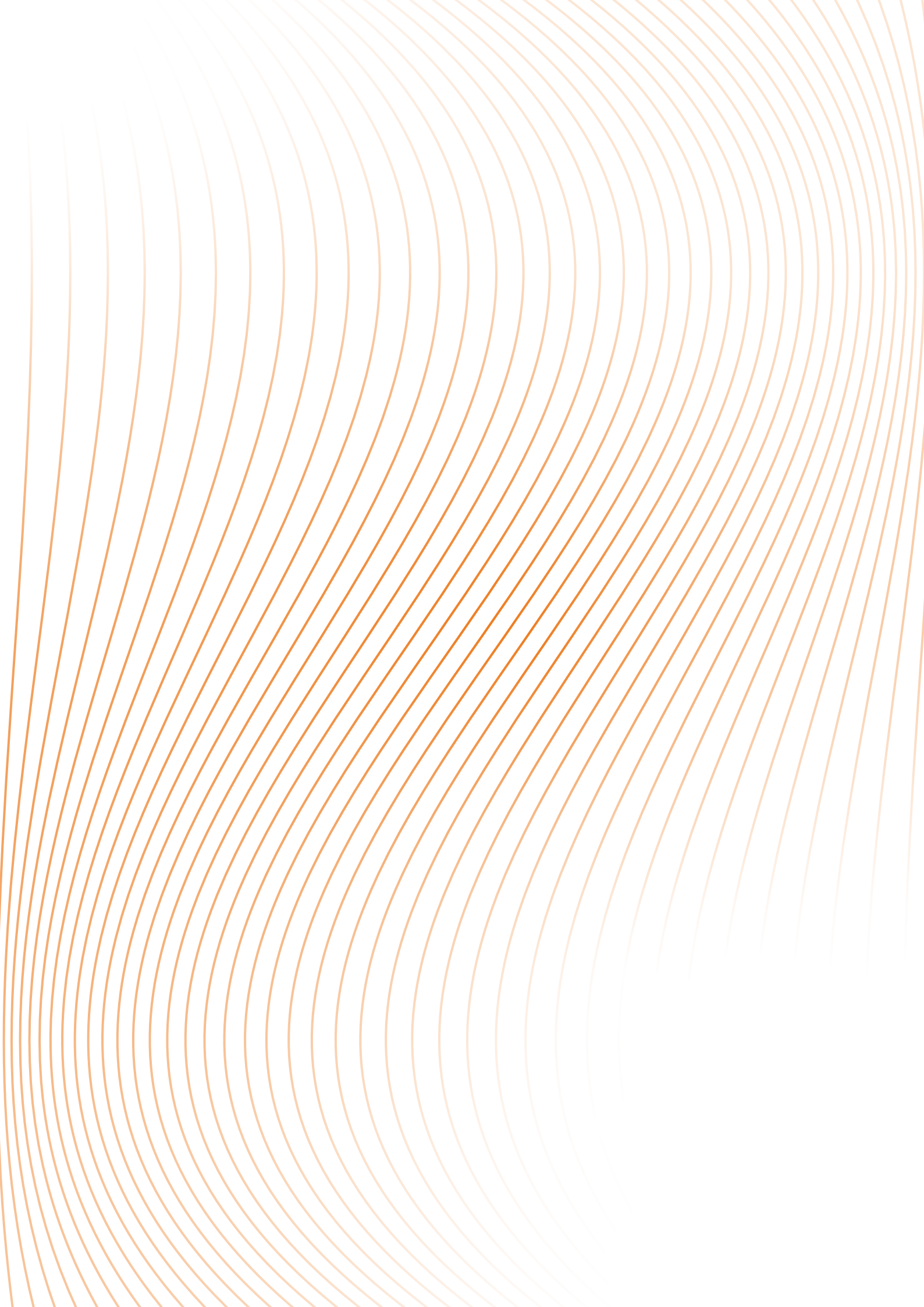




Acesso

FLUENZ

O Fio-Guia híbrido FLUENZ combina os atributos de dois fio-guias em um só, reunindo a facilidade de obter acesso ao rim com o apoio necessário para colocação do cateter.

- Ponta flexível hidrofílica, para facilitar o acesso e reduzir fricção durante o avanço sobre anatomias complexas.
- Núcleo central de nitinol garante controle e manobrabilidade.
- Corpo de aço inoxidável revestido por PTFE para assegurar o controle durante a instrumentação.
- Ponta proximal flexível, para evitar danos ao ureteroscópio.
- Dispensador com inovador mecanismo de acoplamento e deslizamento do fio-guia.

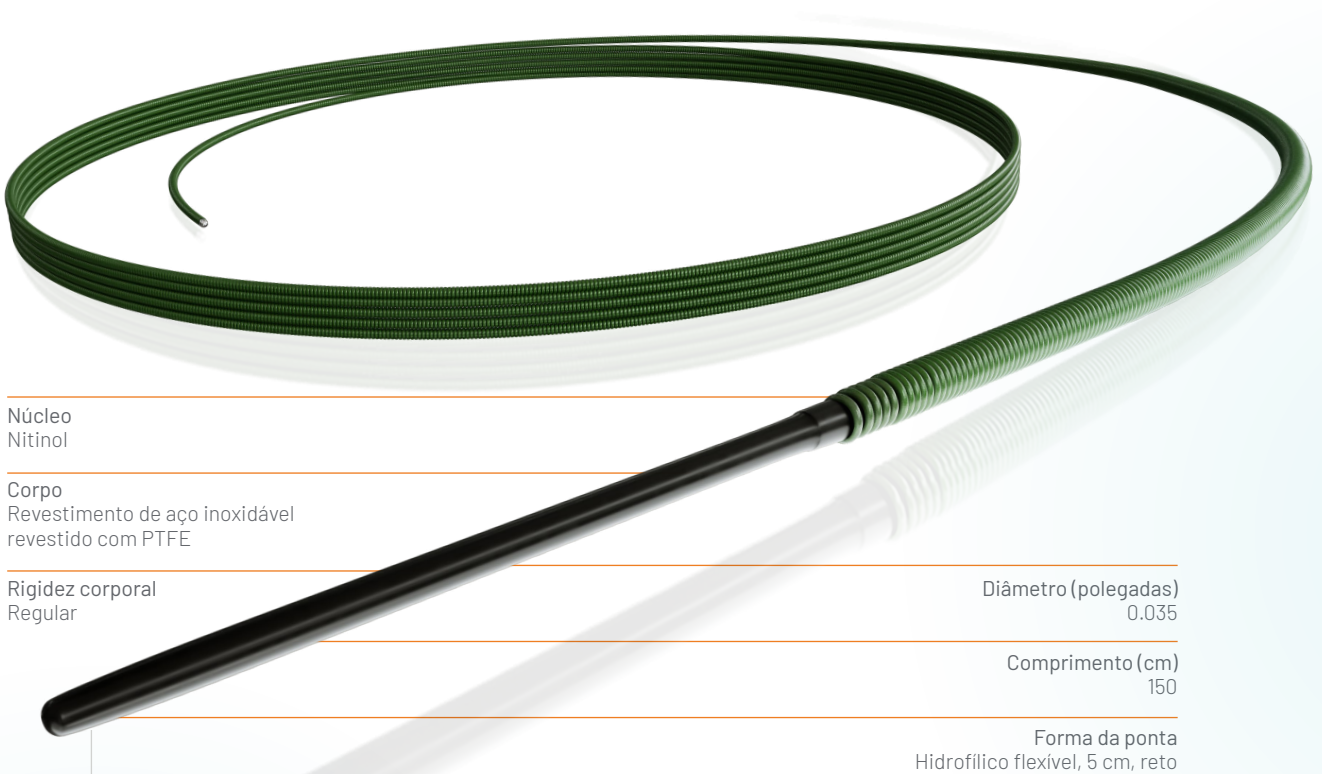

Núcleo
Nitinol

Corpo
Revestimento de aço inoxidável
revestido com PTFE

Rigidez corporal
Regular

Diâmetro (polegadas)
0.035


Comprimento (cm)
150

Forma da ponta
Hidrofílico flexível, 5 cm, reto

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

Referência: G-35-150S-COMBI
Fio-guia híbrido

FIO-GUIA DE NITINOL HIDROFÍLICO

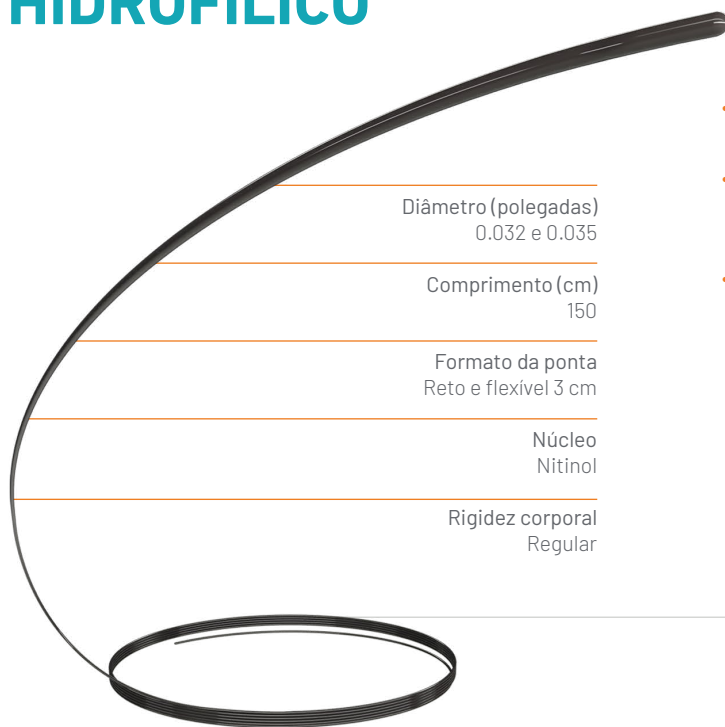

Diâmetro (polegadas)
0.032 e 0.035

Comprimento (cm)
150

Formato da ponta
Reto e flexível 3 cm

Núcleo
Nitinol

Rigidez corporal
Regular

- Núcleo central de nitinol permite controle de manobras e oferece resistência a dobras.
- Revestimento hidrofilico com lubrificação que melhora a interface cateter-guia. Permite um avanço ultra-suave e facilita a passagem para o ureteroscópio
- Produto radiopaco, permite visualização fluoroscópica e posicionamento preciso.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Referências:

0.032": G-32-150-S-NIT

0.035": G-35-150-S-NIT

Guia de Nitinol Hidrofilico

Nº ANVISA: 10306840122

FIO-GUIA DE PTFE

- Núcleo central de aço inoxidável, dá resistência à torção.
- Corpo de PTFE facilita a passagem pela anatomia, garantindo o controle com um corpo rígido, mas ponta flexível.



Diâmetro (polegadas)
0.028 e 0.035

Comprimento (cm)
150

Formato da ponta
Direto

Tipo de ponta
4 cm flexível

Rigidez corporal
Regular

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

Referências:

G-28-150-S-PTFE (0.028")

G-35-150-S-PTFE (0.035")


Guia revestido de PTFE

- Permite a visualização por fluoroscopia e posicionamento preciso.
- O fio-guia também está disponível em kits de stent ureteral.

Nº ANVISA: 10306840120

FIO-GUIA ZEBRADA

Fio-guia de nitinol com revestimento de PTFE de dupla cor e ponta hidrofílica.

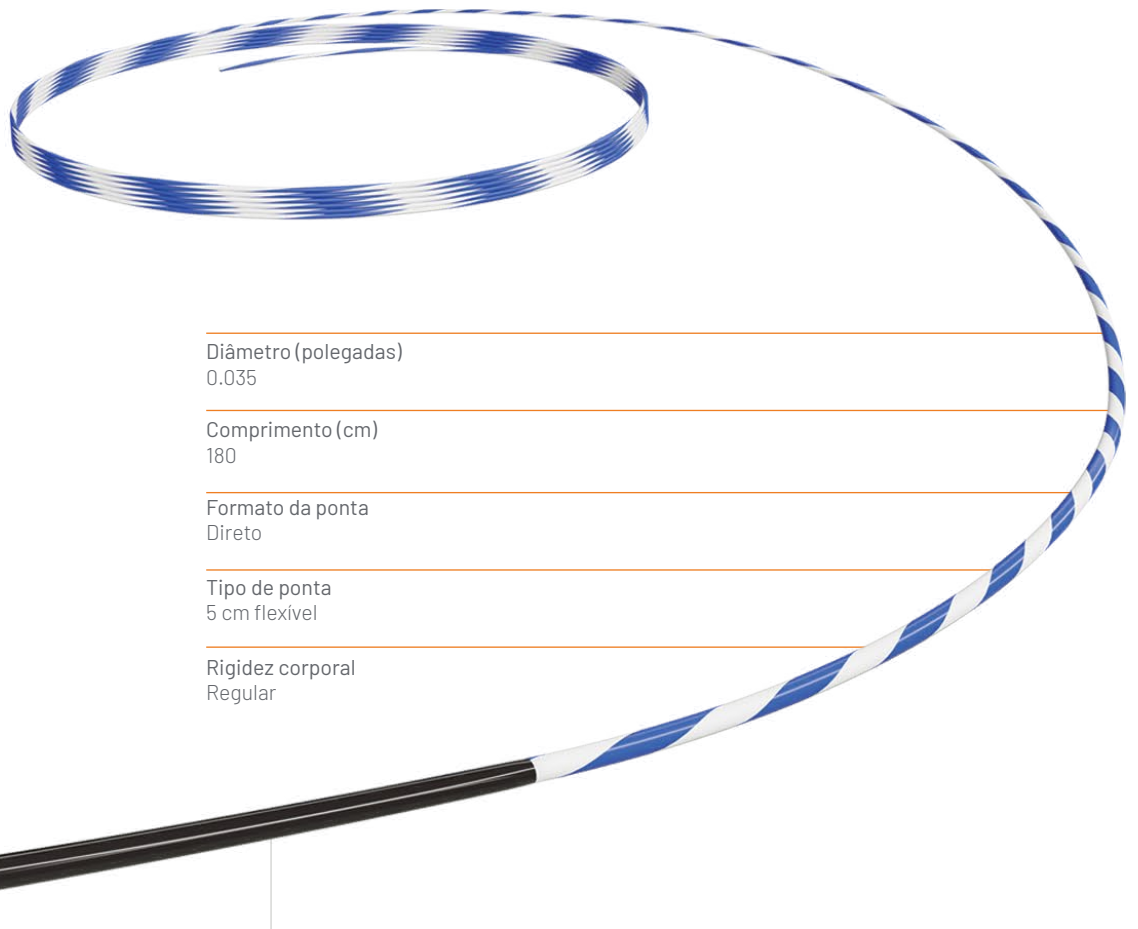

Diâmetro (polegadas)
0.035

Comprimento (cm)
180

Formato da ponta
Direto

Tipo de ponta
5 cm flexível

Rigidez corporal
Regular


- Núcleo central de nitinol permite o controle das manobras e oferece resistência à torção.
- O revestimento de PTFE de duas cores facilita a visualização fluoroscópica, bem como a passagem pela anatomia, proporcionando maior controle e posicionamento preciso.
- Ponta hidrofílica flexível de 5 cm que facilita o acesso e a passagem pelo ureteroscópio, com avanço ultra-suave.
- Radiopaco, permite visualização por fluoroscopia e posicionamento correto.

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS
Referências: G-35-180-S-NIT
Guia de nitinol com revestimento
de PTFE dupla cor.

INDRIVE

A bainha de acesso ureteral INDRIVE é um produto desenvolvido com o objetivo de facilitar o acesso ao trato urinário superior.

- Cria um canal de trabalho contínuo que protege os instrumentos delicados e endoscópios flexíveis.
- Permite melhorar o fluxo de irrigação com o canal de trabalho contínuo sem tortuosidade ou bloqueios, ajudando assim a reduzir a pressão intra-renal.
- Permite a passagem simples de instrumentos durante a ureteroscopia flexível para remoção de cálculos renais.
- Reduz as chances de trauma no ureter durante a troca repetida de instrumentos.

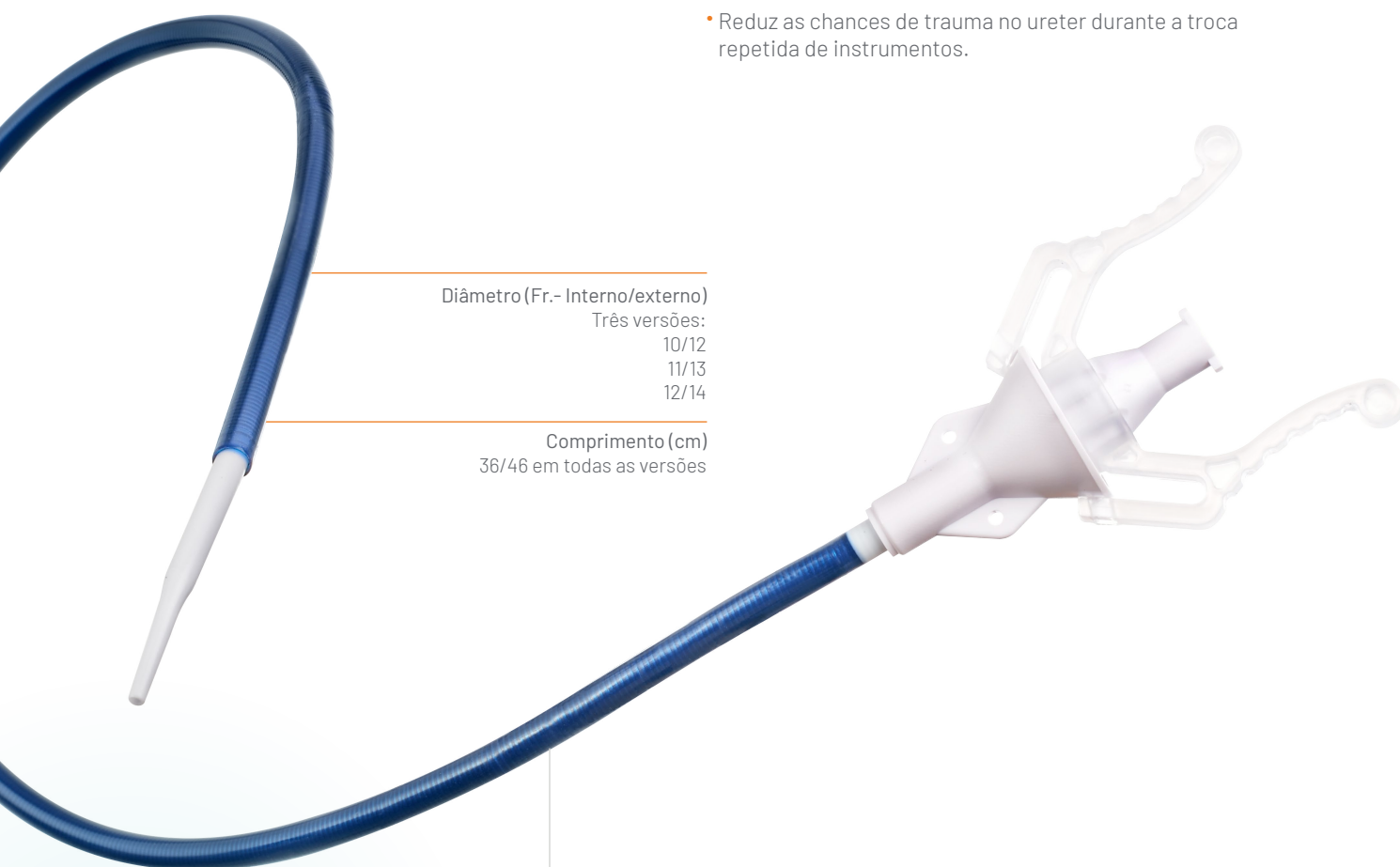

Diâmetro (Fr.- Interno/externo)

Três versões:

10/12

11/13

12/14

Comprimento (cm)


36/46 em todas as versões

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referências

10/12-36-S-C-CO	Diâmetro: 10/12 Fr	Largo 36 cm
10/12-46-S-C-CO	Diâmetro: 10/12 Fr	Largo 46 cm
11/13-36-S-C-CO	Diâmetro: 11/13 Fr	Largo 36 cm
11/13-46-S-C-CO	Diâmetro: 11/13 Fr	Largo 46 cm
12/14-36-S-C-CO	Diâmetro: 12/14 Fr	Largo 36 cm
12/14-46-S-C-CO	Diâmetro: 12/14 Fr	Largo 46 cm

Bainha de Acesso Ureteral

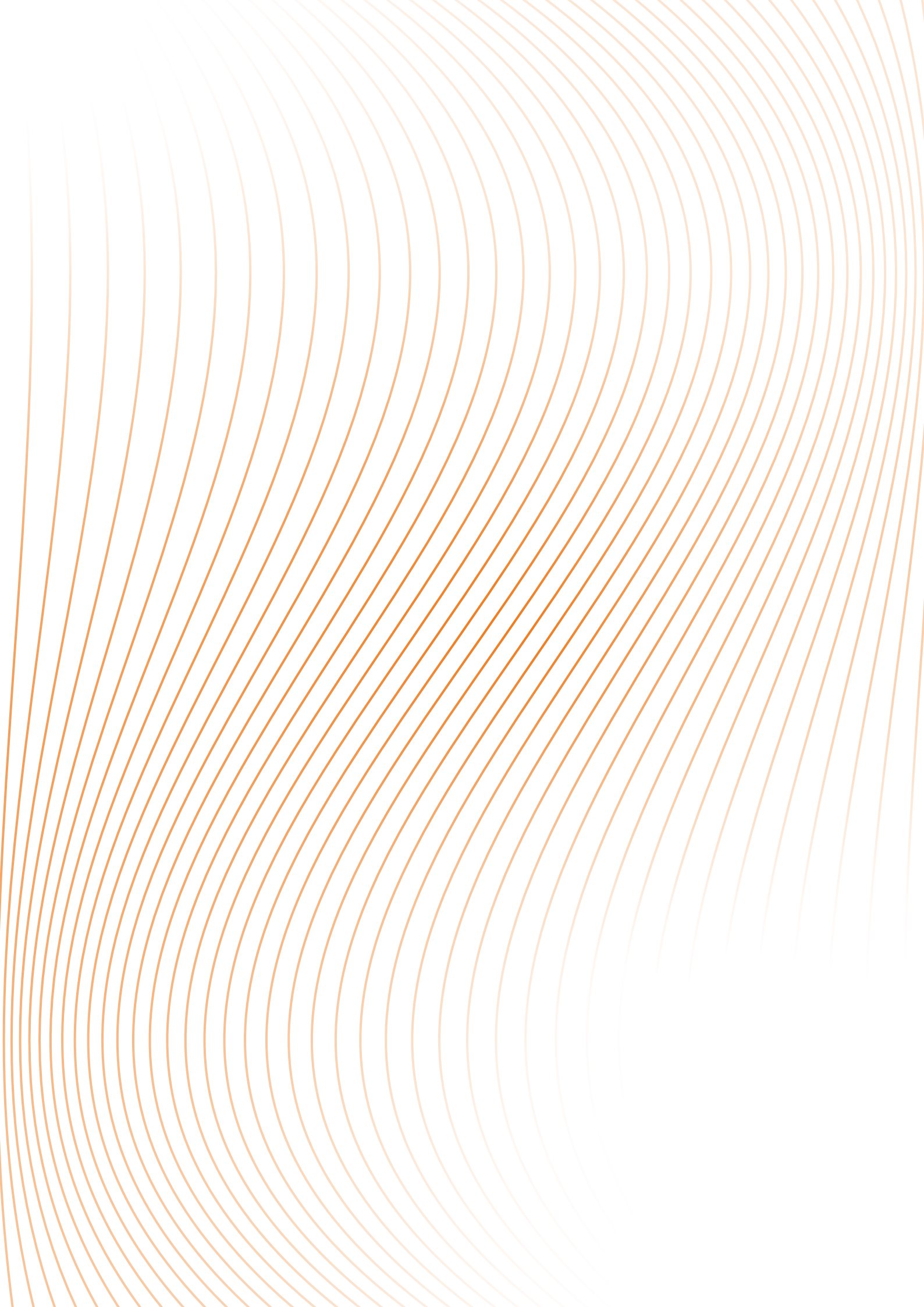




Extração



STRATONE FRONTAL

O Stratone Frontal oferece o mais alto desempenho para capturar, reposicionar e extrair fragmentos de cálculos renais através do trato urinário.

- Aproxima-se frontalmente como uma pinça, captura e retém como uma cesta.
- Em seu estado de deflexão máxima, é possível atingir os cálculos mais desafiadores dentro do trato urinário.
- Design de cesta frontal de três fios de nitinol.
- Manopla linear ergonômica que permite o controle exato da abertura e fechamento da cesta durante o procedimento.
- Diâmetro da bainha de 1,5 Fr, que permite um maior fluxo de irrigação.

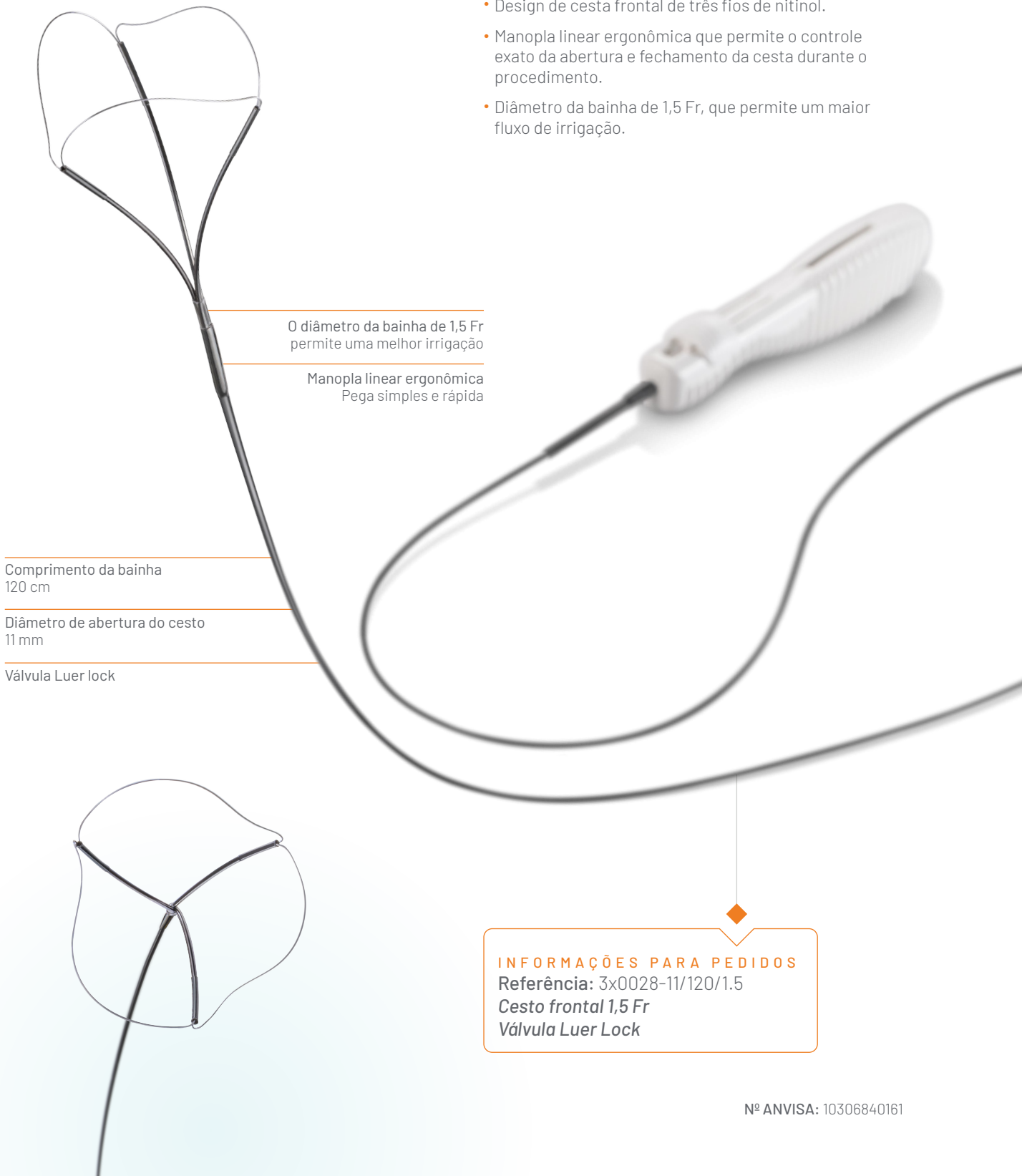

O diâmetro da bainha de 1,5 Fr
permite uma melhor irrigação

Manopla linear ergonômica
Pega simples e rápida

Comprimento da bainha
120 cm

Diâmetro de abertura do cesto
11 mm

Válvula Luer lock

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS


Referência: 3x0028-11/120/1.5

Cesto frontal 1,5 Fr

Válvula Luer Lock

STRATONE TIPLESS

Design de cesta sem ponta, para extração de cálculos no trato urinário superior ou calicial, com acesso menos traumático aos tecidos.

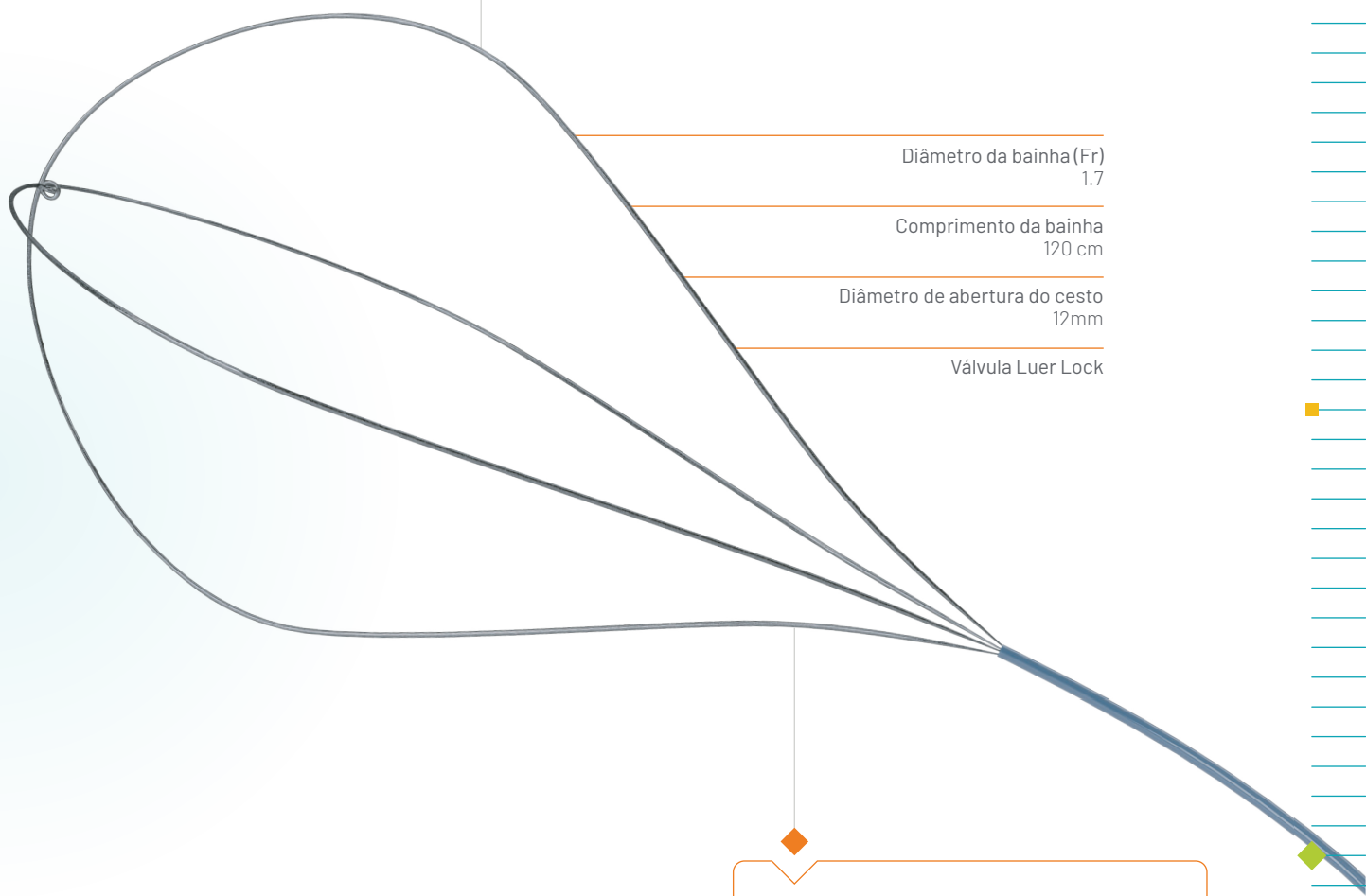

Diâmetro da bainha (Fr)
1.7

Comprimento da bainha
120 cm

Diâmetro de abertura do cesto
12mm

Válvula Luer Lock

- Nova alça linear facilmente removível, o que facilita manipulação do dispositivo dentro do canal de trabalho do ureteroscópio.
- Alça com mecanismo deslizante permitindo um controle preciso da abertura da cesta.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referência: STR-TIP-1.7x120
Bainha e cesta coletora de cálculos
Manopla desmontável




STRATONE

Dispositivo de extração de cálculos renais composto por uma manopla, uma bainha e uma cesta coletora de cálculos.

O cesto basculante é composto por 4 fios helicoidais.

- Cesto de 12 mm de diâmetro na posição completamente aberto.
- A geometria helicoidal dos fios da cesta permite um saca-rolhas para trás e para frente, o que facilita a captura da pedra.
- A manopla desmontável facilita a manipulação do dispositivo dentro do canal de trabalho dos ureteroscópios.
- A manopla também possui uma roda de ajuste e um mecanismo deslizante com trava que permite o controle exato da abertura da cesta.

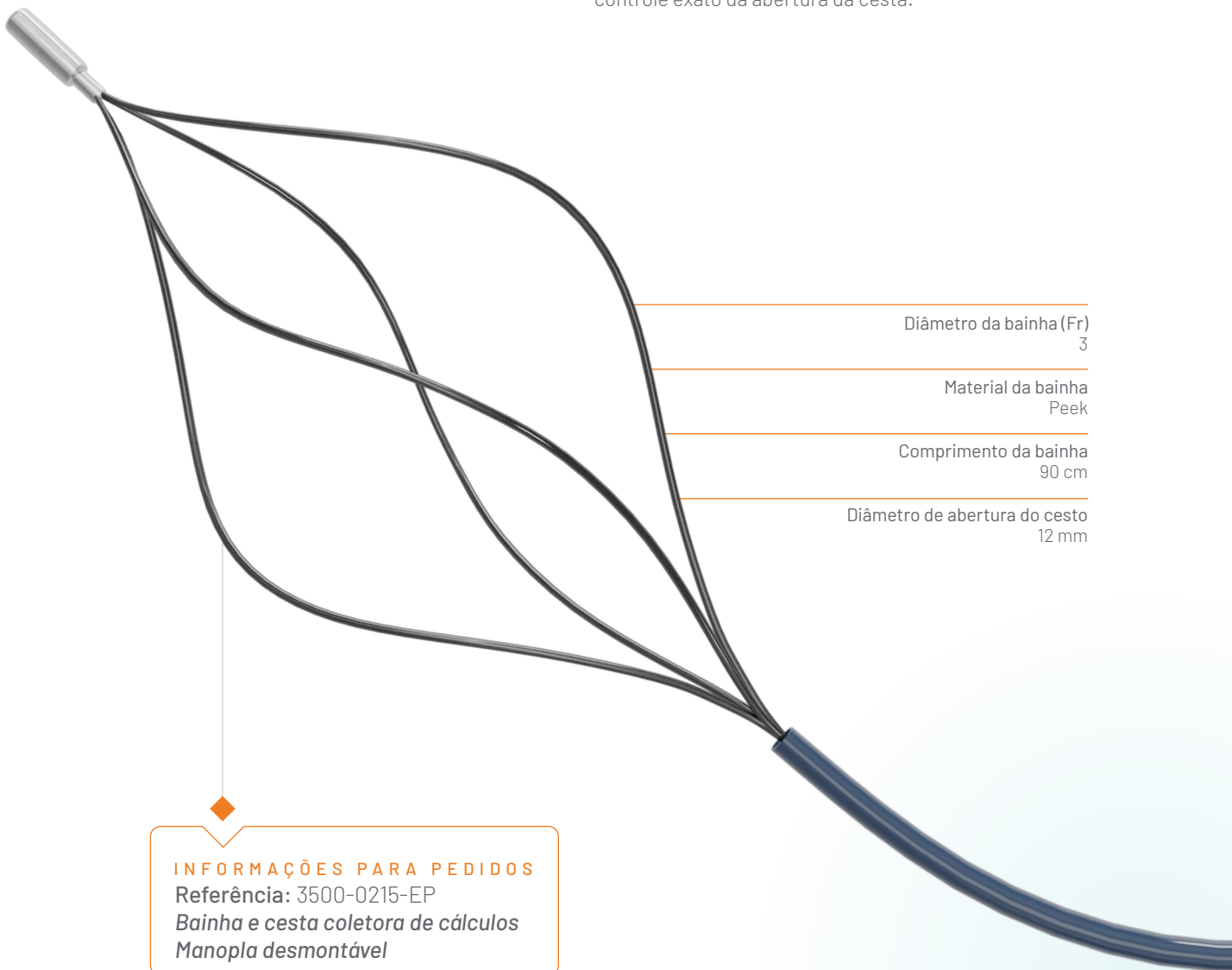

Diâmetro da bainha (Fr)
3

Material da bainha
Peek

Comprimento da bainha
90 cm

Diâmetro de abertura do cesto
12 mm

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS


Referência: 3500-0215-EP

Bainha e cesta coletora de cálculos

Manopla desmontável



Drenagem

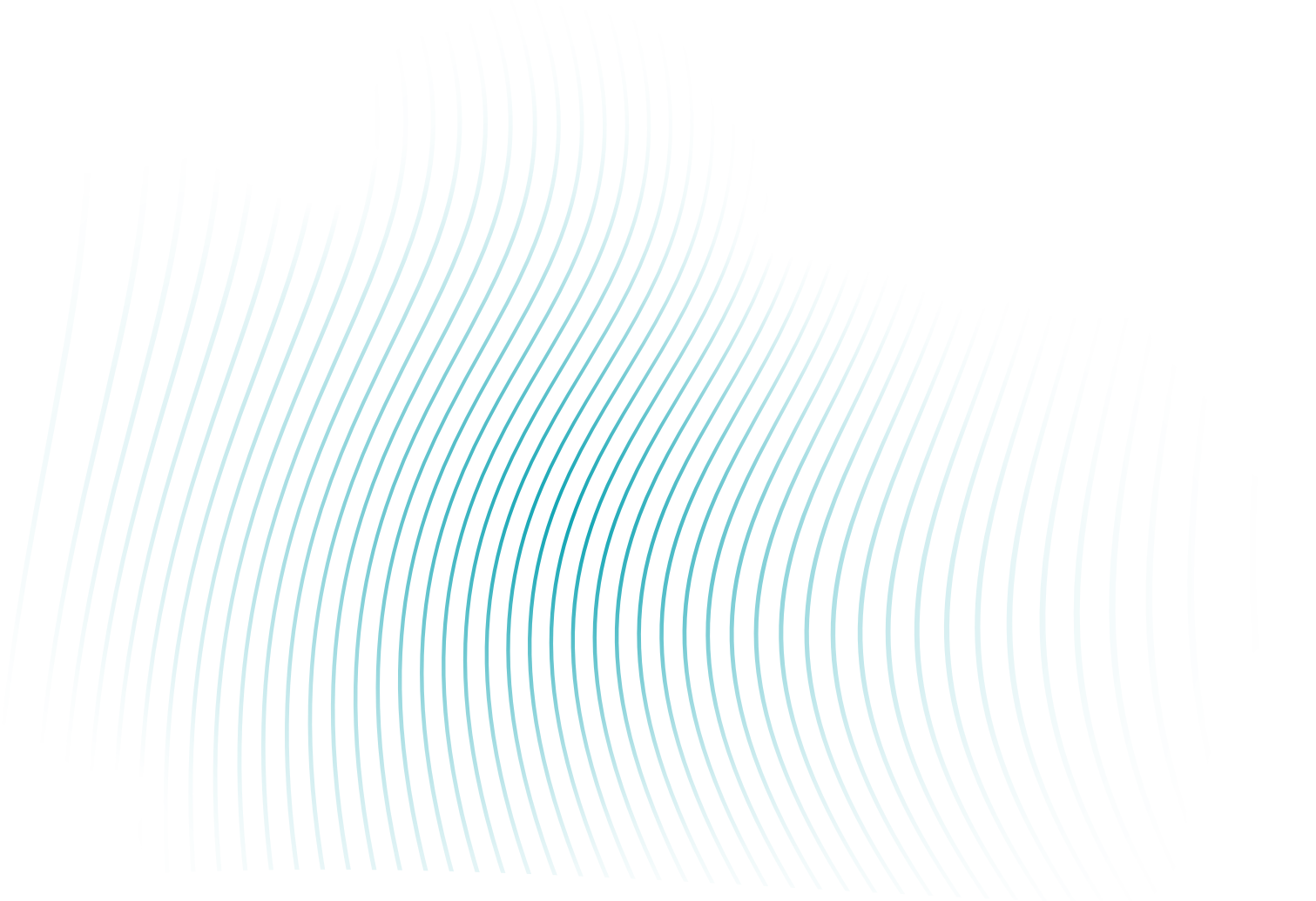

URODRAIN FLEX

- Projetado para drenagem temporária da junção ureterovesical em ureteroscopias flexíveis e semirrígidas.
- Poliuretano termoplástico radiopaco, que vem em dois modelos de diferentes durezas: Flex e Soft.
- Duplo pig tail em todos os seus modelos.



Gravação do stent com marca e diâmetro-comprimento

Inclui fio de sutura

Marcas de graduação

Circuito fechado para melhor retenção

Ponta cônica para posicionamento atraumático

- Apresenta-se opcionalmente como stent ureteral com pusher ou como kit com stent, pusher e guia de acesso.
- Stent e kit Urodrain Flex com fio-guia de PTFE ou nitinol.

CONJUNTOS URETERAIS URODRAIN E STENTS

CÓDIGO DO PRODUTO

MEDIDA EM FR.	COMPRIMENTO	CÓDIGO DO PRODUTO		
		STENT URETERAL (SEM GUIA DE ACESSO) Nº ANVISA: 10306849013	KIT COM GUIA DE PTFE Nº ANVISA: 10306849014	KIT COM GUIA DE NITINOL Nº ANVISA: 10306849012
4 Fr. (Pediátrico)	12 cm	DJ4012-0-S1	ST40120T-S1	
	18 cm	DJ4018-0-S1	ST40180T-S1	
4,7 Fr.	22 cm	DJ4722-0-S1	ST47220T-S1	ST47220N-S1
	24 cm	DJ4724-0-S1	ST47240T-S1	ST47240N-S1
	26 cm	DJ4726-0-S1	ST47260T-S1	ST47260N-S1
	28 cm	DJ4728-0-S1	ST47280T-S1	ST47280N-S1
6 Fr.	24 cm	DJ6024-0-S1	ST60210T-S1	ST60210N-S1
	26 cm	DJ6026-0-S1	ST60260T-S1	ST60260N-S1
	28 cm	DJ6028-0-S1	ST60280T-S1	ST60280N-S1
7 Fr.	26 cm	DJ7026-0-S1	ST70260T-S1	ST70260N-S1
	28 cm	DJ7028-0-S1	ST70280T-S1	ST70280N-S1

URODRAINSOFT

- Stent Urodrain Soft e kit com fio guia de PTFE ou Nitinol. O material dos stents soft é mais macio que o dos stents flexíveis.
- Disponível em modelo pediátrico de 4 Fr.




CONJUNTOS URETERAIS URODRAIN E STENTS

MEDIDA EM FR.	COMPRIMENTO	CÓDIGO DO PRODUTO		
		STENT URETERAL (SEM GUIA DE ACESSO) Nº ANVISA: 10306849013	KIT COM GUIA DE PTFE Nº ANVISA: 10306849014	KIT COM GUIA DE NITINOL Nº ANVISA: 10306849012
4 Fr. (Pediátrico)	12 cm	DJ4012-0-S2	ST40120T-S2	
	18 cm	DJ4018-0-S2	ST40180T-S2	
4,7 Fr.	22 cm	DJ4722-0-S2	ST47220T-S2	ST47220N-S2
	24 cm	DJ4724-0-S2	ST47240T-S2	ST47240N-S2
	26 cm	DJ4726-0-S2	ST47260T-S2	ST47260N-S2
	28 cm	DJ4728-0-S2	ST47280T-S2	ST47280N-S2
6 Fr.	24 cm	DJ6024-0-S2	ST60240T-S2	ST60240N-S2
	26 cm	DJ6026-0-S2	ST60260T-S2	ST60260N-S2
	28 cm	DJ6028-0-S2	ST60280T-S2	ST60280N-S2
7 Fr.	26 cm	DJ7026-0-S2	ST70260T-S2	ST70260N-S2
	28 cm	DJ7028-0-S2	ST70280T-S2	ST70280N-S2

KIT DE NEFROSTOMIA

O Kit de Nefrostomia Promedon é composto por produtos específicos para acessar os cálices do rim, confeccionados com materiais biocompatíveis de alta qualidade.

O kit de nefrostomia inclui agulhas com dois tipos de pontas: chiba e trocarte, cateter de drenagem monojota, três dilatadores fasciais, guia de PTFE, estilete e conector para bolsa de urina.

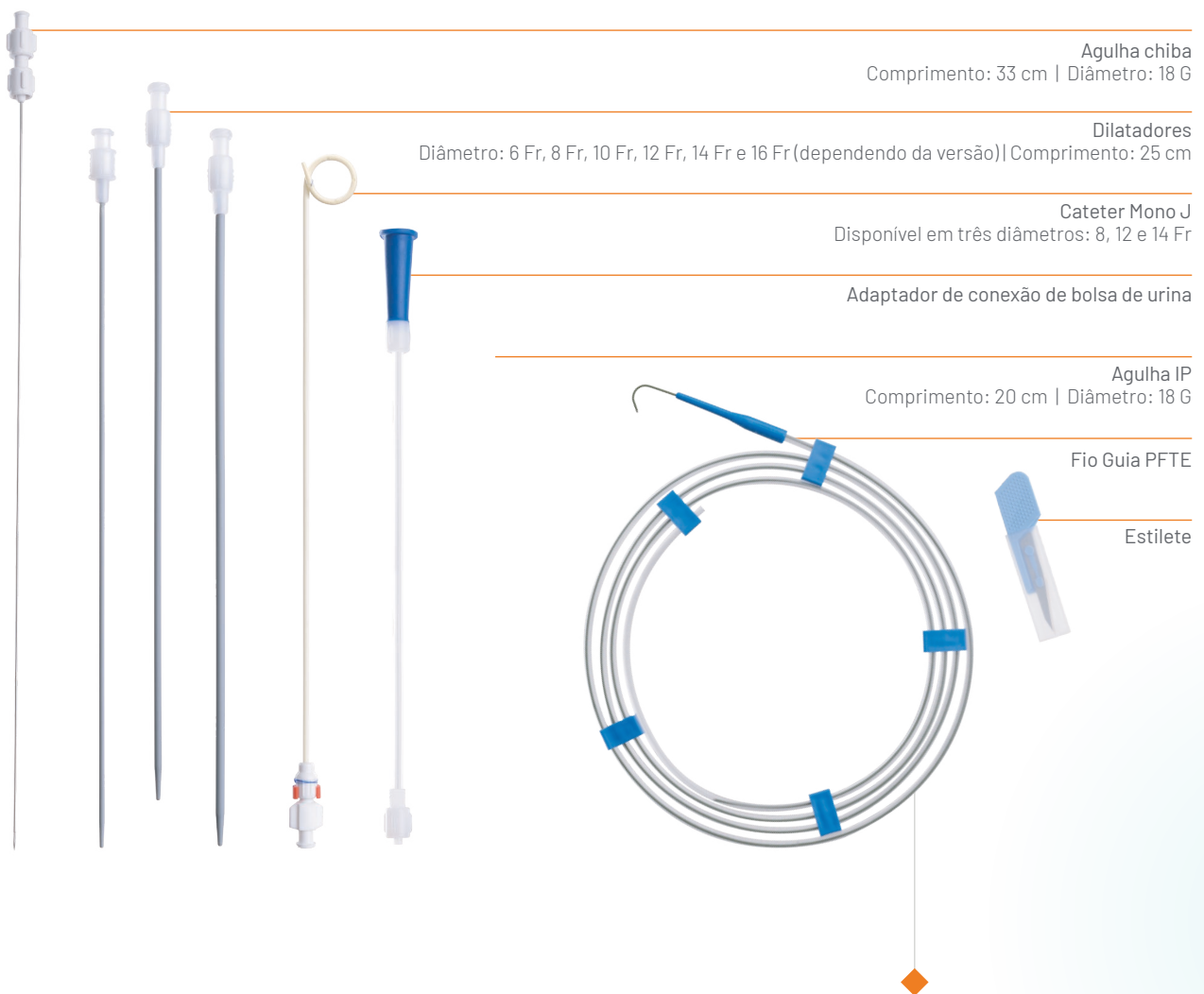

INFORMAÇÕES DE PEDIDOS

Referência: SNEF-08

1 Cateter Mono J de 8Fr. | 3 Dilatadores de 6Fr, 8Fr e 10Fr. | 1 Agulha chiba
1 Agulha IP | 1 Fio Guia | 1 Adaptador de conexão | Estilete

Referência: SNEF-12

1 Cateter Mono J de 12Fr. | 3 Dilatadores de 10Fr, 12Fr e 14Fr. | 1 Agulha chiba
1 Agulha IP | 1 Fio Guia | 1 Adaptador de conexão | Estilete

Referência: SNEF-14

1 Cateter Mono J de 14Fr. | 3 Dilatadores de 12Fr, 14Fr y 16Fr. | 1 Agulha chiba
1 Agulha IP | 1 Fio Guia | 1 Adaptador de conexão | Estilete

CATETER URETERAL

O Cateter Ureteral é um produto de várias utilizações em procedimentos endourológicos.


- O Cateter Ureteral é utilizado para injetar contraste e irrigação em procedimentos endourológicos.
- Tem visibilidade radiopaca.
- Feito de material flexível para facilitar o acesso ao rim.
- Comprimento 70 cm.




Nº ANVISA: 10306840146

NEFRODRAIN

Com o objetivo de oferecer uma solução de drenagem para nefrostomias e cirurgias PCNL, apresentamos o NEFRODRAIN, nosso cateter monojota com conector luer lock.

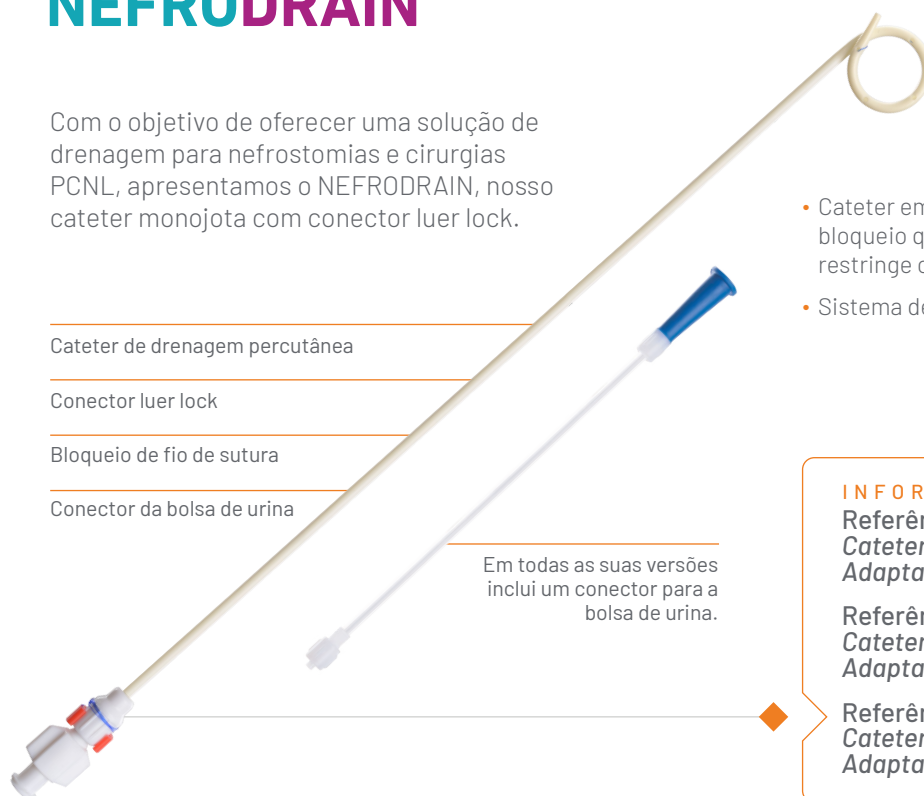

Nº ANVISA: 10306849019

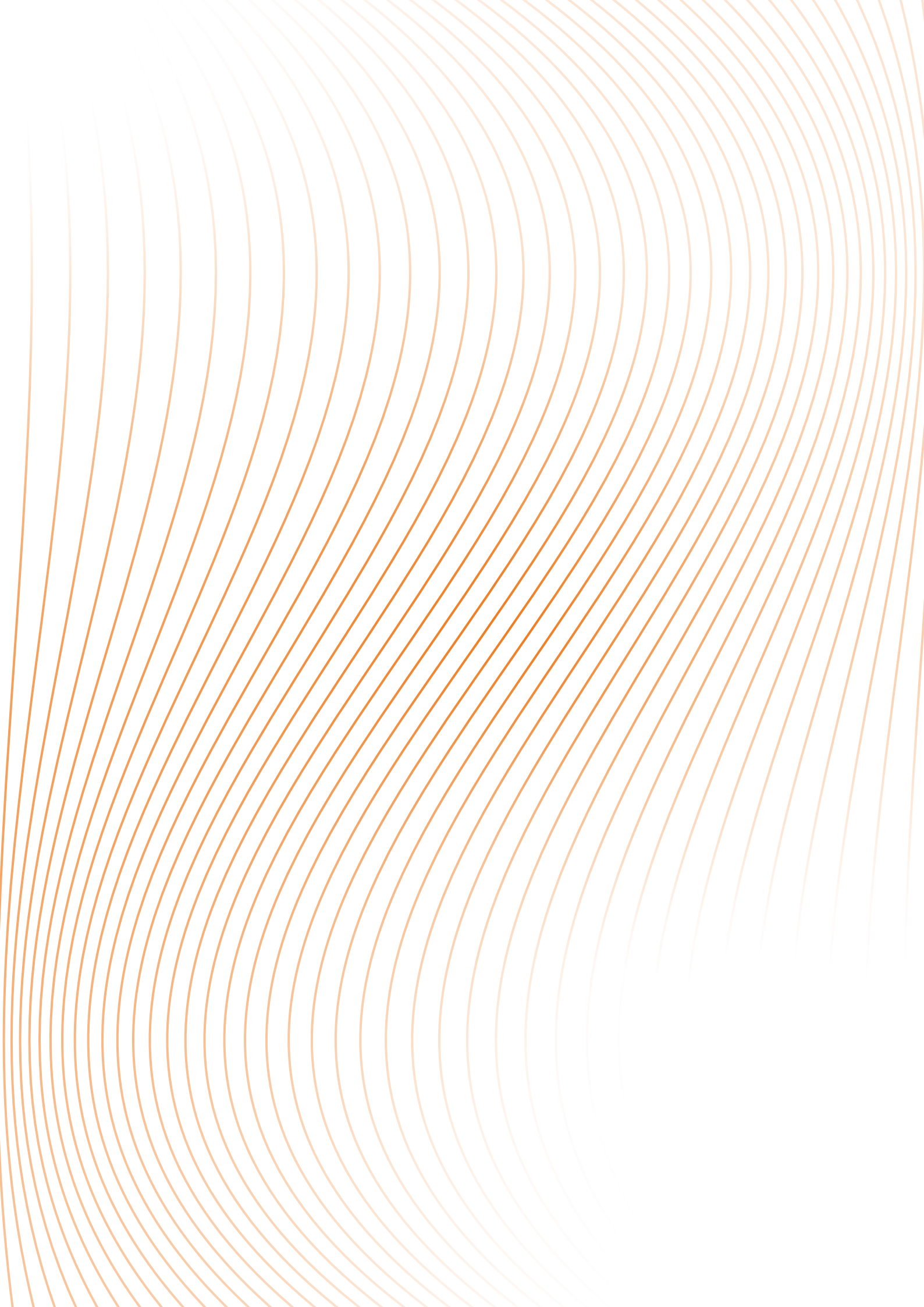



Dilatação

PERKUT

- O material do cateter-guia e das bainhas de dilatação é PTFE e o dos dilatadores, policloreto de vinila (PVC).
- O conjunto consiste em um cateter guia de 8 Fr, uma bainha introdutora de 10 Fr, 4 bainhas (24-26-28-30 Fr) e 13 dilatadores de 8 a 30 Fr.

- Os dilatadores apresentam marcas de graduação e uma ponta cônica suave para acesso atraumático através do tecido.
- Melhor manobrabilidade para o cirurgião.
- Material firme, estável e resistente a dobras.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referência: ST-PCNL-LB

13 Dilatadores | 4 Bainhas | Cateter

O comprimento dos dilatadores é de 23 a 30 cm.

Comprimento das bainhas
17cm

Comprimento do cateter
80cm

Nº ANVISA: 10306840179

PERKUT MINI

- O conjunto consiste em um cateter guia de 8 Fr, uma bainha de cateter introdutor de 10 Fr, 6 bainhas de 12 a 22 Fr e 9 dilatadores de 6 a 22 Fr.
- O material do cateter-guia e das bainhas de dilatação é PTFE e o dos dilatadores, policloreto de vinila (PVC). Esses componentes são específicos para mini cirurgia percutânea.

- Os dilatadores apresentam marcas de graduação e uma ponta cônica suave para acesso atraumático através do tecido.
- Específico para cirurgias mini e ultra mini percutâneas.
- Comprimento dos dilatadores: 25-30 cm
- Comprimento das bainhas: 17 cm



Diâmetro dos dilatadores em Fr
6-22

Diâmetro da bainha em Fr
12-22

Diâmetro do cateter em F
8

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referência: ST-MINI-PCNL-LB

Um cateter guia de 8 Fr


Uma bainha de cateter introdutor de 10 Fr.

6 bainhas (de 12 a 22 Fr) | 9 dilatadores de 6 a 22 Fr.

XPUR

O cateter balão é usado para dilatar o ureter em casos de estenose ureteral.



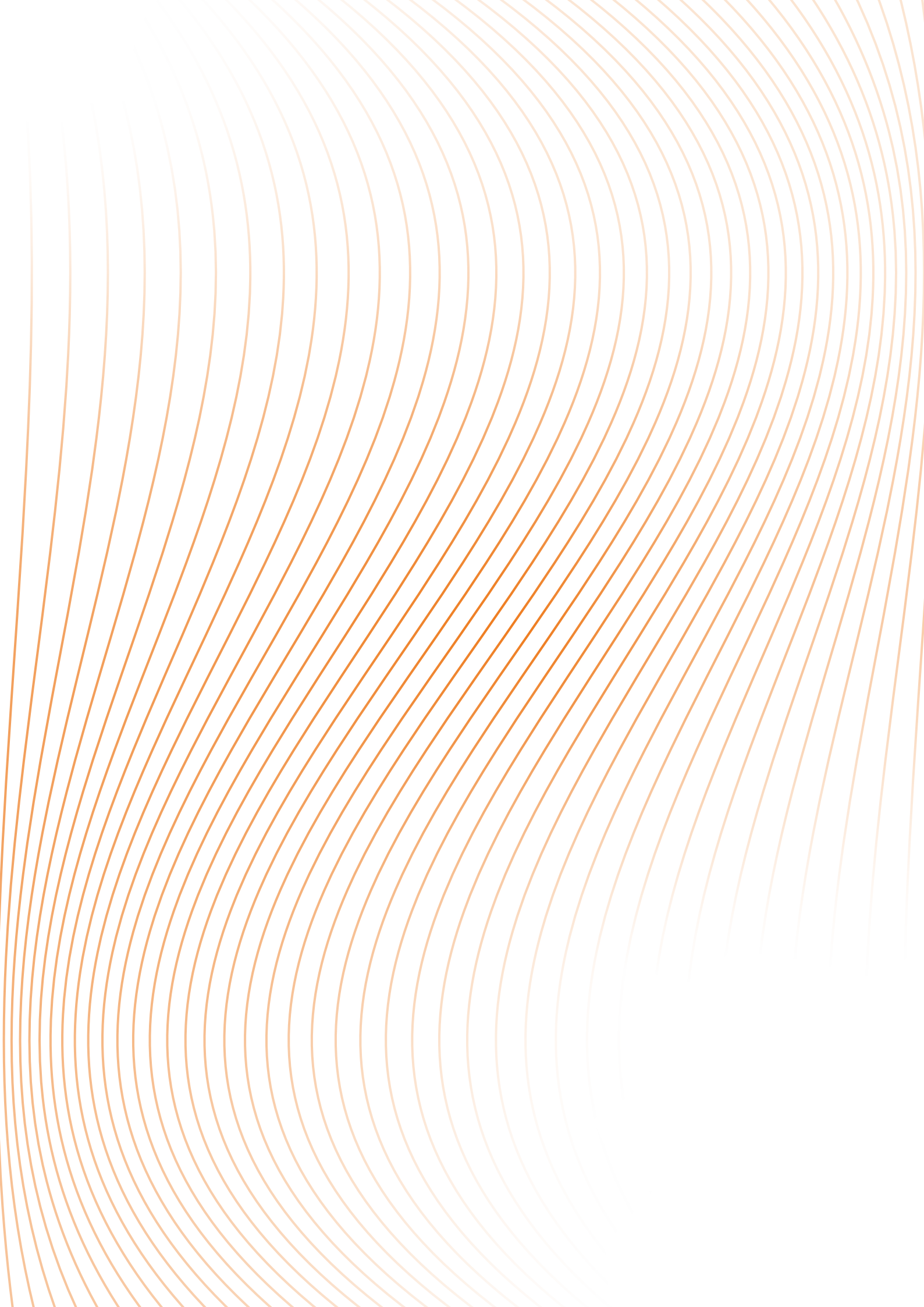

OUTRAS SOLUÇÕES EM:

SAÚDE FEMININA

◆ Incontinência urinária de esforço



◆ Prolapso de órgãos pélvicos



A SAÚDE MASCULINA

◆ Incontinência urinária



◆ Prótese peniana



◆ Prótese testicular



SAÚDE INFANTIL





Os produtos apresentados neste catálogo podem não estar disponíveis no seu país. Nesse caso, considere o conteúdo para fins informativos.

HEAD QUARTERS

PROMEDON S.A.
CÓRDOBA, ARGENTINA

Av. Gral Manuel Savio L3 M3
Parque Industrial Ferreyra
X5123XAD - Córdoba

Consultas: marketing@promedon.com

Promedon

Urology and Pelvic Floor

www.promedon-upf.com

2023

PSD-00000376 (03) / SEP-2023