


Endourologia

Portfólio de produtos para o tratamento da litíase urinária.

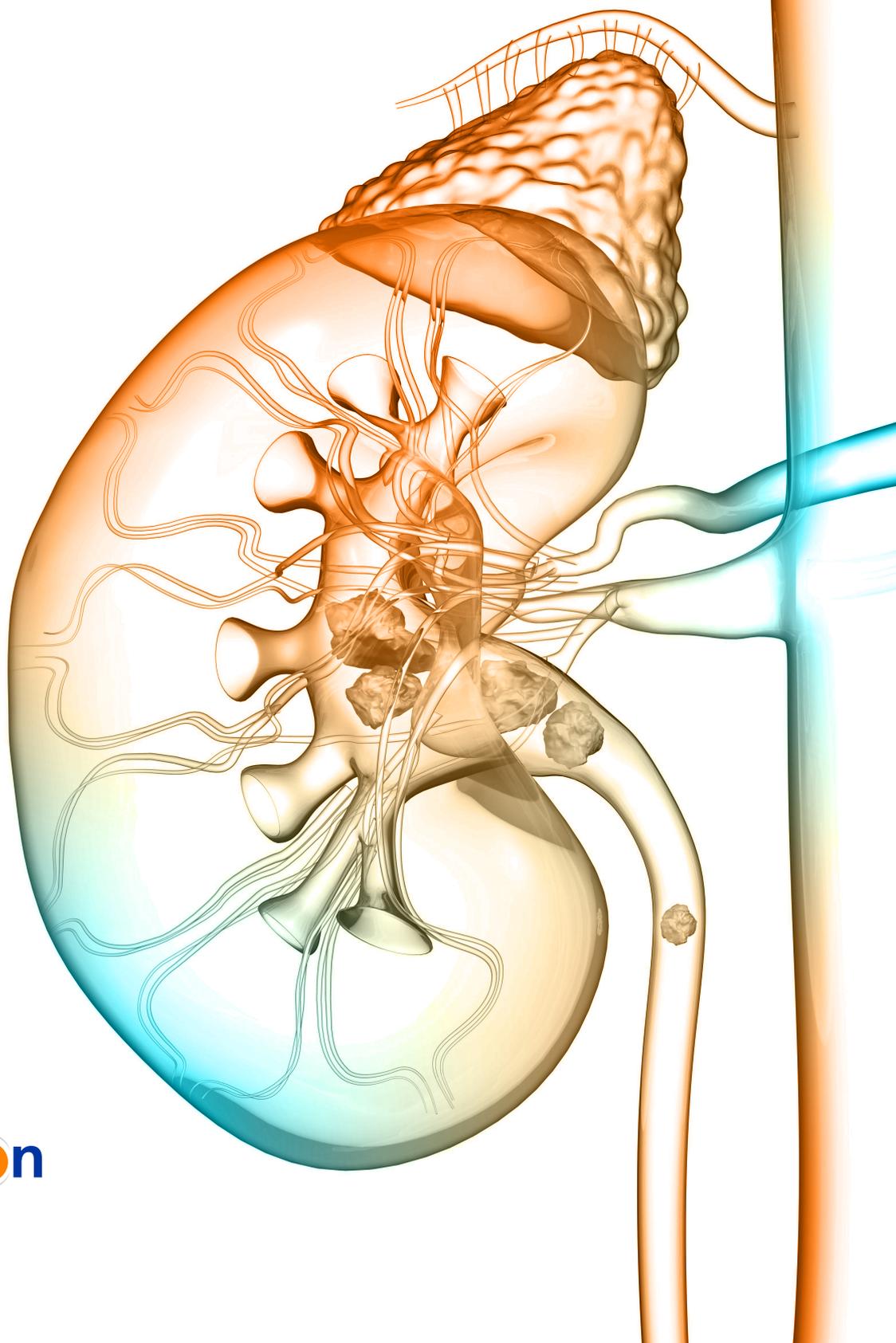

Promedon

Urology and Pelvic Floor

Promedon
Urology and Pelvic Floor

Contribuir para a restauração da qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo e proporcionando aos profissionais da saúde tecnologia médica segura e eficaz.

É por isso que nós trabalhamos todos os dias.

Índice

Acesso

Fio-Guias

Fluenz, Fio-Guia Combinado	06
Fio-Guia de Nitinol Hidrofílico	07
Fio-Guia de PTFE	07
Fio-Guia Zebrada Nitinol	08

Bainha de acesso ureteral

Indrive, Bainha de acesso ureteral	09
------------------------------------	----

Extração

Stratone Frontal	12
Stratone Tipless	13
Stratone	14

Drenagem


Stents Ureterais Urodrain Flex	16
Stents Ureterais Urodrain Soft	17
Kit de Nefrostomia	18
Cateter Ureteral	19

Dilatação

Kit de Dilatadores

Kit Dilatador Amplatz - Perkut	22
Balão de Dilatação Ureteral	23



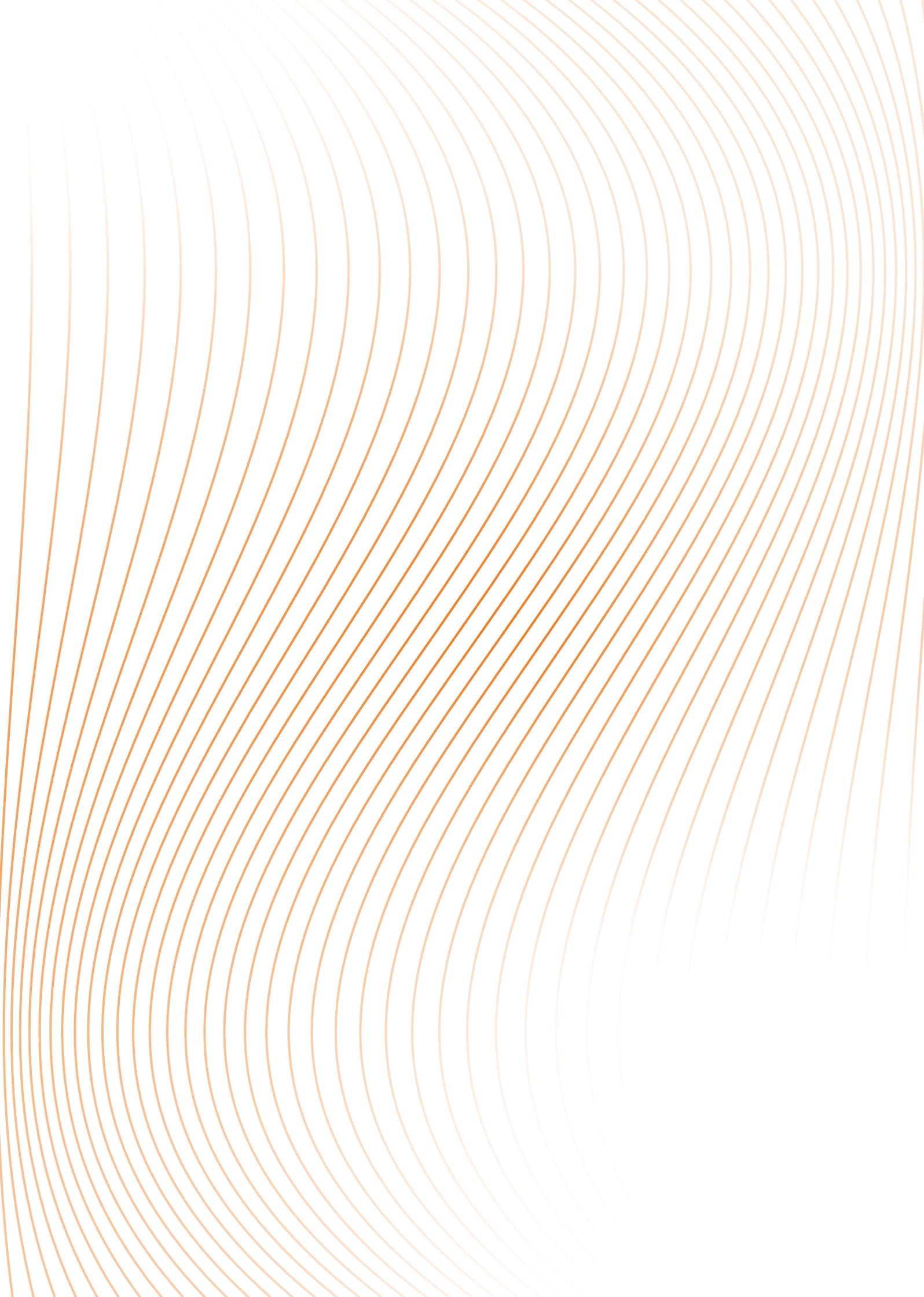



Acesso

FLUENZ

O Fio-Guia híbrido FLUENZ combina os atributos de dois fio-guias em um só, reunindo a facilidade de obter acesso ao rim com o apoio necessário para colocação do cateter.

- Ponta flexível hidrofílica, para facilitar o acesso e reduzir fricção durante o avanço sobre anatomias complexas.
- Núcleo central de nitinol garante controle e manobrabilidade.
- Corpo de aço inoxidável revestido por PTFE para assegurar o controle durante a instrumentação.
- Ponta proximal flexível, para evitar danos ao ureteroscópio.
- Apresentação dos guias: vendidos em uma caixa com 10 unidades.

Dispensador com acoplamento e deslizamento inovadores e guia deslizante

Núcleo
Nitinol

Corpo
Revestimento de aço inoxidável
revestido com PTFE

Rigidez do corpo
Regular

Diâmetro (em polegadas)
0,035


Comprimento (cm)
150

Forma da ponta
Hidrofílico flexível, 5 cm, reto

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

Referência: G-35-150S-COMBI
Fio-guia híbrido

FIO-GUIA DE NITINOL HIDROFÍLICO

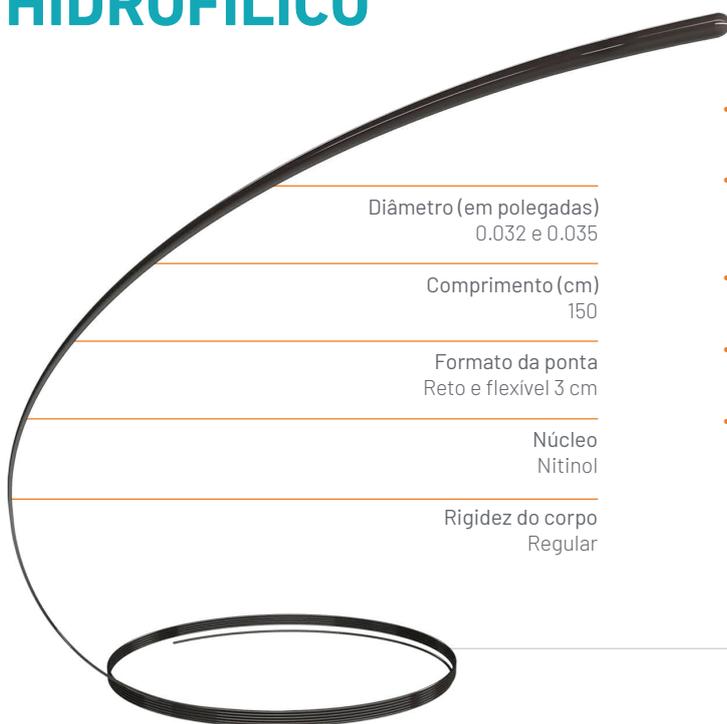

Diâmetro (em polegadas)
0.032 e 0.035

Comprimento (cm)
150

Formato da ponta
Reto e flexível 3 cm

Núcleo
Nitinol

Rigidez do corpo
Regular

- Núcleo central de nitinol permite controle de manobras e oferece resistência a dobras.
- Revestimento preto hidrofilico com lubrificação que melhora a interface cateter-guia. Permite o avanço ultrasuave e a fácil passagem pelo ureteroscópio.
- Produto radiopaco, permite visualização fluoroscópica e posicionamento preciso.
- Apresentação dos guias: vendidos em uma caixa com 10 unidades.
- O fio-guia também está disponível no stent ureteral.


INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Referências:
0.032": G-32-150-S-NIT
0.035": G-35-150-S-NIT
Guia de Nitinol Hidrofilico

Nº ANVISA: 10306840122

FIO-GUIA DE PTFE

- Núcleo central de aço inoxidável, dá resistência à torção.
- Revestimento de PTFE verde, que facilita a passagem pela anatomia, possui um corpo rígido, mas com uma ponta flexível.

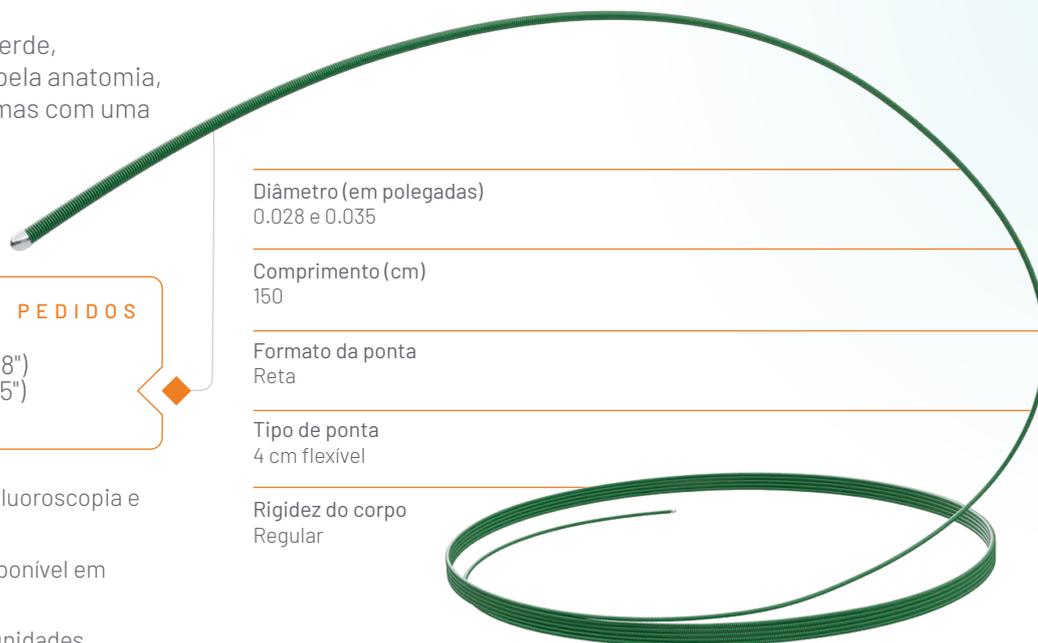

Diâmetro (em polegadas)
0.028 e 0.035

Comprimento (cm)
150

Formato da ponta
Reta

Tipo de ponta
4 cm flexível

Rigidez do corpo
Regular

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS


Referências:
G-28-150-S-PTFE (0.028")
G-35-150-S-PTFE (0.035")
Guia revestido de PTFE

- Permite a visualização por fluoroscopia e posicionamento preciso.
- O fio-guia também está disponível em kits de stent ureteral.
- É vendido em caixas de 10 unidades.

Nº ANVISA: 10306840120

FIO-GUIA ZEBRADA

Fio-guia de nitinol com revestimento de PTFE de dupla cor e ponta hidrofílica.

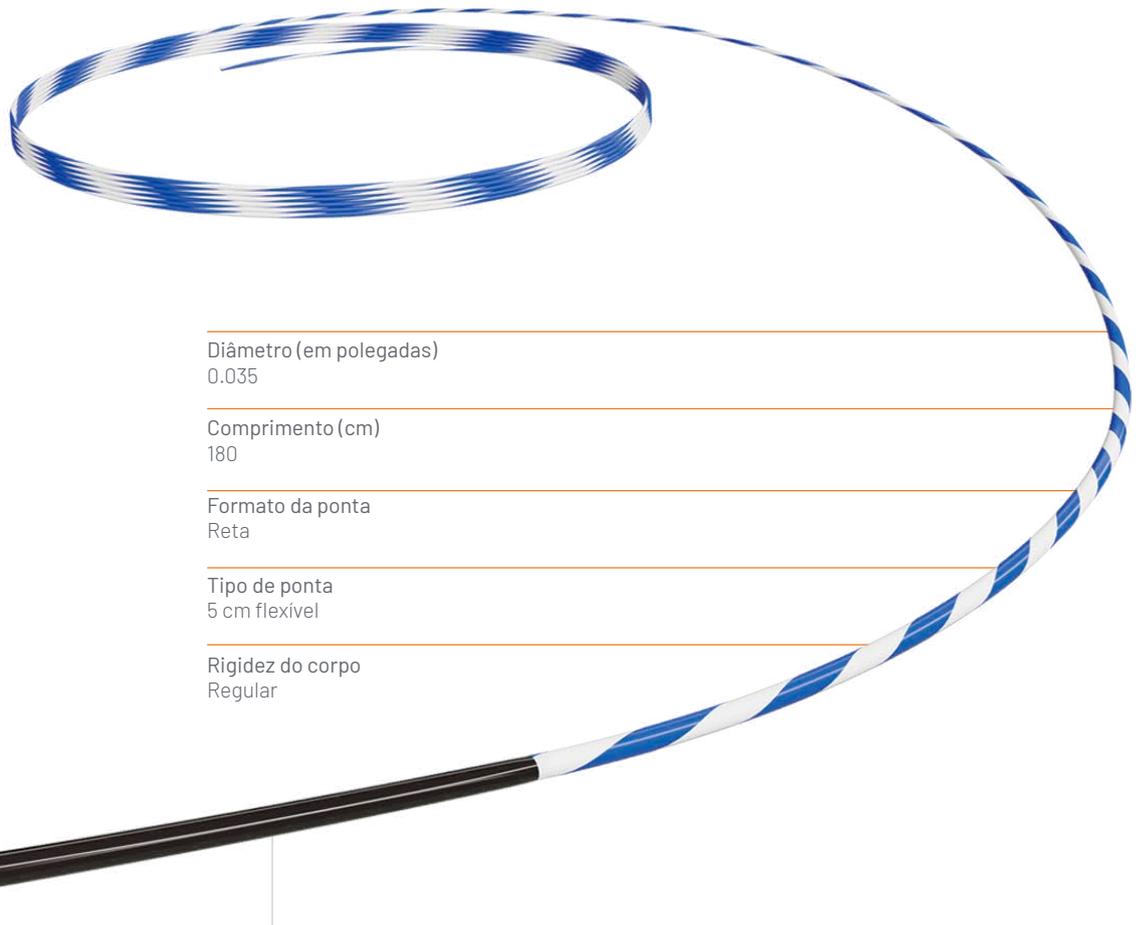

Diâmetro (em polegadas)
0.035

Comprimento (cm)
180

Formato da ponta
Reta

Tipo de ponta
5 cm flexível

Rigidez do corpo
Regular


INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS
Referências: G-35-180-S-NIT
Guia de nitinol com revestimento
de PTFE dupla cor.

- Núcleo central de nitinol permite o controle das manobras e oferece resistência à torção.
- Revestimento de PTFE de cor azul e branca, que facilita a visualização fluoroscópica e da anatomia, proporcionando maior controle e posicionamento preciso.
- Ponta flexível de pebax hidrofílico revestido com PVP, 5 cm, que facilita o acesso e a passagem através do ureteroscópio, com avanço ultra-suave.
- Radiopaco, permite visualização por fluoroscopia e posicionamento correto.

INDRIVE

A bainha de acesso ureteral INDRIVE é um produto desenvolvido com o objetivo de facilitar o acesso ao trato urinário superior.

- Cria um canal de trabalho contínuo que protege os instrumentos delicados e endoscópios flexíveis.
- Permite melhorar o fluxo de irrigação com o canal de trabalho contínuo sem tortuosidade ou bloqueios, ajudando assim a reduzir a pressão intra-renal.
- Permite a passagem simples de instrumentos durante a ureteroscopia flexível para remoção de cálculos renais.
- Reduz as chances de trauma no ureter durante a troca repetida de instrumentos.

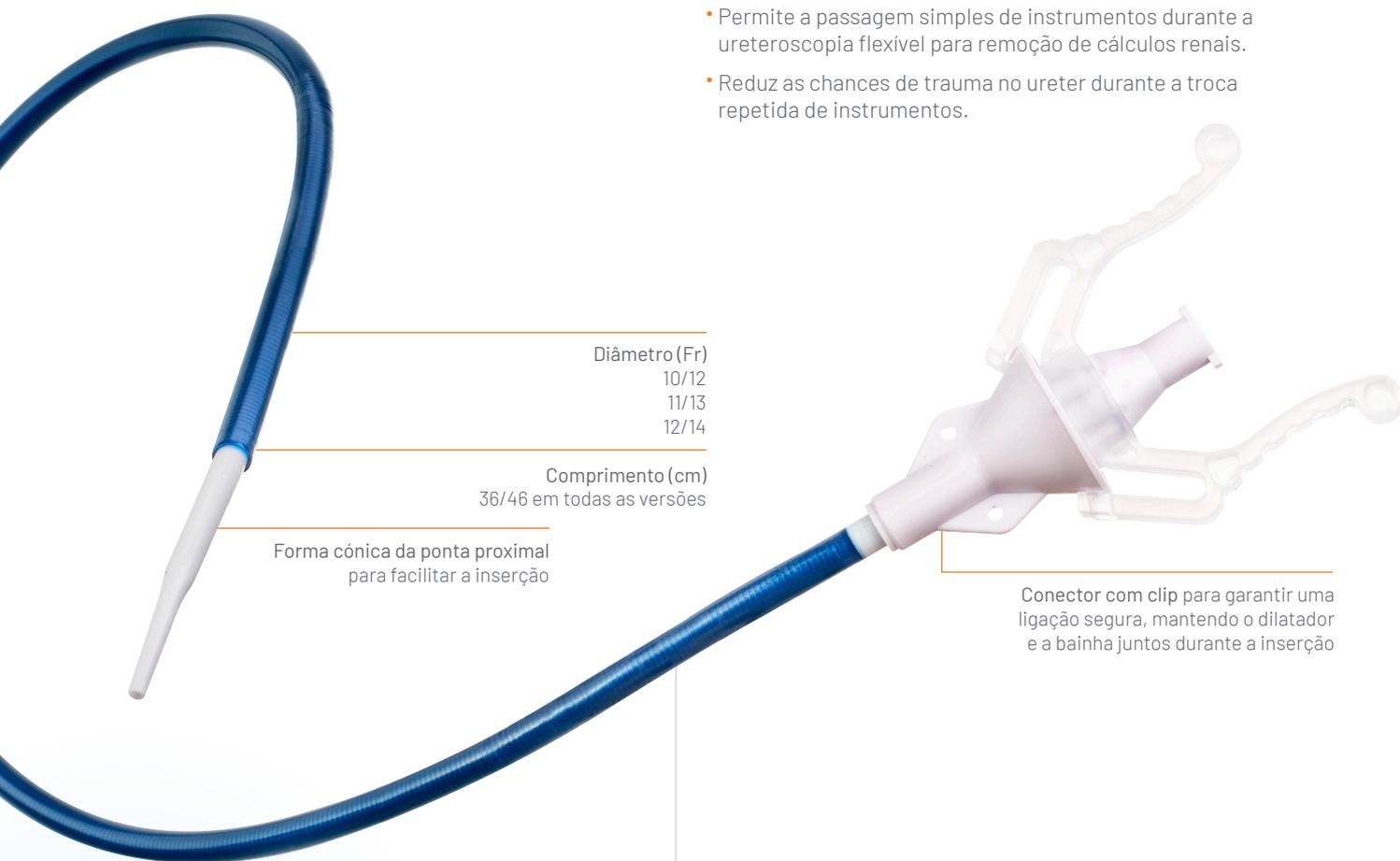

Diâmetro (Fr)

10/12

11/13

12/14

Comprimento (cm)

36/46 em todas as versões

Forma cônica da ponta proximal para facilitar a inserção

Conector com clip para garantir uma ligação segura, mantendo o dilator e a bainha juntos durante a inserção


- Dilatador de polietileno de baixa densidade, com ponta cônica para dilatação progressiva do trato urinário.
- A camada exterior azul da bainha é feita de Pebax e o interior tem uma camada de PTFE.
- O revestimento é reforçado com uma bobina de aço inoxidável revestida com uma camada de PVP hidrofílica.
- Possui um anel de platina radiopaco na ponta da bainha para um posicionamento exato.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referências

10/12-36-S-C-CO	Diâmetro: 10/12 Fr	Longitude: 36 cm
10/12-46-S-C-CO	Diâmetro: 10/12 Fr	Longitude: 46 cm
11/13-36-S-C-CO	Diâmetro: 11/13 Fr	Longitude: 36 cm
11/13-46-S-C-CO	Diâmetro: 11/13 Fr	Longitude: 46 cm
12/14-36-S-C-CO	Diâmetro: 12/14 Fr	Longitude: 36 cm
12/14-46-S-C-CO	Diâmetro: 12/14 Fr	Longitude: 46 cm

Bainha de Acesso Ureteral

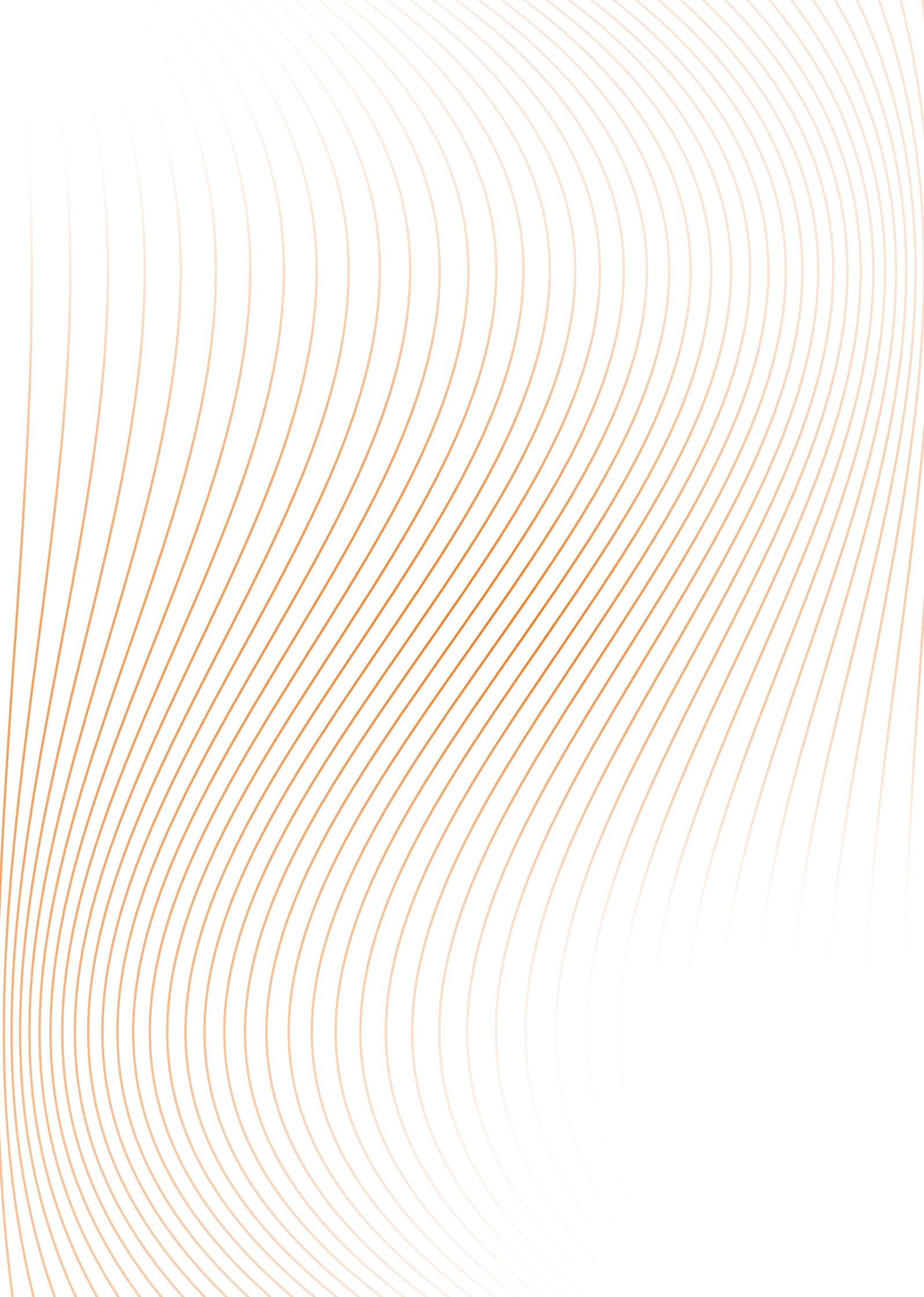




Extração



STRATONE FRONTAL

O Stratone Frontal oferece o mais alto desempenho para capturar, reposicionar e extrair fragmentos de cálculos renais através do trato urinário.

- Aproxima-se frontalmente como uma pinça, captura e retém como uma cesta.
- Em seu estado de deflexão máxima, é possível atingir os cálculos mais desafiadores dentro do trato urinário.
- Design de cesta frontal de três fios de nitinol.
- Manopla linear ergonômica e amovível, que permite controle preciso da abertura e do fechamento do cesto durante o procedimento.
- Diâmetro da bainha de 1,5 Fr, que permite um maior fluxo de irrigação.

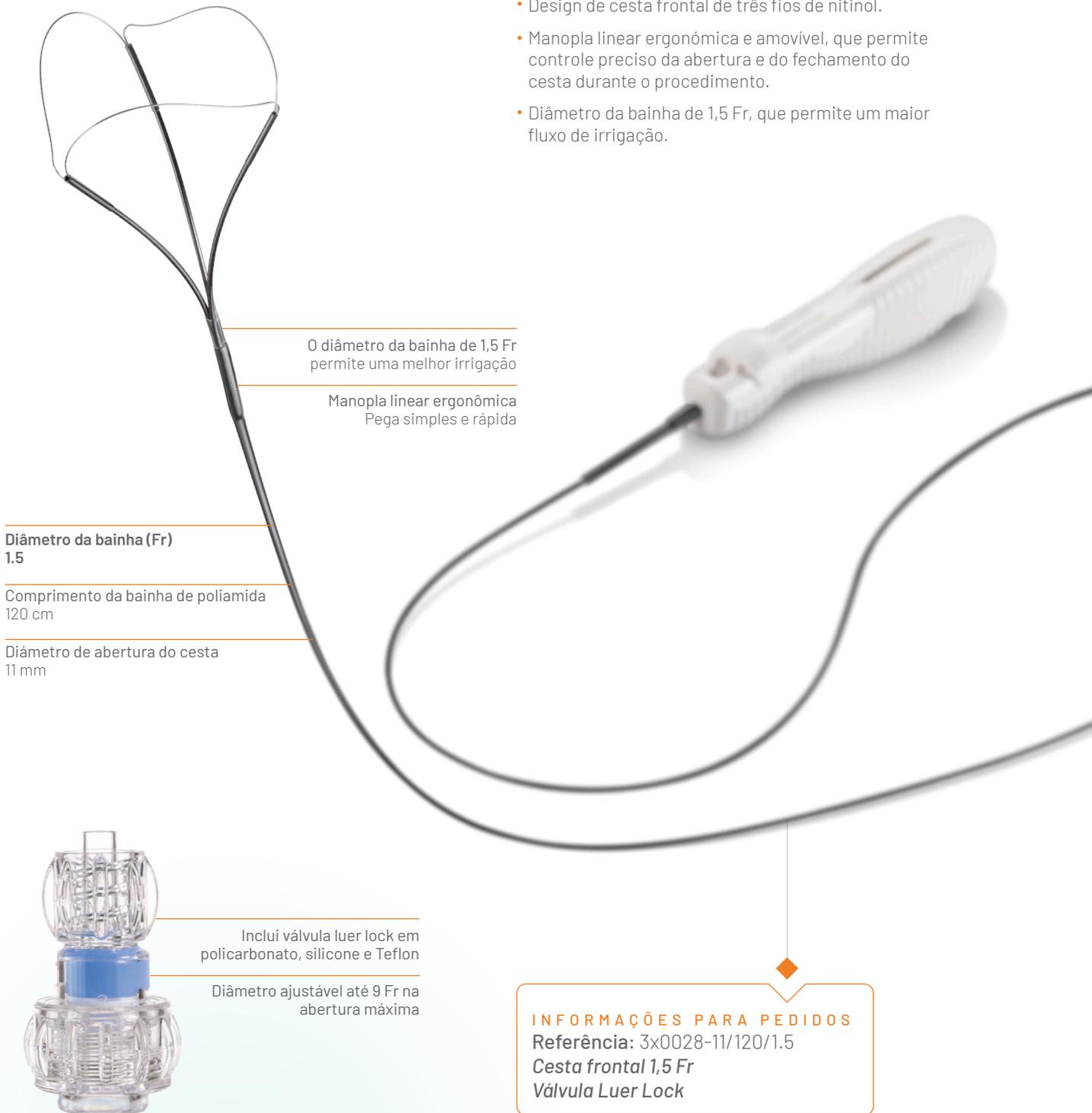

O diâmetro da bainha de 1,5 Fr
permite uma melhor irrigação

Manopla linear ergonômica
Pega simples e rápida

Diâmetro da bainha (Fr)
1.5

Comprimento da bainha de poliamida
120 cm

Diâmetro de abertura do cesto
11 mm

Inclui válvula luer lock em
policarbonato, silicone e Teflon

Diâmetro ajustável até 9 Fr na
abertura máxima


INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS
Referência: 3x0028-11/120/1.5
Cesta frontal 1,5 Fr
Válvula Luer Lock

STRATONE TIPLESS



Cesta coletor com 4 fios paralelos, com extremidade romba, de nitinol, para a remoção de cálculos do trato urinário superior ou do cálice, com acesso menos traumático para os tecidos.

- O cesta tem uma forma esférica para se adaptar facilmente à forma dos cálices.

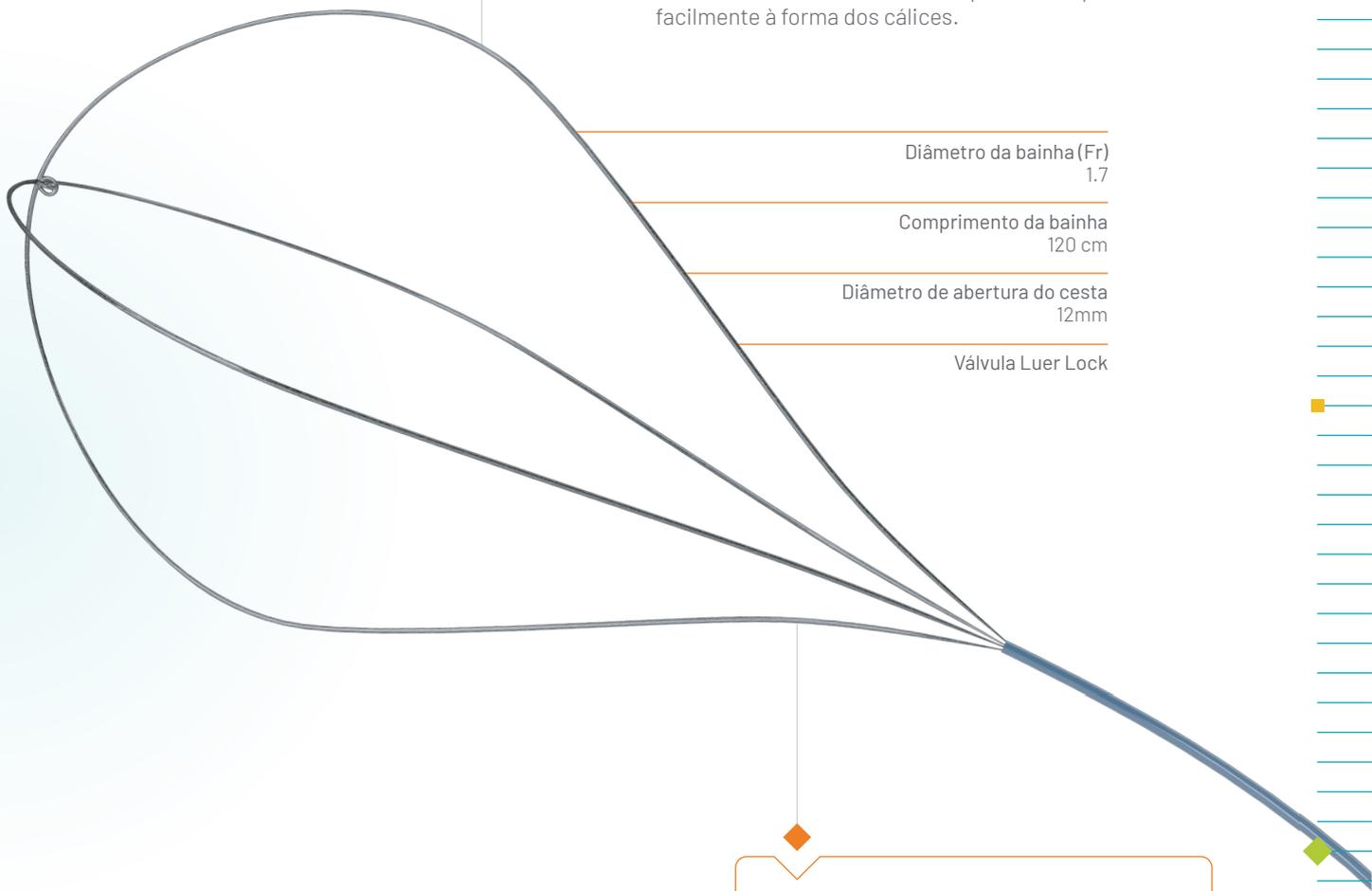

Diâmetro da bainha (Fr)
1.7

Comprimento da bainha
120 cm

Diâmetro de abertura do cesta
12mm

Válvula Luer Lock

- Nova manopla linear facilmente removível, o que facilita manipulação do dispositivo dentro do canal de trabalho do ureteroscópio.
- Manopla com mecanismo deslizante permitindo um controle preciso da abertura da cesta.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referência: STR-TIP-1.7x120
Bainha e cesta coletora de cálculos
Manopla desmontável




STRATONE

Dispositivo para remoção de cálculos renais constituído por uma manopla, uma bainha e uma cesta que remove os cálculos.

O cesta basculante é composto por 4 fios helicoidais.

- Cesta de 12 mm de diâmetro na posição completamente aberto.
- A geometria helicoidal dos fios da cesta permite um saca-rolhas para trás e para frente, o que facilita a captura da pedra.
- A manopla está equipada com um mecanismo de deslizamento que permite um controle preciso da abertura do cesta.

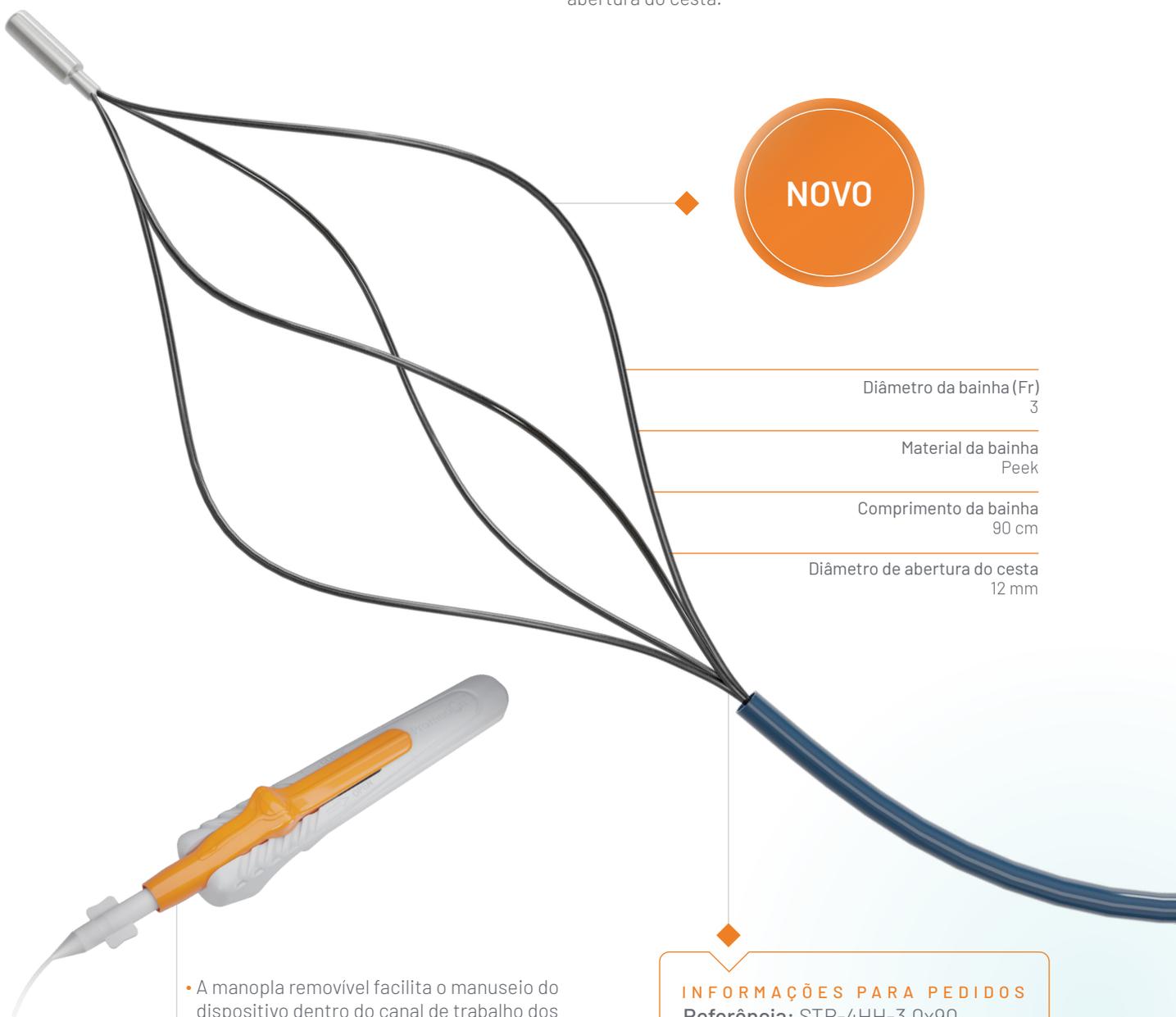

NOVO

Diâmetro da bainha (Fr)
3

Material da bainha
Peek

Comprimento da bainha
90 cm


Diâmetro de abertura do cesta
12 mm

- A manopla removível facilita o manuseio do dispositivo dentro do canal de trabalho dos ureteroscópios.
- Material da manopla: ABS e policarbonato.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS
Referência: STR-4HH-3.0x90
Bainha e cesta coletora de cálculos
Manopla desmontável



Drenagem

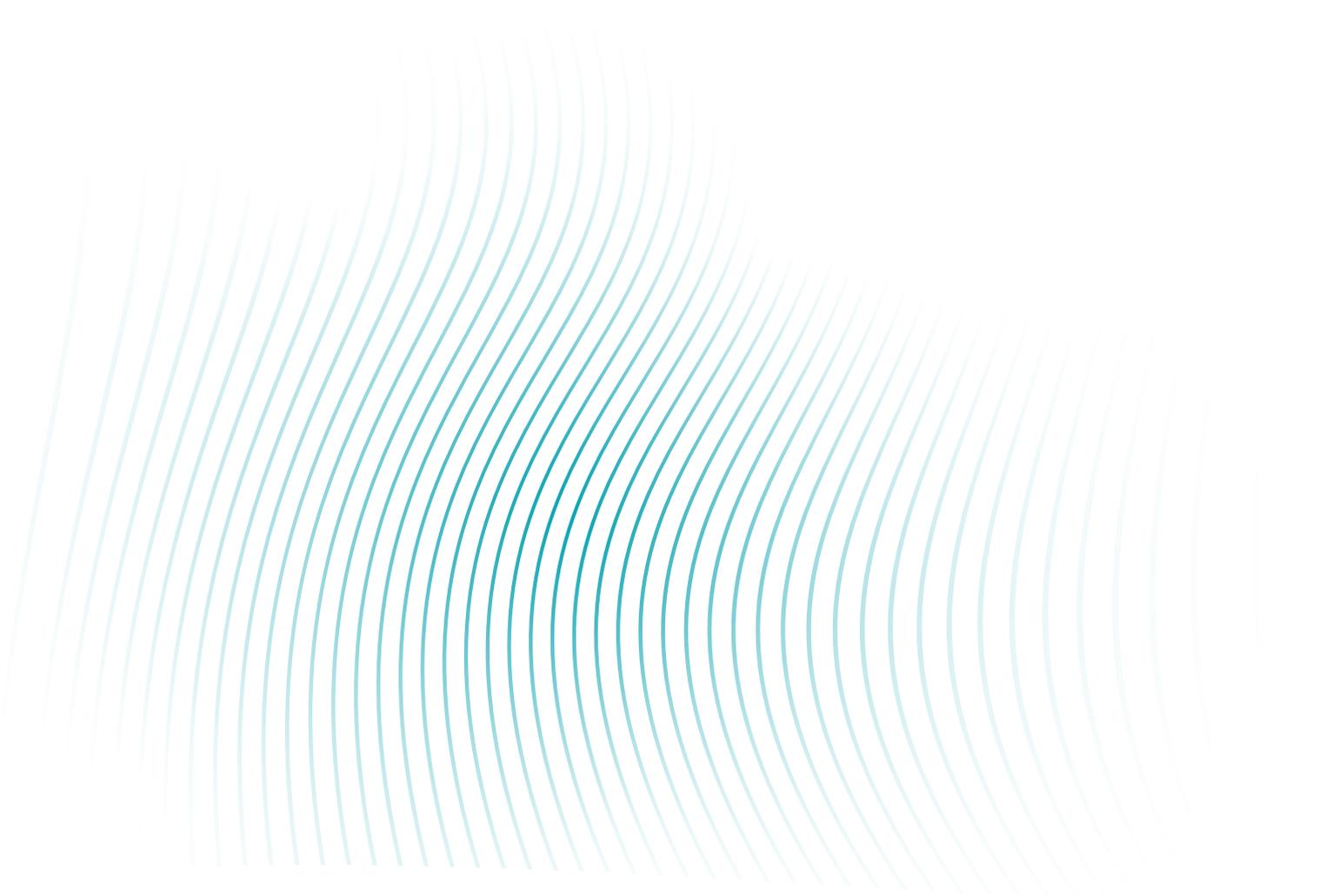

URODRAIN FLEX

- Projetado para drenagem temporária da junção ureterovesical em ureteroscopias flexíveis e semirrígidas.
- Duplo pig tail em todos os seus modelos.
- Poliuretano termoplástico radiopaco, com uma dureza de 93 Shore A.
- As perfurações ao longo de todo o comprimento facilitam a drenagem.



Gravação do stent com marca e diâmetro-comprimento

Promedon 4,7Fr - 26cm

- Apresenta-se opcionalmente como stent ureteral com pusher ou como kit com stent, pusher e guia de acesso.
- Stent e kit Urodrain Flex com fio-guia de PTFE ou nitinol.

Inclui fio de sutura na ponta da bexiga

Marcas de graduação

Circuito fechado para melhor retenção

Ponta cônica para posicionamento atraumático

CONJUNTO DE STENT URETERAL COM FIO-GUIA

	DIÂMETRO EM FR.	Cateter para adultos (4,7 - 6 - 7)	Cateter pediátrico (4,0)
GUIA	DIÂMETRO EM POLEGADAS	0,035	0,025
	COMPRIMENTO	150 cm	150 cm
	MATERIAL	Nitinol / PTFE	PTFE


CONJUNTOS URETERAIS URODRAIN E STENTS

CÓDIGO DO PRODUTO

MEDIDA EM FR.	COMPRIMENTO	STENT URETERAL (SEM GUIA DE ACESSO)	KIT COM GUIA DE PTFE	KIT COM GUIA DE NITINOL
		Nº ANVISA: 10306849013	Nº ANVISA: 10306849014	Nº ANVISA: 10306849012
4 Fr. (Pediátrico)	12 cm	DJ4012-0-S1	ST40120T-S1	
	18 cm	DJ4018-0-S1	ST40180T-S1	
4,7 Fr.	22 cm	DJ4722-0-S1	ST47220T-S1	ST47220N-S1
	24 cm	DJ4724-0-S1	ST47240T-S1	ST47240N-S1
	26 cm	DJ4726-0-S1	ST47260T-S1	ST47260N-S1
	28 cm	DJ4728-0-S1	ST47280T-S1	ST47280N-S1
6 Fr.	24 cm	DJ6024-0-S1	ST60240T-S1	ST60240N-S1
	26 cm	DJ6026-0-S1	ST60260T-S1	ST60260N-S1
	28 cm	DJ6028-0-S1	ST60280T-S1	ST60280N-S1
7 Fr.	26 cm	DJ7026-0-S1	ST70260T-S1	ST70260N-S1
	28 cm	DJ7028-0-S1	ST70280T-S1	ST70280N-S1

URODRAINSOFT

- Stent Urodrain Soft e kit com fio guia de PTFE ou Nitinol. O material dos stents soft é mais macio que o dos stents flexíveis.
- Disponível em modelo pediátrico de 4 Fr.
- Tem uma dureza de 85 Shore A e perfurações que facilitam para facilitar a drenagem urinária.

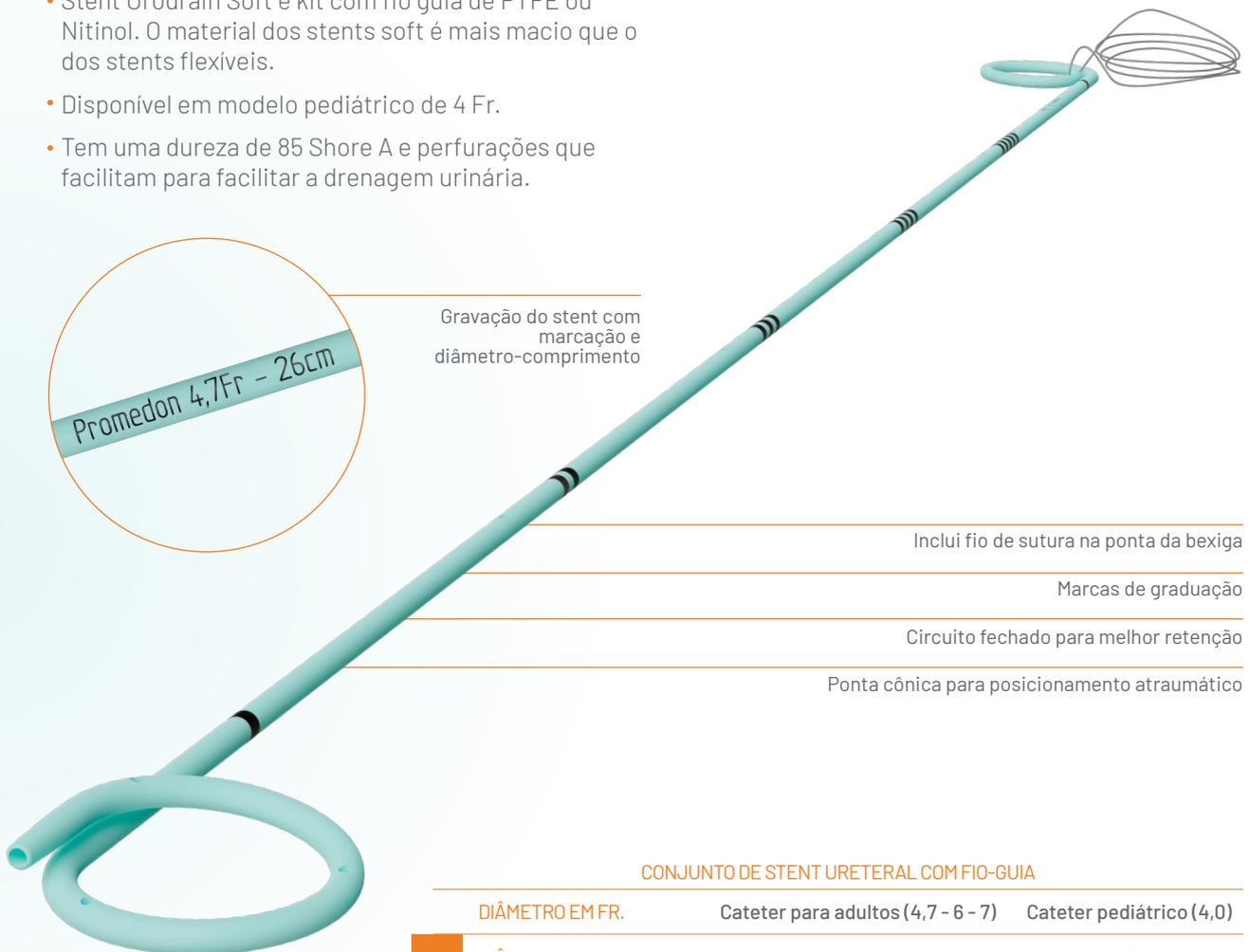

- Inclui fio de sutura na ponta da bexiga
- Marcas de graduação
- Circuito fechado para melhor retenção
- Ponta cônica para posicionamento atraumático

CONJUNTO DE STENT URETERAL COM FIO-GUIA

	DIÂMETRO EM FR.	Cateter para adultos (4,7 - 6 - 7)	Cateter pediátrico (4,0)
GUIA	DIÂMETRO EM POLEGADAS	0,035	0,025
	COMPRIMENTO	150 cm	150 cm
	MATERIAL	Nitinol / PTFE	PTFE


CONJUNTOS URETERAIS URODRAIN E STENTS

MEDIDA EM FR.	COMPRIMENTO	CÓDIGO DO PRODUTO		
		STENT URETERAL (SEM GUIA DE ACESSO) Nº ANVISA: 10306849013	KIT COM GUIA DE PTFE Nº ANVISA: 10306849014	KIT COM GUIA DE NITINOL Nº ANVISA: 10306849012
4 Fr. (Pediátrico)	12 cm	DJ4012-0-S2	ST40120T-S2	
	18 cm	DJ4018-0-S2	ST40180T-S2	
4,7 Fr.	22 cm	DJ4722-0-S2	ST47220T-S2	ST47220N-S2
	24 cm	DJ4724-0-S2	ST47240T-S2	ST47240N-S2
	26 cm	DJ4726-0-S2	ST47260T-S2	ST47260N-S2
	28 cm	DJ4728-0-S2	ST47280T-S2	ST47280N-S2
6 Fr.	24 cm	DJ6024-0-S2	ST60240T-S2	ST60240N-S2
	26 cm	DJ6026-0-S2	ST60260T-S2	ST60260N-S2
	28 cm	DJ6028-0-S2	ST60280T-S2	ST60280N-S2
7 Fr.	26 cm	DJ7026-0-S2	ST70260T-S2	ST70260N-S2
	28 cm	DJ7028-0-S2	ST70280T-S2	ST70280N-S2

KIT DE NEFROSTOMIA

O Kit de Nefrostomia Promedon é composto por produtos específicos para acessar os cálices do rim, confeccionados com materiais biocompatíveis de alta qualidade.

O kit de nefrostomia inclui agulhas com dois tipos de pontas: chiba e trocarte, cateter de drenagem monojota, três dilatadores fasciais, guia de PTFE, estilete e conector para bolsa de urina.

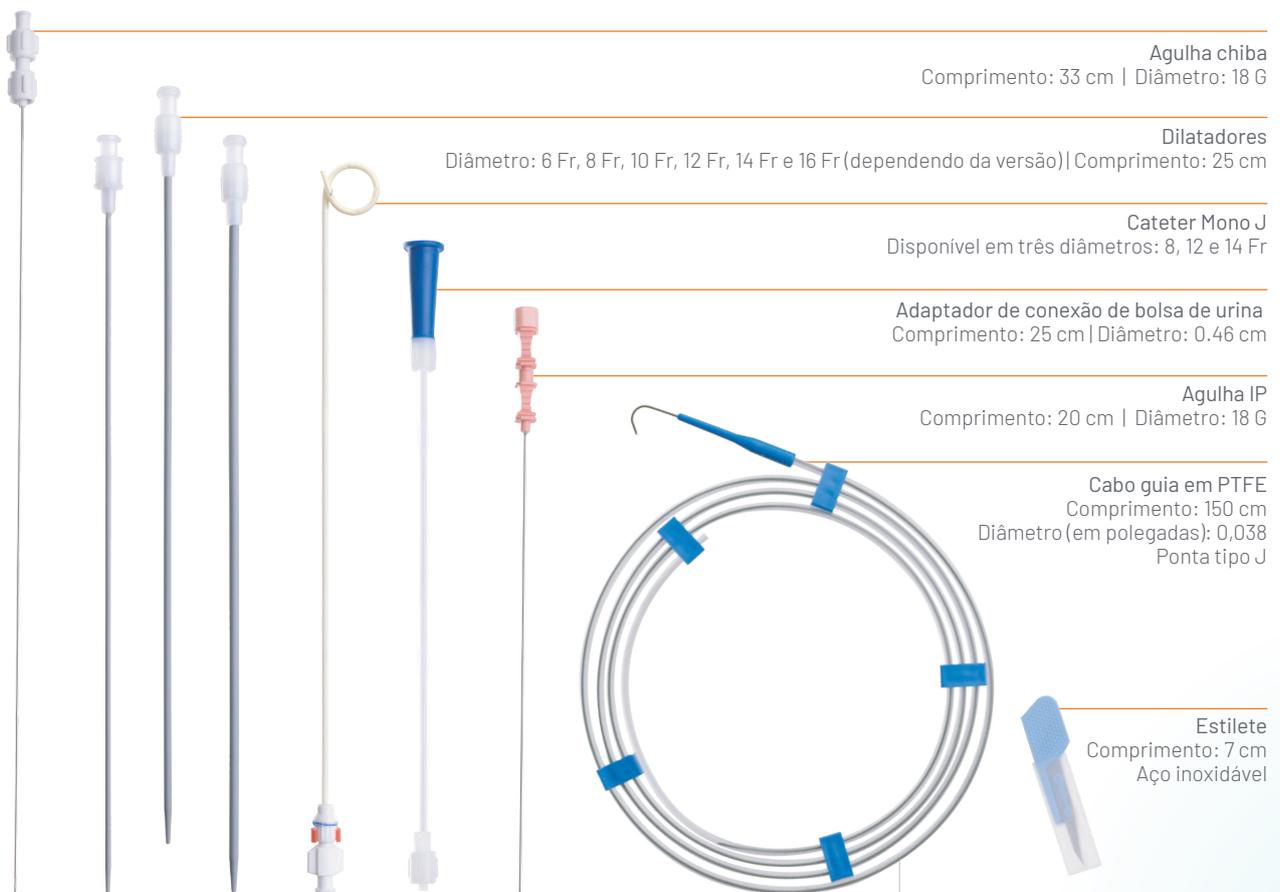

INFORMAÇÕES DE PEDIDOS

Referência: SNEF-08

1 Cateter Mono J de 8Fr. | 3 Dilatadores de 6Fr, 8Fr e 10Fr. | 1 Agulha chiba
1 Agulha IP | 1 Fio Guia | 1 Adaptador de conexão | Estilete

Referência: SNEF-12

1 Cateter Mono J de 12Fr. | 3 Dilatadores de 10Fr, 12Fr e 14Fr. | 1 Agulha chiba
1 Agulha IP | 1 Fio Guia | 1 Adaptador de conexão | Estilete

Referência: SNEF-14

1 Cateter Mono J de 14Fr. | 3 Dilatadores de 12Fr, 14Fr e 16Fr. | 1 Agulha chiba
1 Agulha IP | 1 Fio Guia | 1 Adaptador de conexão | Estilete


CATETER URETERAL

O Cateter Ureteral é um produto de várias utilizações em procedimentos endourológicos.

- O Cateter Ureteral é utilizado para injetar contraste e irrigação em procedimentos endourológicos.
- Tem visibilidade radiopaca.
- Fabricado em material polimérico flexível para facilitar o acesso ao rim.
- Tem um conector Luer-lock na extremidade distal para facilitar a ligação de seringas ou outros artigos.



Nº ANVISA: 10306840146

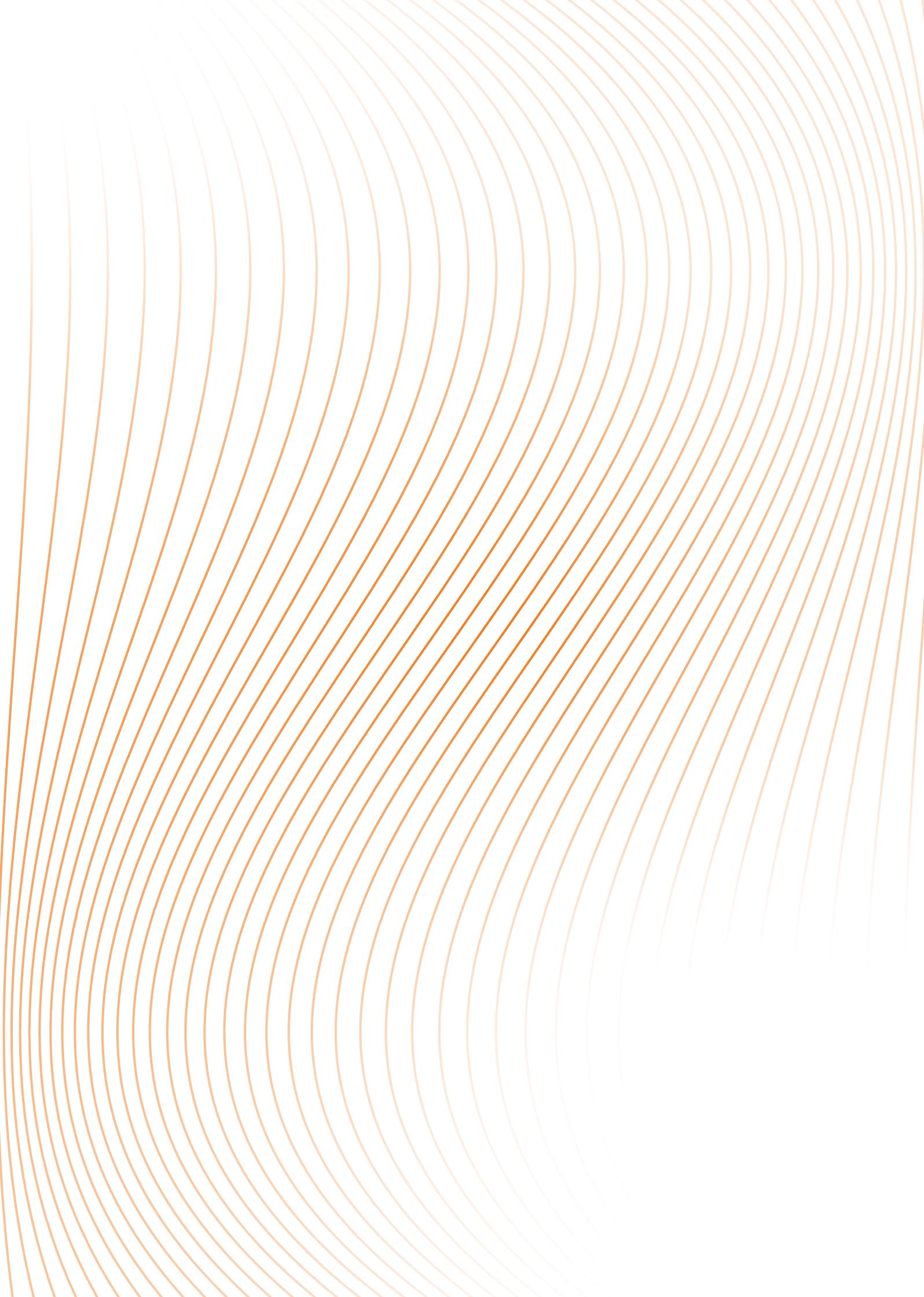



Dilatação

PERKUT

- O material do cateter-guia e das bainhas de dilatação é PTFE e o dos dilatadores, policloreto de vinila (PVC).
- O conjunto consiste em um cateter guia de 8 Fr, uma bainha introdutora de 10 Fr, 4 bainhas (24-26-28-30 Fr) e 13 dilatadores de 8 a 30 Fr.
- Os dilatadores apresentam marcas de graduação e uma ponta cônica suave para acesso atraumático através do tecido.
- Melhor manobrabilidade para o cirurgião.
- Material firme, estável e resistente a dobras.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referência: ST-PCNL-LB

13 Dilatadores | 4 Bainhas | Cateter



Comprimento do cateter
80 cm

Comprimento das bainhas
17 cm

Nº ANVISA: 10306840179

XPUR

O cateter balão é usado para dilatar o ureter em casos de estenose ureteral.



- XPur é um cateter de balão de nylon na extremidade proximal.
- É composto por 3 partes, corpo, cateter e conectores em policarbonato.
- O tamanho do cateter é 6 Fr.
- Possui duas marcas radiopacas de platina e irídio, e uma torneira/válvula de fecho.
- O cateter é de uso único. A apresentação é de uma unidade por caixa.
- Pressão máxima de rutura 14 atm.
- O cateter é feito de Pebax e foi concebido para ser resistente à pressão, mantendo a flexibilidade do cateter.
- A válvula de entrada tem duas vias, para injetar o fluido e entrar com uma guia.

Comprimento total em cm
90

Comprimento útil em cm
81,5

Diâmetro do balão inflado em Fr
15


Diâmetro do balão inflado em mm
5

Comprimento do balão em mm
40

Tamanho do cateter em Fr
6

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referência: 50x40-60x90-AS
Cateter balão de dilatação ureteral

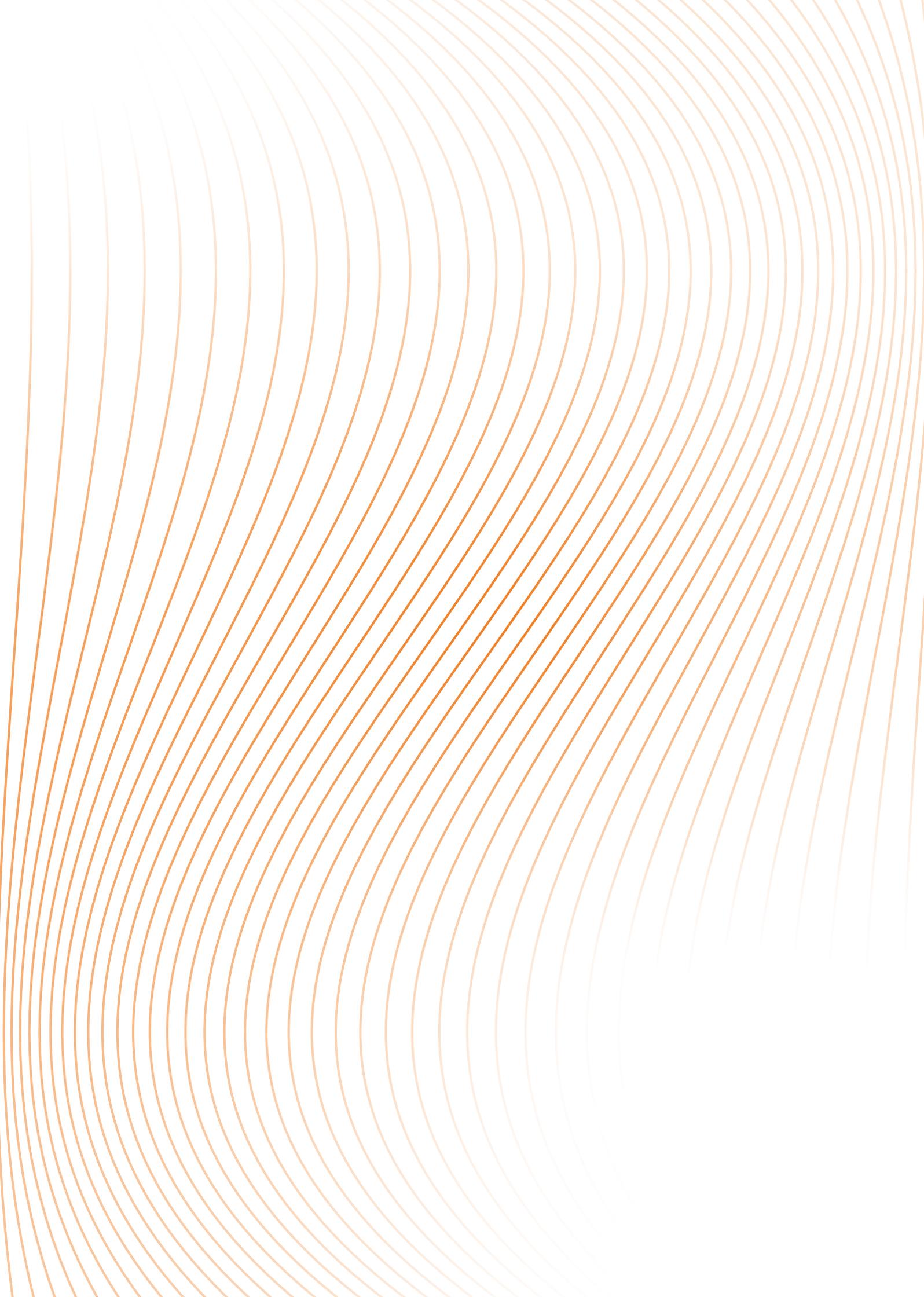


OUTRAS SOLUÇÕES EM:

SAÚDE FEMININA

◆ Incontinência urinária de esforço



◆ Prolapso de órgãos pélvicos

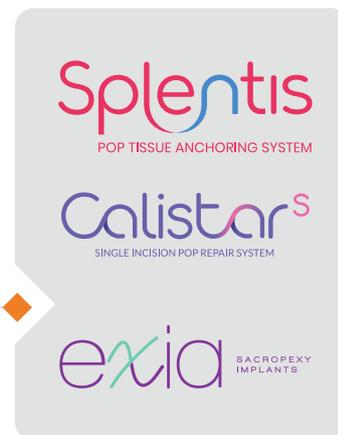

A SAÚDE MASCULINA

◆ Incontinência urinária



◆ Prótese peniana




◆ Prótese testicular



◆ SAÚDE INFANTIL



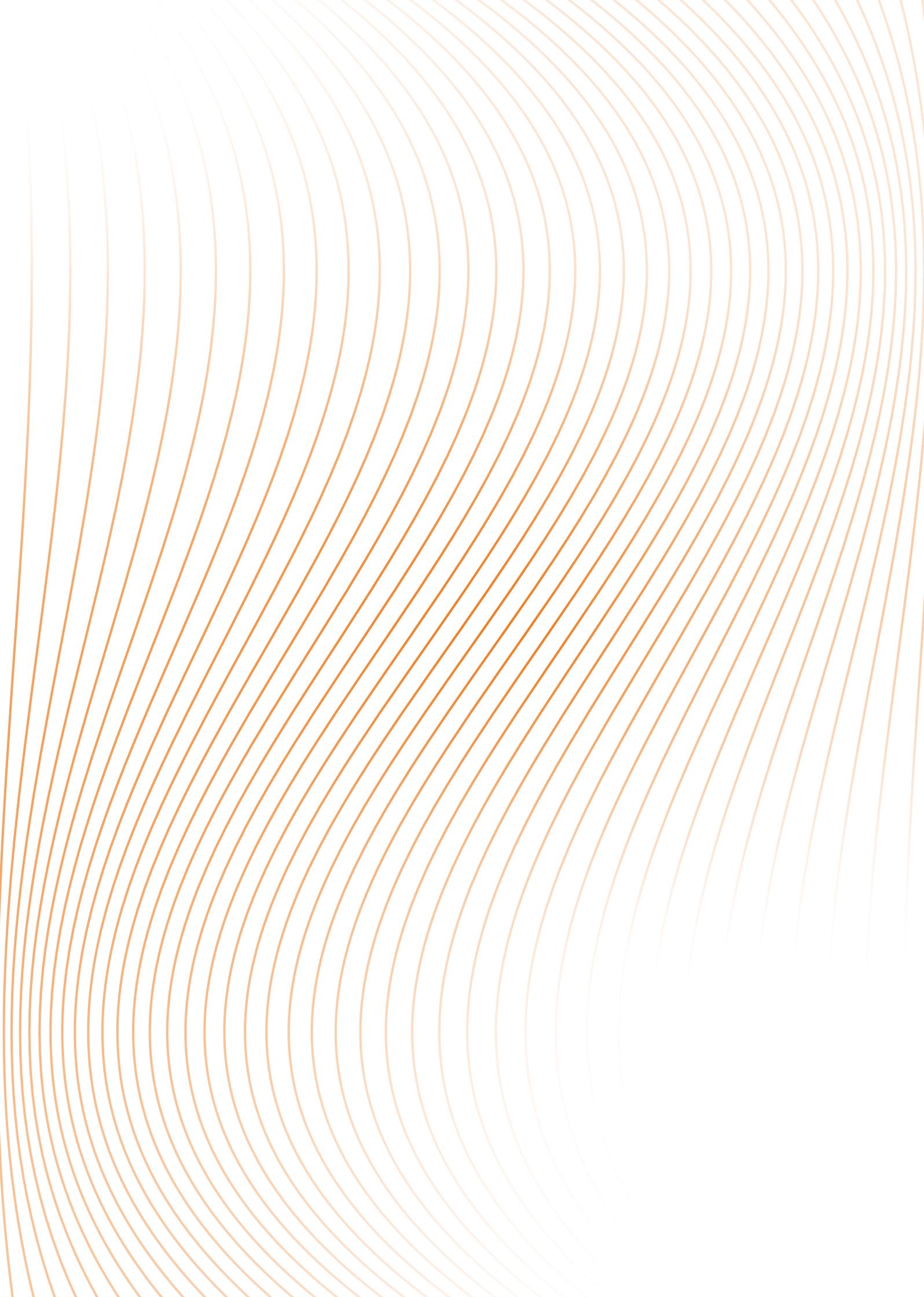



Os produtos apresentados neste catálogo podem não estar disponíveis no seu país. Nesse caso, considere o conteúdo para fins informativos.

HEAD QUARTERS

PROMEDON S.A.
CÓRDOBA, ARGENTINA

Av. Gral Manuel Savio L3 M3
Parque Industrial Ferreyra
X5123XAD - Córdoba

Consultas: marketing@promedon.com

Promedon
Urology and Pelvic Floor

www.promedon-upf.com

2024

PSD-00000376 (07) / DEC-2024