


Endourologia

Portfólio de produtos para o tratamento da litíase urinária.

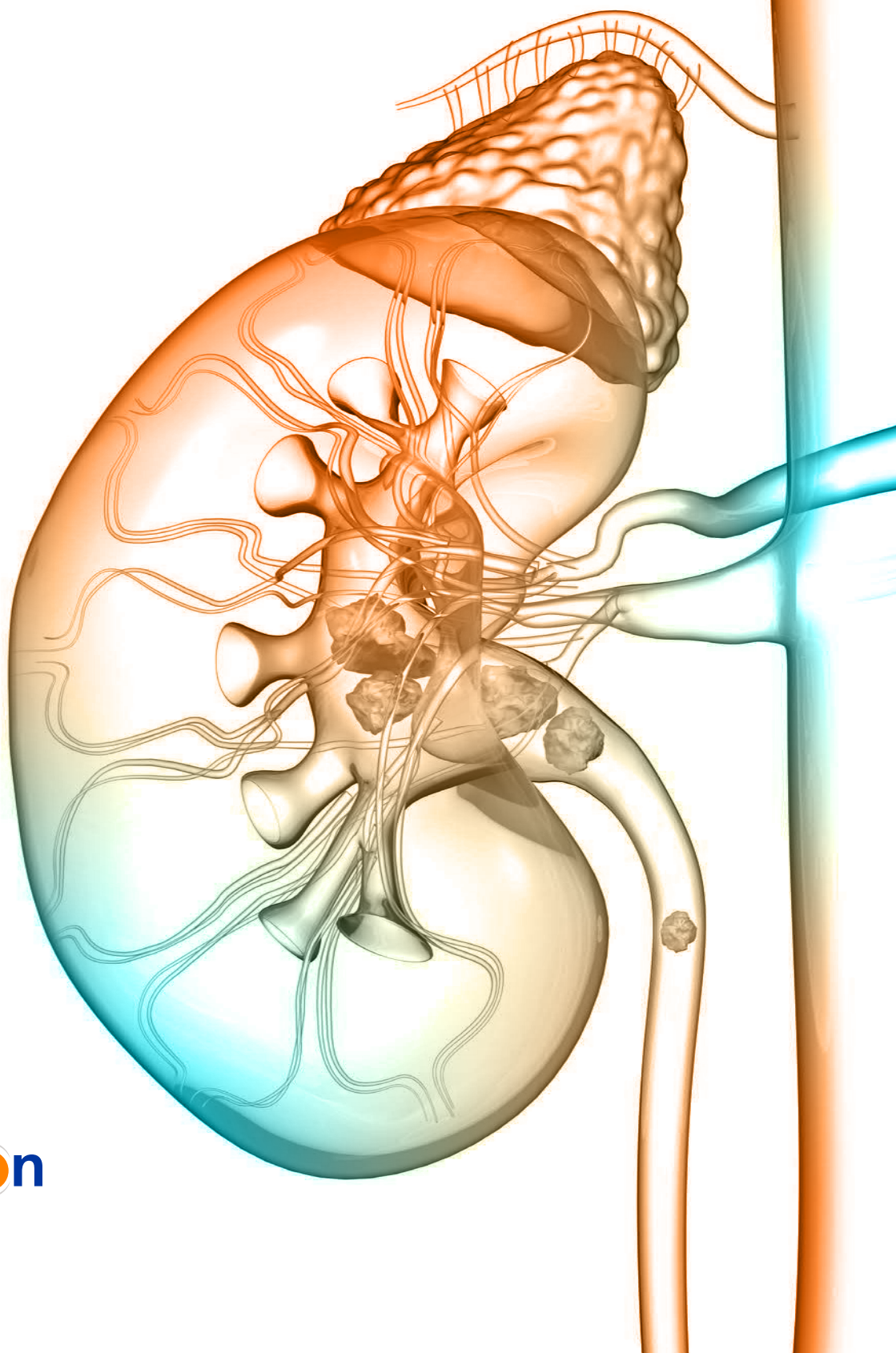

Promedon

Urology and Pelvic Floor

Promedon
Urology and Pelvic Floor

Contribuir para a restauração da qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo e proporcionando aos profissionais da saúde tecnologia médica segura e eficaz.

É por isso que nós trabalhamos todos os dias.

Índice

Acesso

Fio-Guias

Fluenz, Fio-Guia Combinado	—	06
Fio-Guia de Nitinol Hidrofilico	—	07
Fio-Guia de PTFE	—	07
Fio-Guia Zebrada Nitinol	—	08

Bainha de acesso ureteral

Indrive, Bainha de acesso ureteral	—	09
------------------------------------	---	----

Extração

Stratone Frontal	—	12
Stratone Tipless	—	13
Stratone	—	14

Drenagem


Stents Ureterais Urodrain Flex	—	16
Stents Ureterais Urodrain Soft	—	17
Kit de Nefrostomia	—	18
Cateter Ureteral	—	19
Nefrodrain	—	19

Dilatação

Kit de Dilatadores

Kit Dilatador Amplatz - Perkut	—	22
Kit Dilatador Amplatz - Perkut Mini	—	23
Balão de Dilatação Ureteral	—	24



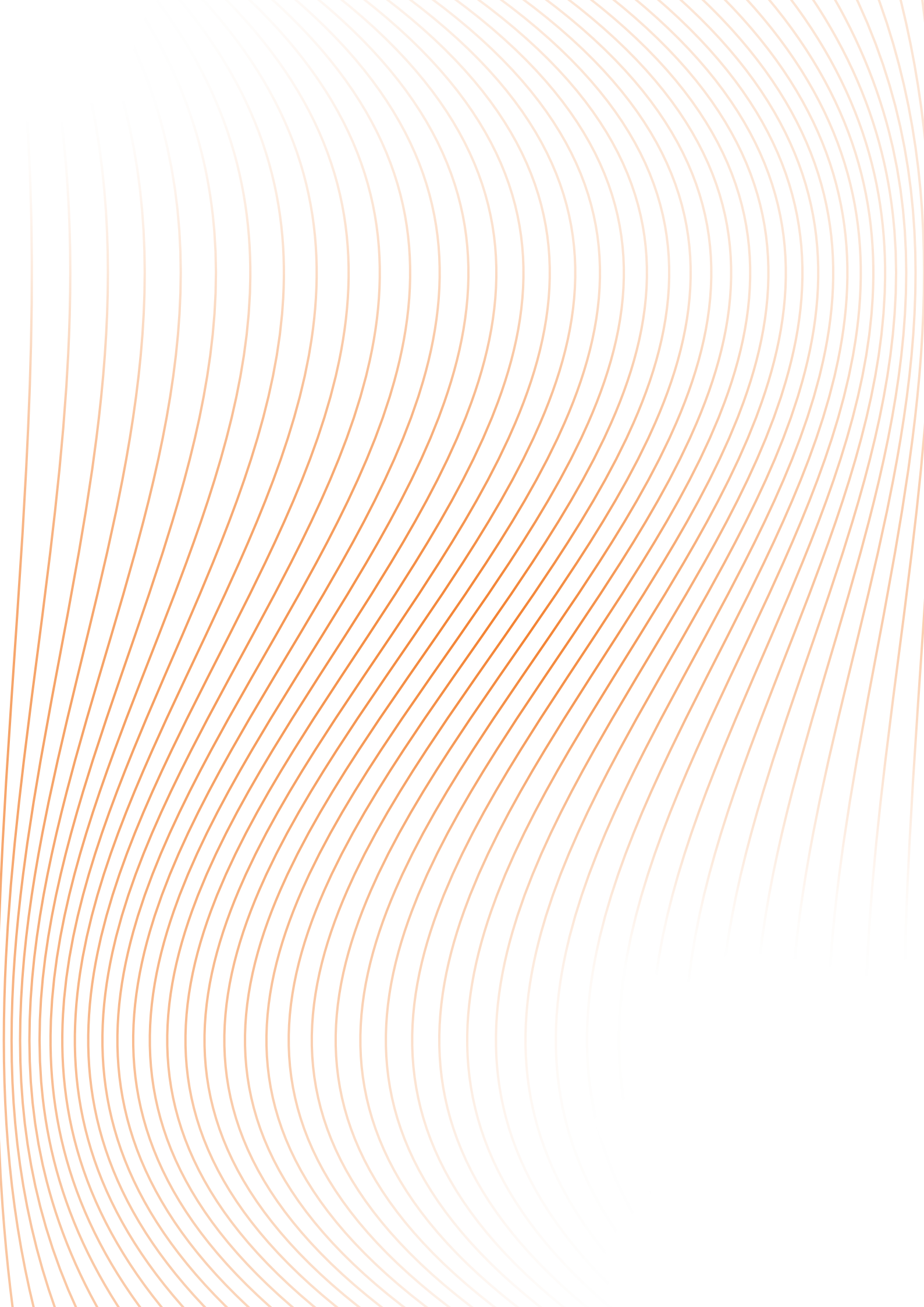



Acesso

FLUENZ

O Fio-Guia híbrido FLUENZ combina os atributos de dois fio-guias em um só, reunindo a facilidade de obter acesso ao rim com o apoio necessário para colocação do cateter.

- Ponta flexível hidrofílica, para facilitar o acesso e reduzir fricção durante o avanço sobre anatomias complexas.
- Núcleo central de nitinol garante controle e manobrabilidade.
- Corpo de aço inoxidável revestido por PTFE para assegurar o controle durante a instrumentação.
- Ponta proximal flexível, para evitar danos ao ureteroscópio.
- Apresentação dos guias: vendidos em uma caixa com 10 unidades.

Dispensador com acoplamento e deslizamento inovadores e guia deslizante

Núcleo
Nitinol

Corpo
Revestimento de aço inoxidável
revestido com PTFE

Rigidez do corpo
Regular

Diâmetro (em polegadas)
0,035


Comprimento (cm)
150

Forma da ponta
Hidrofílico flexível, 5 cm, reto

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

Referência: G-35-150S-COMBI
Fio-guia híbrido

FIO-GUIA DE NITINOL HIDROFÍLICO

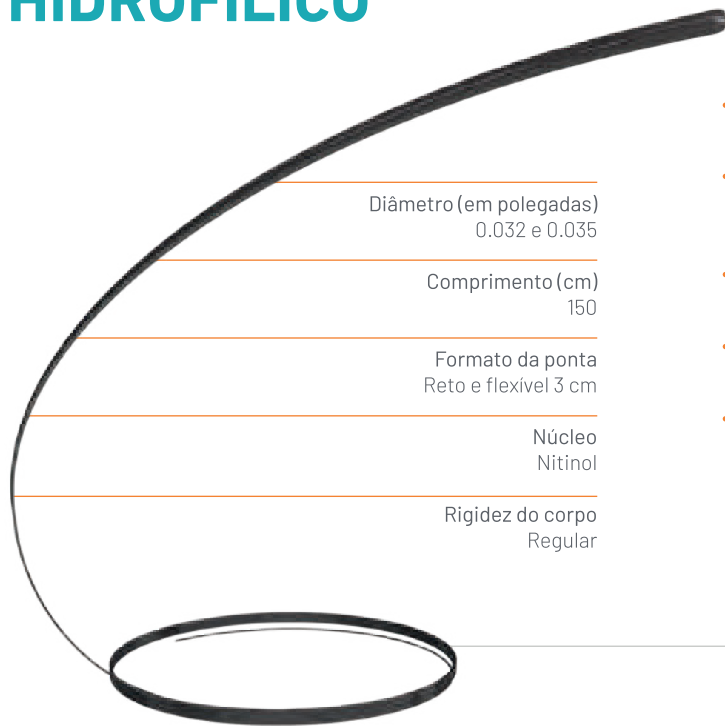

Diâmetro (em polegadas)
0.032 e 0.035

Comprimento (cm)
150

Formato da ponta
Reto e flexível 3 cm

Núcleo
Nitinol

Rigidez do corpo
Regular

- Núcleo central de nitinol permite controle de manobras e oferece resistência a dobras.
- Revestimento preto hidrofílico com lubrificação que melhora a interface cateter-guia. Permite o avanço ultrassuave e a fácil passagem pelo ureteroscópio.
- Produto radiopaco, permite visualização fluoroscópica e posicionamento preciso.
- Apresentação dos guias: vendidos em uma caixa com 10 unidades.
- O fio-guia também está disponível no stent ureteral.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Referências:

0.032": G-32-150-S-NIT

0.035": G-35-150-S-NIT

Guia de Nitinol Hidrofílico

Nº ANVISA: 10306840122

FIO-GUIA DE PTFE

- Núcleo central de aço inoxidável, dá resistência à torção.
- Revestimento de PTFE verde, que facilita a passagem pela anatomia, possui um corpo rígido, mas com uma ponta flexível.



Diâmetro (em polegadas)
0.028 e 0.035

Comprimento (cm)
150

Formato da ponta
Reta

Tipo de ponta
4 cm flexível

Rigidez do corpo
Regular

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

Referências:

G-28-150-S-PTFE (0.028")

G-35-150-S-PTFE (0.035")


Guia revestido de PTFE

- Permite a visualização por fluoroscopia e posicionamento preciso.
- O fio-guia também está disponível em kits de stent ureteral.
- É vendido em caixas de 10 unidades.

Nº ANVISA: 10306840120

FIO-GUIA ZEBRADA

Fio-guia de nitinol com revestimento de PTFE de dupla cor e ponta hidrofílica.

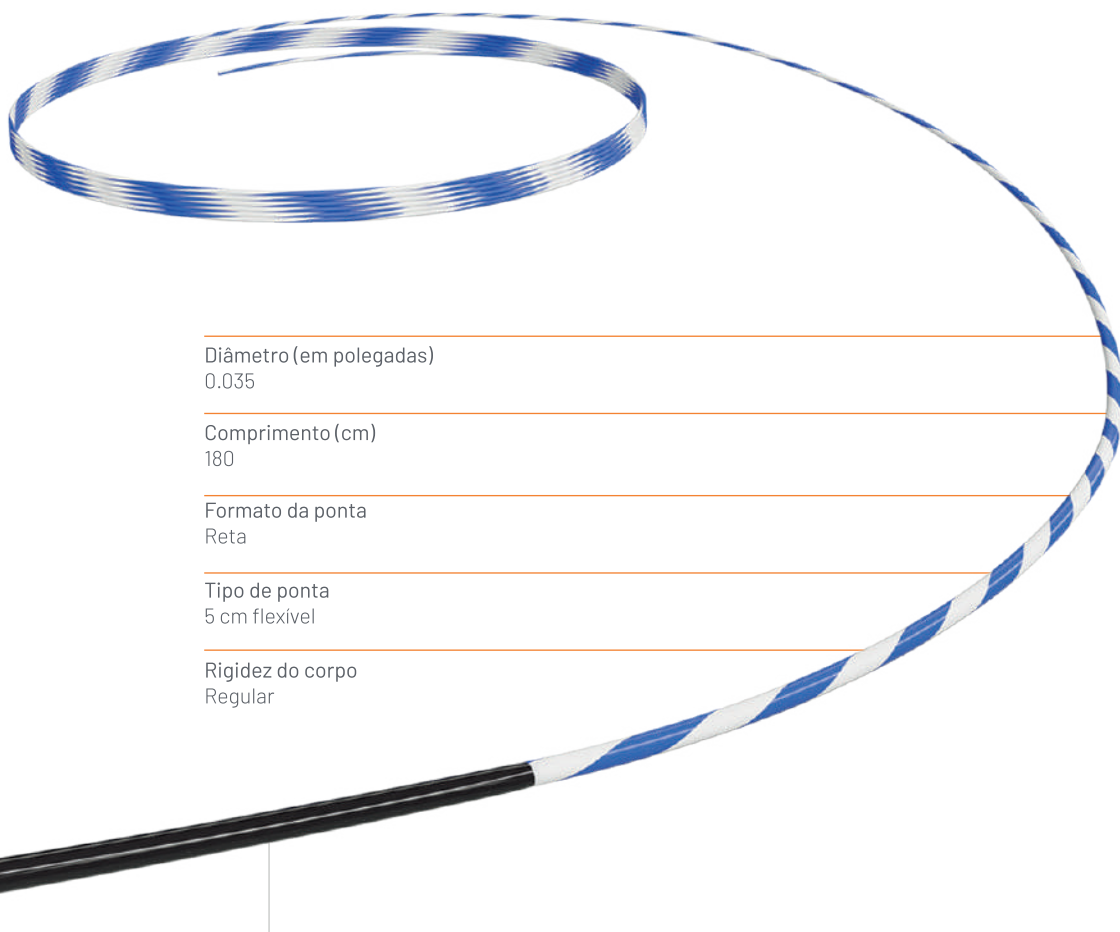

Diâmetro (em polegadas)
0.035

Comprimento (cm)
180

Formato da ponta
Reta

Tipo de ponta
5 cm flexível

Rigidez do corpo
Regular

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

Referências: G-35-180-S-NIT


Guia de nitinol com revestimento
de PTFE dupla cor.

- Núcleo central de nitinol permite o controle das manobras e oferece resistência à torção.
- Revestimento de PTFE de cor azul e branca, que facilita a visualização fluoroscópica e da anatomia, proporcionando maior controle e posicionamento preciso.
- Ponta flexível de pebax hidrofílico revestido com PVP, 5 cm, que facilita o acesso e a passagem através do ureteroscópio, com avanço ultra-suave.
- Radiopaco, permite visualização por fluoroscopia e posicionamento correto.

INDRIVE

A bainha de acesso ureteral INDRIVE é um produto desenvolvido com o objetivo de facilitar o acesso ao trato urinário superior.

- Cria um canal de trabalho contínuo que protege os instrumentos delicados e endoscópios flexíveis.
- Permite melhorar o fluxo de irrigação com o canal de trabalho contínuo sem tortuosidade ou bloqueios, ajudando assim a reduzir a pressão intra-renal.
- Permite a passagem simples de instrumentos durante a ureteroscopia flexível para remoção de cálculos renais.
- Reduz as chances de trauma no ureter durante a troca repetida de instrumentos.

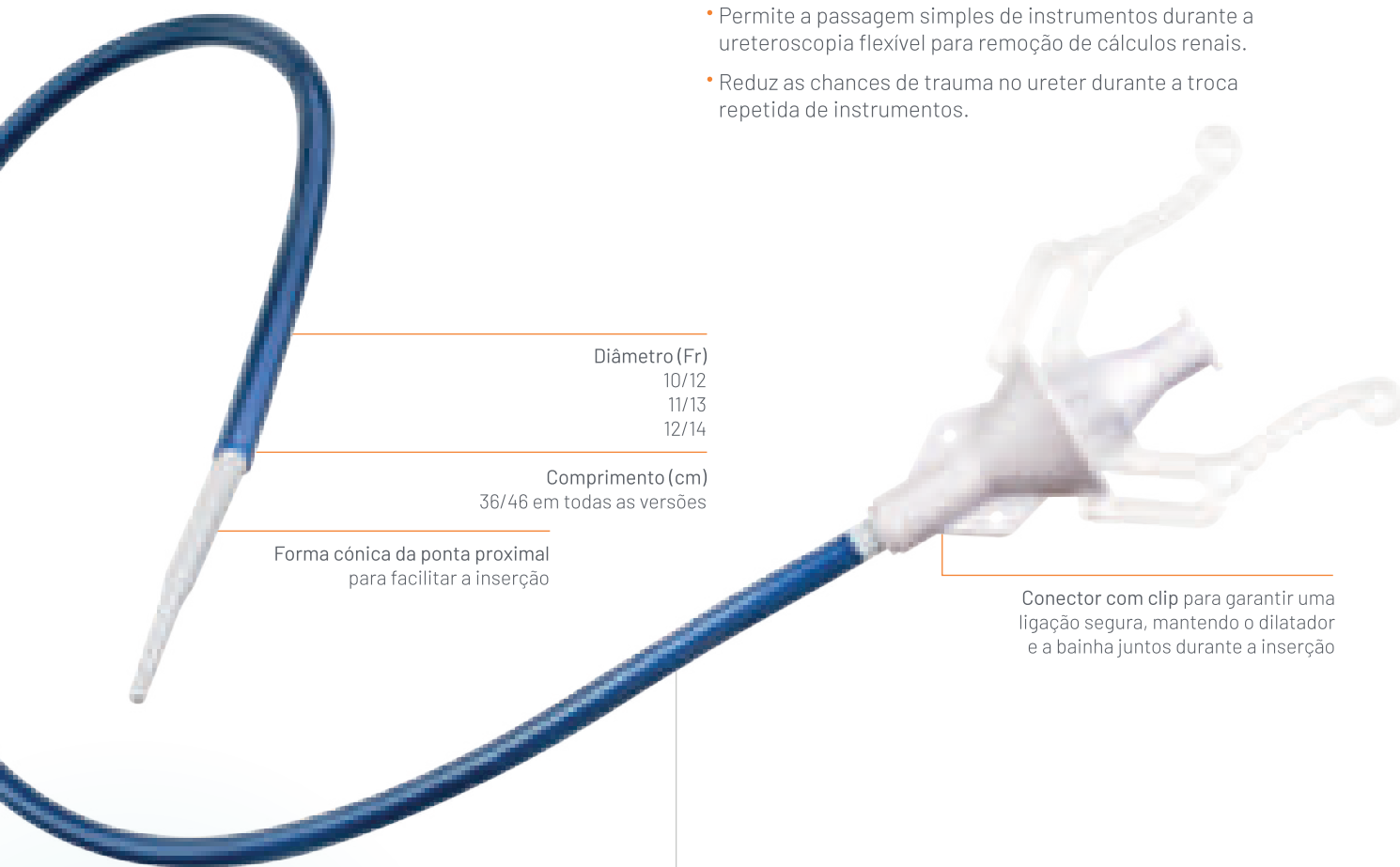

Diâmetro (Fr)

10/12

11/13

12/14

Comprimento (cm)

36/46 em todas as versões

Forma cônica da ponta proximal para facilitar a inserção

Conector com clip para garantir uma ligação segura, mantendo o dilatador e a bainha juntos durante a inserção


- Dilatador de polietileno de baixa densidade, com ponta cônica para dilatação progressiva do trato urinário.
- A camada exterior azul da bainha é feita de Pebax e o interior tem uma camada de PTFE.
- O revestimento é reforçado com uma bobina de aço inoxidável revestida com uma camada de PVP hidrofílica.
- Possui um anel de platina radiopaco na ponta da bainha para um posicionamento exato.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referências

10/12-36-S-C-CO	Diâmetro: 10/12 Fr	Longitude: 36 cm
10/12-46-S-C-CO	Diâmetro: 10/12 Fr	Longitude: 46 cm
11/13-36-S-C-CO	Diâmetro: 11/13 Fr	Longitude: 36 cm
11/13-46-S-C-CO	Diâmetro: 11/13 Fr	Longitude: 46 cm
12/14-36-S-C-CO	Diâmetro: 12/14 Fr	Longitude: 36 cm
12/14-46-S-C-CO	Diâmetro: 12/14 Fr	Longitude: 46 cm

Bainha de Acesso Ureteral

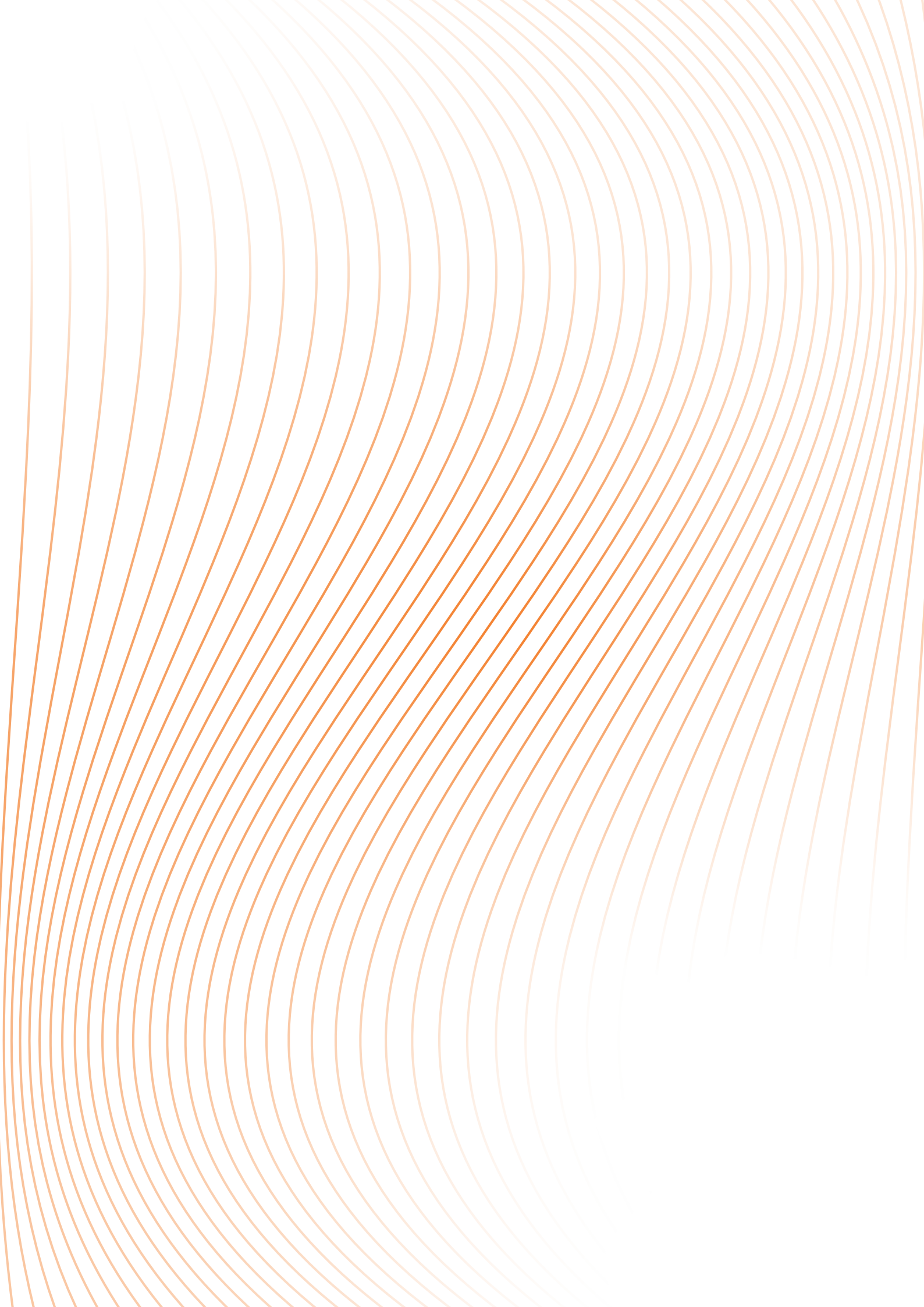




Extração



STRATONE FRONTAL

O Stratone Frontal oferece o mais alto desempenho para capturar, reposicionar e extrair fragmentos de cálculos renais através do trato urinário.

- Aproxima-se frontalmente como uma pinça, captura e retém como uma cesta.
- Em seu estado de deflexão máxima, é possível atingir os cálculos mais desafiadores dentro do trato urinário.
- Design de cesta frontal de três fios de nitinol.
- Manopla linear ergonômica e amovível, que permite controle preciso da abertura e do fechamento do cesta durante o procedimento.
- Diâmetro da bainha de 1,5 Fr, que permite um maior fluxo de irrigação.

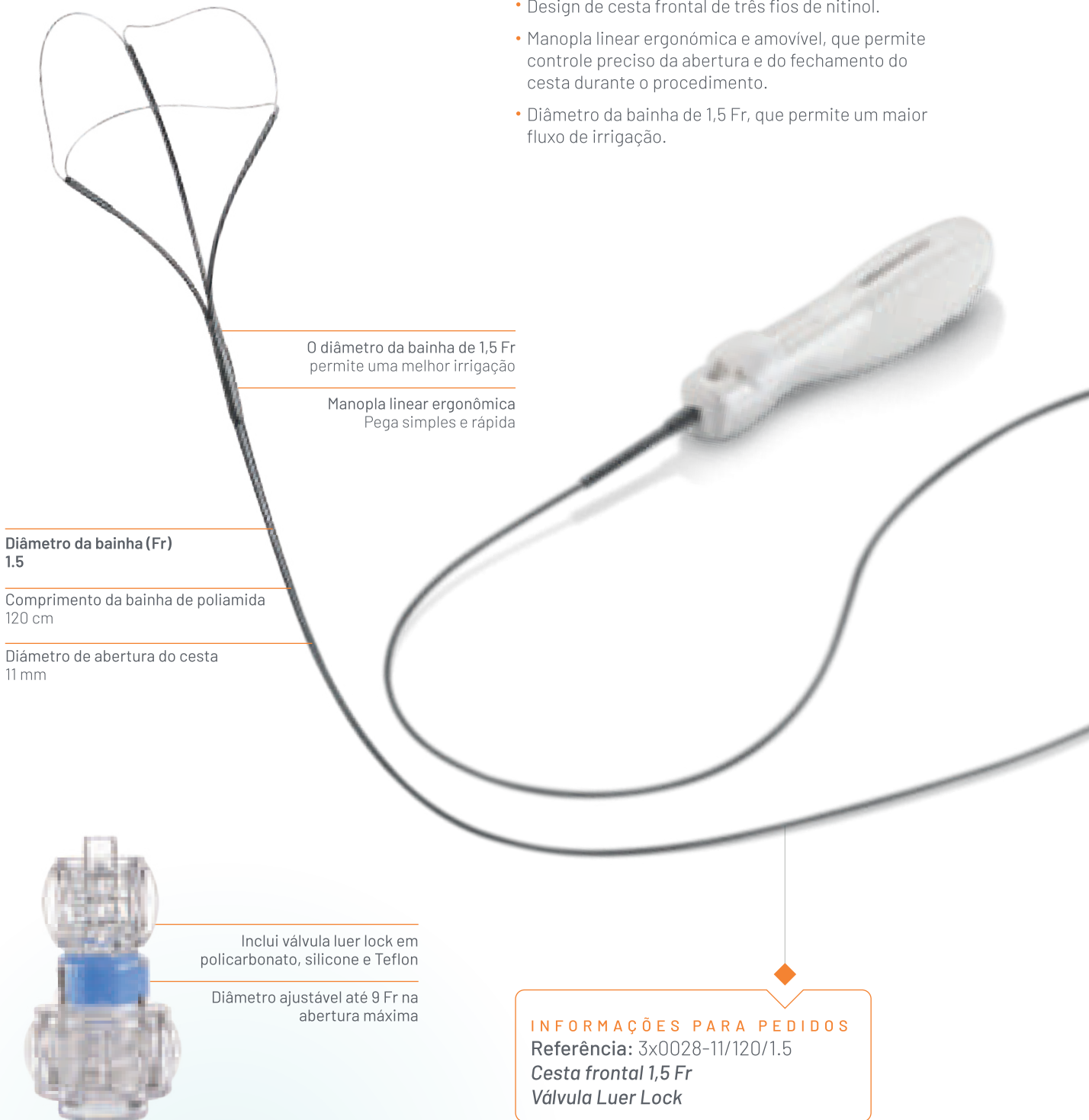

STRATONE TIPLESS

Cesta coletor com 4 fios paralelos, com extremidade romba, de nitinol, para a remoção de cálculos do trato urinário superior ou do cálice, com acesso menos traumático para os tecidos.



- O cesta tem uma forma esférica para se adaptar facilmente à forma dos cálices.

Diâmetro da bainha (Fr)
1.7

Comprimento da bainha
120 cm

Diâmetro de abertura do cesta
12mm

Válvula Luer Lock

- Nova manopla linear facilmente removível, o que facilita manipulação do dispositivo dentro do canal de trabalho do ureteroscópio.
- Manopla com mecanismo deslizante permitindo um controle preciso da abertura da cesta.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referência: STR-TIP-1.7x120
Bainha e cesta coletora de cálculos
Manopla desmontável




STRATONE

Dispositivo para remoção de cálculos renais constituído por uma manopla, uma bainha e uma cesta que remove os cálculos.

O cesta basculante é composto por 4 fios helicoidais.

- Cesta de 12 mm de diâmetro na posição completamente aberto.
- A geometria helicoidal dos fios da cesta permite um saca-rolhas para trás e para frente, o que facilita a captura da pedra.
- A manopla está equipada com um mecanismo de deslizamento que permite um controle preciso da abertura do cesta.

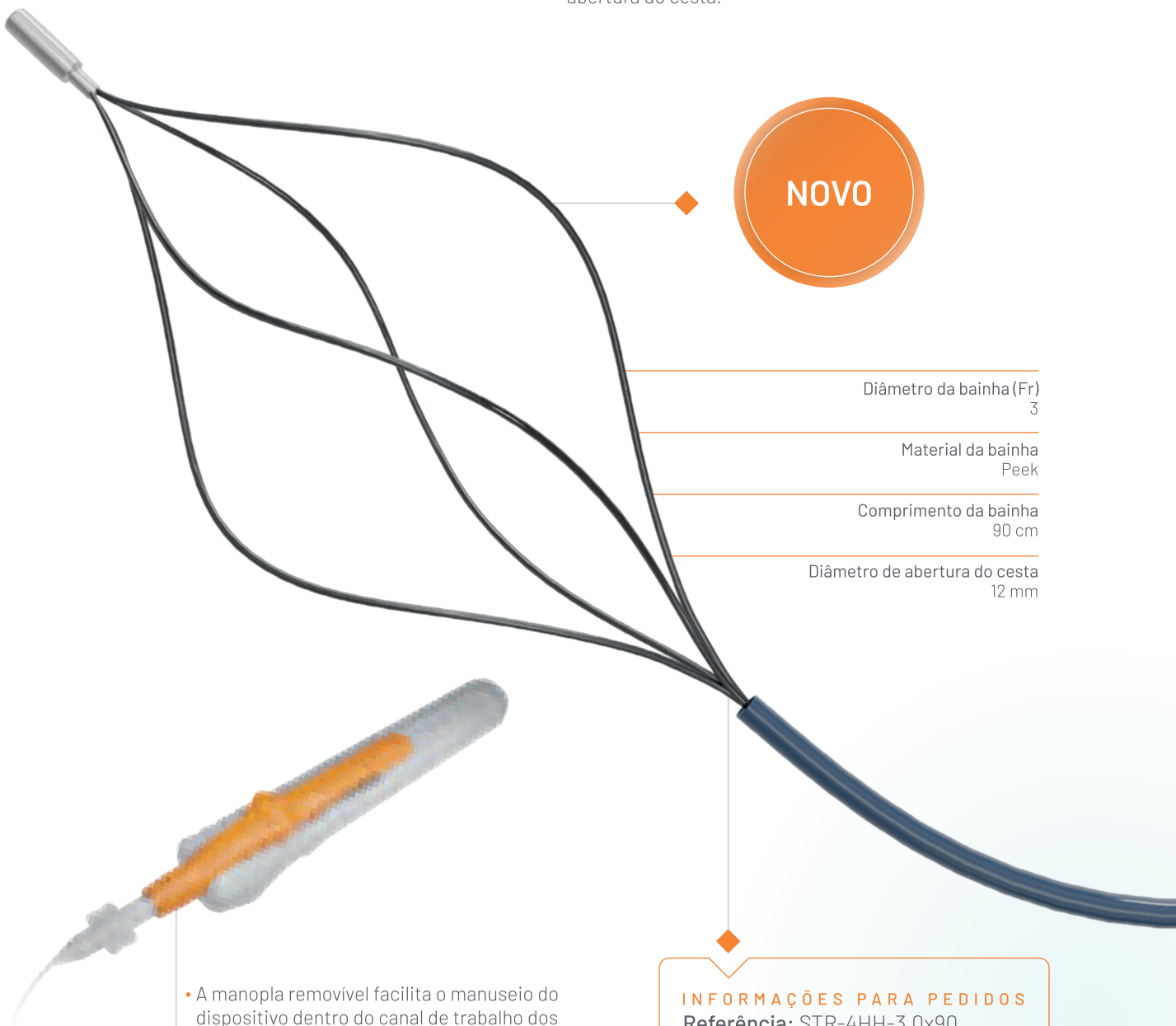

NOVO

Diâmetro da bainha (Fr)
3

Material da bainha
Peek

Comprimento da bainha
90 cm

Diâmetro de abertura do cesta
12 mm

- A manopla removível facilita o manuseio do dispositivo dentro do canal de trabalho dos ureteroscópios.
- Material da manopla: ABS e policarbonato.


INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referência: STR-4HH-3.0x90

Bainha e cesta coletora de cálculos
Manopla desmontável



Drenagem

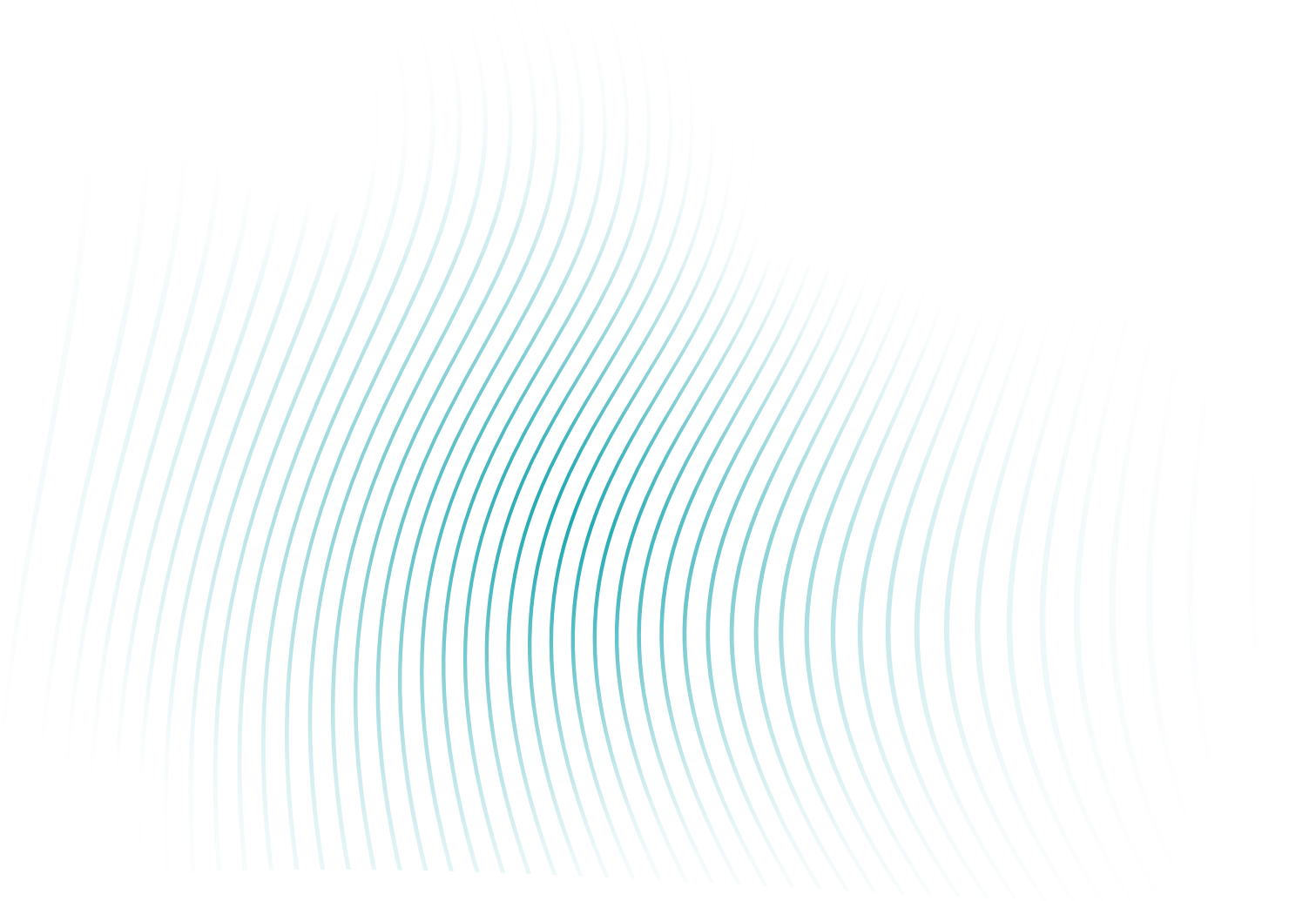

URODRAIN FLEX

- Projetado para drenagem temporária da junção ureterovesical em ureteroscopias flexíveis e semirrígidas.
- Duplo pig tail em todos os seus modelos.
- Poliuretano termoplástico radiopaco, com uma dureza de 93 Shore A.
- As perfurações ao longo de todo o comprimento facilitam a drenagem.



- Apresenta-se opcionalmente como stent ureteral com pusher ou como kit com stent, pusher e guia de acesso.
- Stent e kit Urodrain Flex com fio-guia de PTFE ou nitinol.

CONJUNTO DE STENT URETERAL COM FIO-GUIA

	DIÂMETRO EM FR.	Cateter para adultos (4,7 - 6 - 7)	Cateter pediátrico (4,0)
GUIA	DIÂMETRO EM POLEGADAS	0,035	0,025
	COMPRIMENTO	150 cm	150 cm
	MATERIAL	Nitinol / PTFE	PTFE


CONJUNTOS URETERAIS URODRAIN E STENTS

CÓDIGO DO PRODUTO

MEDIDA EM FR.	COMPRIMENTO	STENT URETERAL (SEM GUIA DE ACESSO)	KIT COM GUIA DE PTFE	KIT COM GUIA DE NITINOL
		Nº ANVISA: 10306849013	Nº ANVISA: 10306849014	Nº ANVISA: 10306849012
4 Fr. (Pediátrico)	12 cm	DJ4012-0-S1	ST40120T-S1	
	18 cm	DJ4018-0-S1	ST40180T-S1	
4,7 Fr.	22 cm	DJ4722-0-S1	ST47220T-S1	ST47220N-S1
	24 cm	DJ4724-0-S1	ST47240T-S1	ST47240N-S1
	26 cm	DJ4726-0-S1	ST47260T-S1	ST47260N-S1
	28 cm	DJ4728-0-S1	ST47280T-S1	ST47280N-S1
6 Fr.	24 cm	DJ6024-0-S1	ST60240T-S1	ST60240N-S1
	26 cm	DJ6026-0-S1	ST60260T-S1	ST60260N-S1
	28 cm	DJ6028-0-S1	ST60280T-S1	ST60280N-S1
7 Fr.	26 cm	DJ7026-0-S1	ST70260T-S1	ST70260N-S1
	28 cm	DJ7028-0-S1	ST70280T-S1	ST70280N-S1

URODRAINSOFT

- Stent Urodrain Soft e kit com fio guia de PTFE ou Nitinol. O material dos stents soft é mais macio que o dos stents flexíveis.
- Disponível em modelo pediátrico de 4 Fr.
- Tem uma dureza de 85 Shore A e perfurações que facilitam para facilitar a drenagem urinária.

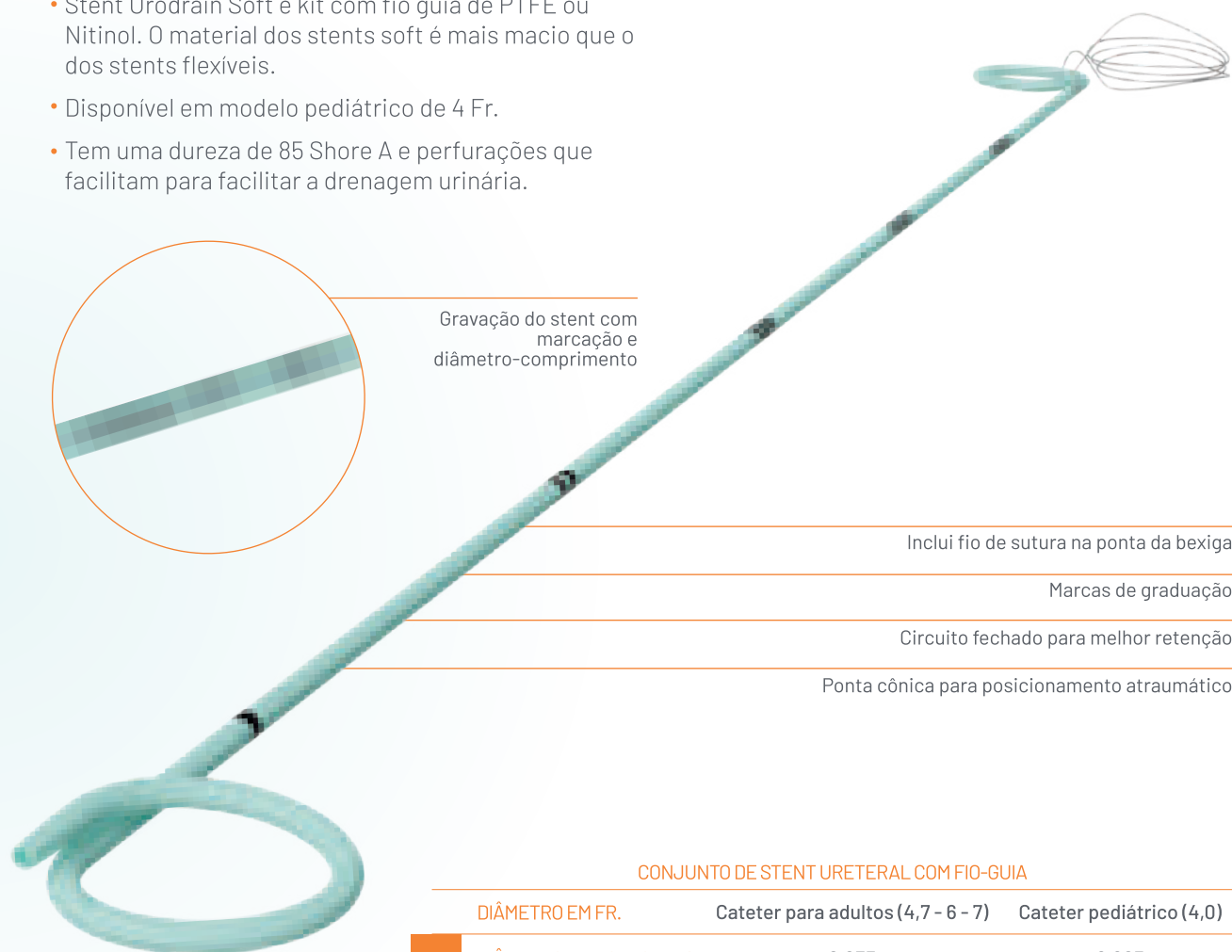

CONJUNTO DE STENT URETERAL COM FIO-GUIA

	DIÂMETRO EM FR.	Cateter para adultos (4,7 - 6 - 7)	Cateter pediátrico (4,0)
GUIA	DIÂMETRO EM POLEGADAS	0,035	0,025
	COMPRIMENTO	150 cm	150 cm
	MATERIAL	Nitinol / PTFE	PTFE


CONJUNTOS URETERAIS URODRAIN E STENTS

MEDIDA EM FR.	COMPRIMENTO	CÓDIGO DO PRODUTO		
		STENT URETERAL (SEM GUIA DE ACESSO) Nº ANVISA: 10306849013	KIT COM GUIA DE PTFE Nº ANVISA: 10306849014	KIT COM GUIA DE NITINOL Nº ANVISA: 10306849012
4 Fr. (Pediátrico)	12 cm	DJ4012-0-S2	ST40120T-S2	
	18 cm	DJ4018-0-S2	ST40180T-S2	
4,7 Fr.	22 cm	DJ4722-0-S2	ST47220T-S2	ST47220N-S2
	24 cm	DJ4724-0-S2	ST47240T-S2	ST47240N-S2
	26 cm	DJ4726-0-S2	ST47260T-S2	ST47260N-S2
	28 cm	DJ4728-0-S2	ST47280T-S2	ST47280N-S2
6 Fr.	24 cm	DJ6024-0-S2	ST60240T-S2	ST60240N-S2
	26 cm	DJ6026-0-S2	ST60260T-S2	ST60260N-S2
	28 cm	DJ6028-0-S2	ST60280T-S2	ST60280N-S2
7 Fr.	26 cm	DJ7026-0-S2	ST70260T-S2	ST70260N-S2
	28 cm	DJ7028-0-S2	ST70280T-S2	ST70280N-S2

KIT DE NEFROSTOMIA

O Kit de Nefrostomia Promedon é composto por produtos específicos para acessar os cálices do rim, confeccionados com materiais biocompatíveis de alta qualidade.

O kit de nefrostomia inclui agulhas com dois tipos de pontas: chiba e trocarce, cateter de drenagem monojota, três dilatadores fasciais, guia de PTFE, estilete e conector para bolsa de urina.

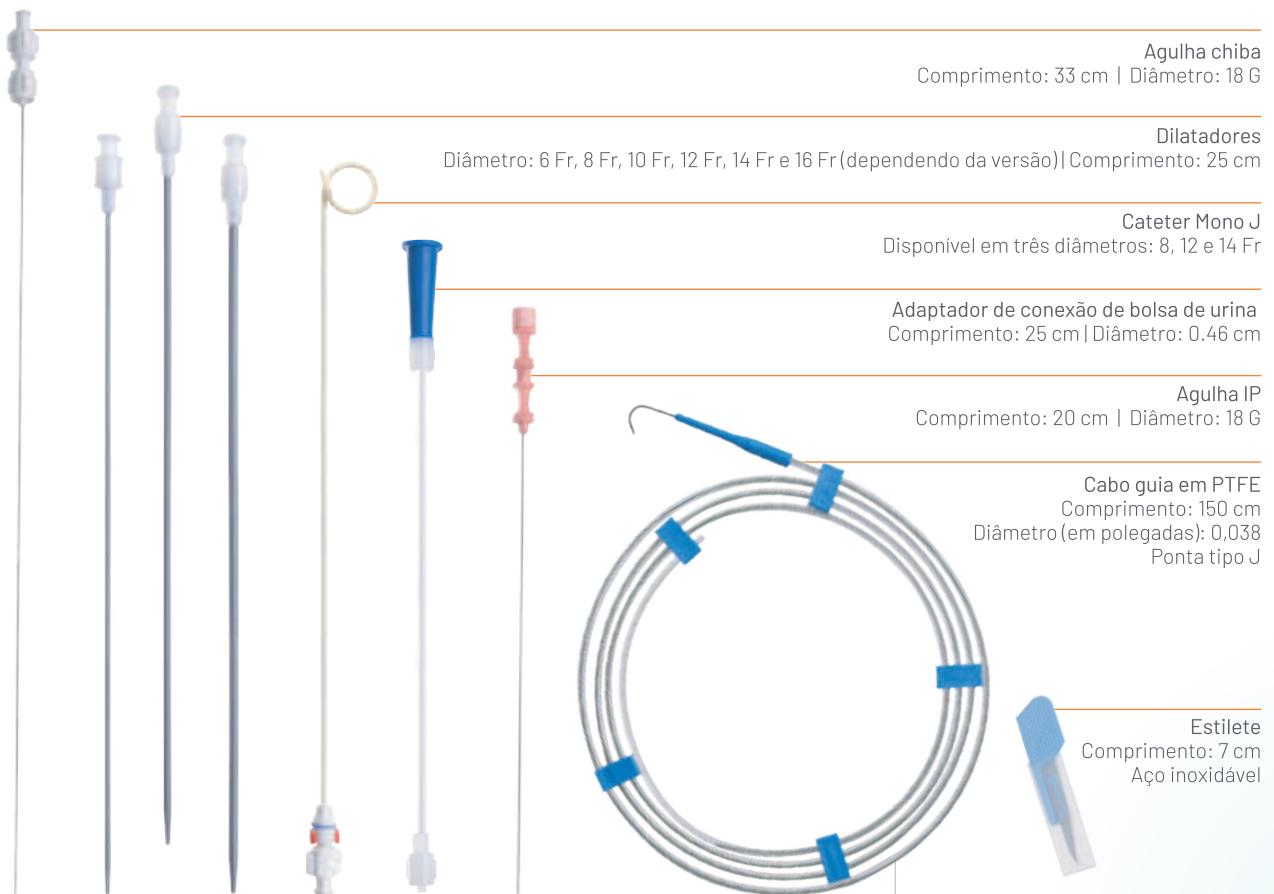

INFORMAÇÕES DE PEDIDOS

Referência: SNEF-08

1 Cateter Mono J de 8Fr. | 3 Dilatadores de 6Fr, 8Fr e 10Fr. | 1 Agulha chiba
1 Agulha IP | 1 Fio Guia | 1 Adaptador de conexão | Estilete

Referência: SNEF-12

1 Cateter Mono J de 12Fr. | 3 Dilatadores de 10Fr, 12Fr e 14Fr. | 1 Agulha chiba
1 Agulha IP | 1 Fio Guia | 1 Adaptador de conexão | Estilete

Referência: SNEF-14

1 Cateter Mono J de 14Fr. | 3 Dilatadores de 12Fr, 14Fr e 16Fr. | 1 Agulha chiba
1 Agulha IP | 1 Fio Guia | 1 Adaptador de conexão | Estilete

CATETER URETERAL

O Cateter Ureteral é um produto de várias utilizações em procedimentos endourológicos.

- O Cateter Ureteral é utilizado para injetar contraste e irrigação em procedimentos endourológicos.
- Tem visibilidade radiopaca.
- Fabricado em material polimérico flexível para facilitar o acesso ao rim.
- Tem um conector Luer-lock na extremidade distal para facilitar a ligação de seringas ou outros artigos.



Nº ANVISA: 10306840146


NEFRODRAIN

A fim de oferecer uma solução de drenagem para nefrostomias e cirurgias PCNL, estamos a introduzir o NEFRODRAIN, o nosso cateter de poliuretano de junção única com conector luer lock.

- Cateter em forma de pigtail, com sistema de bloqueio que garante o posicionamento ideal e restringe o deslocamento.
- Sistema de bloqueio em todas as versões.
- É vendido em caixas de 10 unidades.



Nº ANVISA: 10306849019

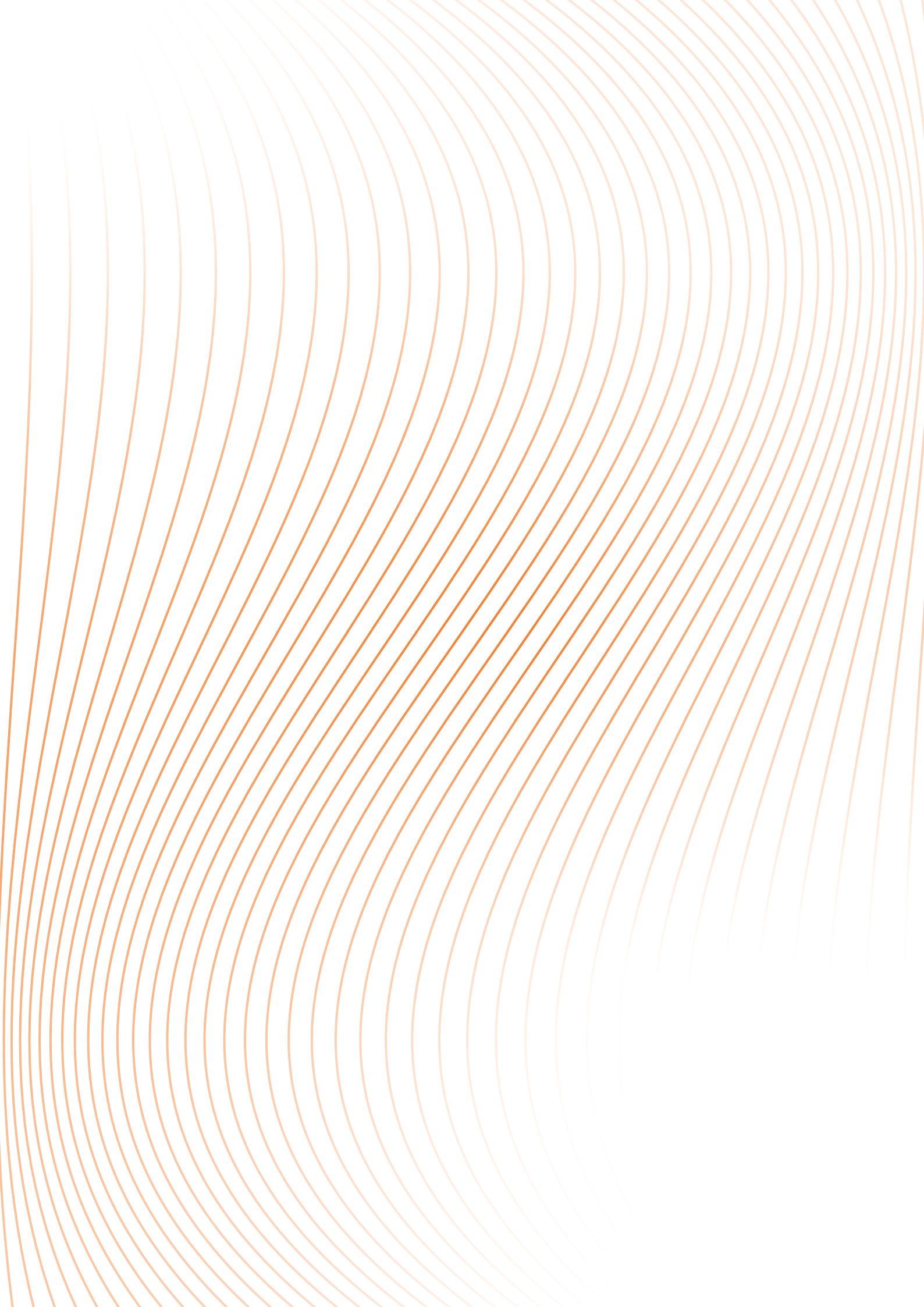



Dilatação

PERKUT

- O material do cateter-guia e das bainhas de dilatação é PTFE e o dos dilatadores, policloreto de vinila (PVC).
- O conjunto consiste em um cateter guia de 8 Fr, uma bainha introdutora de 10 Fr, 4 bainhas (24-26-28-30 Fr) e 13 dilatadores de 8 a 30 Fr.

- Os dilatadores apresentam marcas de graduação e uma ponta cônica suave para acesso atraumático através do tecido.
- Melhor manobrabilidade para o cirurgião.
- Material firme, estável e resistente a dobras.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referência: ST-PCNL-LB

13 Dilatadores | 4 Bainhas | Cateter



Comprimento do cateter
80 cm

Comprimento das bainhas
17 cm

Nº ANVISA: 10306840179

PERKUT MINI

- O conjunto é composto por um cateter de 8 Fr, uma bainha para o cateter introdutor de 10 Fr, 6 bainhas amplatz de 12 a 22 Fr, com passagem de 2 Fr e 9 dilatadores de 6 a 22 Fr.
- O material do cateter-guia e das bainhas de dilatação é PTFE e o dos dilatadores, policloreto de vinila (PVC). Esses componentes são específicos para mini cirurgia percutânea.
- Os dilatadores apresentam marcas de graduação e uma ponta cônica suave para acesso atraumático através do tecido.
- Específico para cirurgias mini e ultra mini percutâneas.
- Comprimento das bainhas: 17 cm



XPUR

O cateter balão é usado para dilatar o ureter em casos de estenose ureteral.



- XPur é um cateter de balão de nylon na extremidade proximal.
- É composto por 3 partes, corpo, cateter e conectores em policarbonato.
- O tamanho do cateter é 6 Fr.
- Possui duas marcas radiopacas de platina e irídio, e uma torneira/válvula de fecho.
- O cateter é de uso único. A apresentação é de uma unidade por caixa.
- Pressão máxima de rutura 14 atm.
- O cateter é feito de Pebax e foi concebido para ser resistente à pressão, mantendo a flexibilidade do cateter.
- A válvula de entrada tem duas vias, para injetar o fluido e entrar com uma guia.

Comprimento total em cm
90

Comprimento útil em cm
81,5

Diâmetro do balão inflado em Fr
15


Diâmetro do balão inflado em mm
5

Comprimento do balão em mm
40

Tamanho do cateter em Fr
6

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Referência: 50x40-60x90-AS
Cateter balão de dilatação ureteral

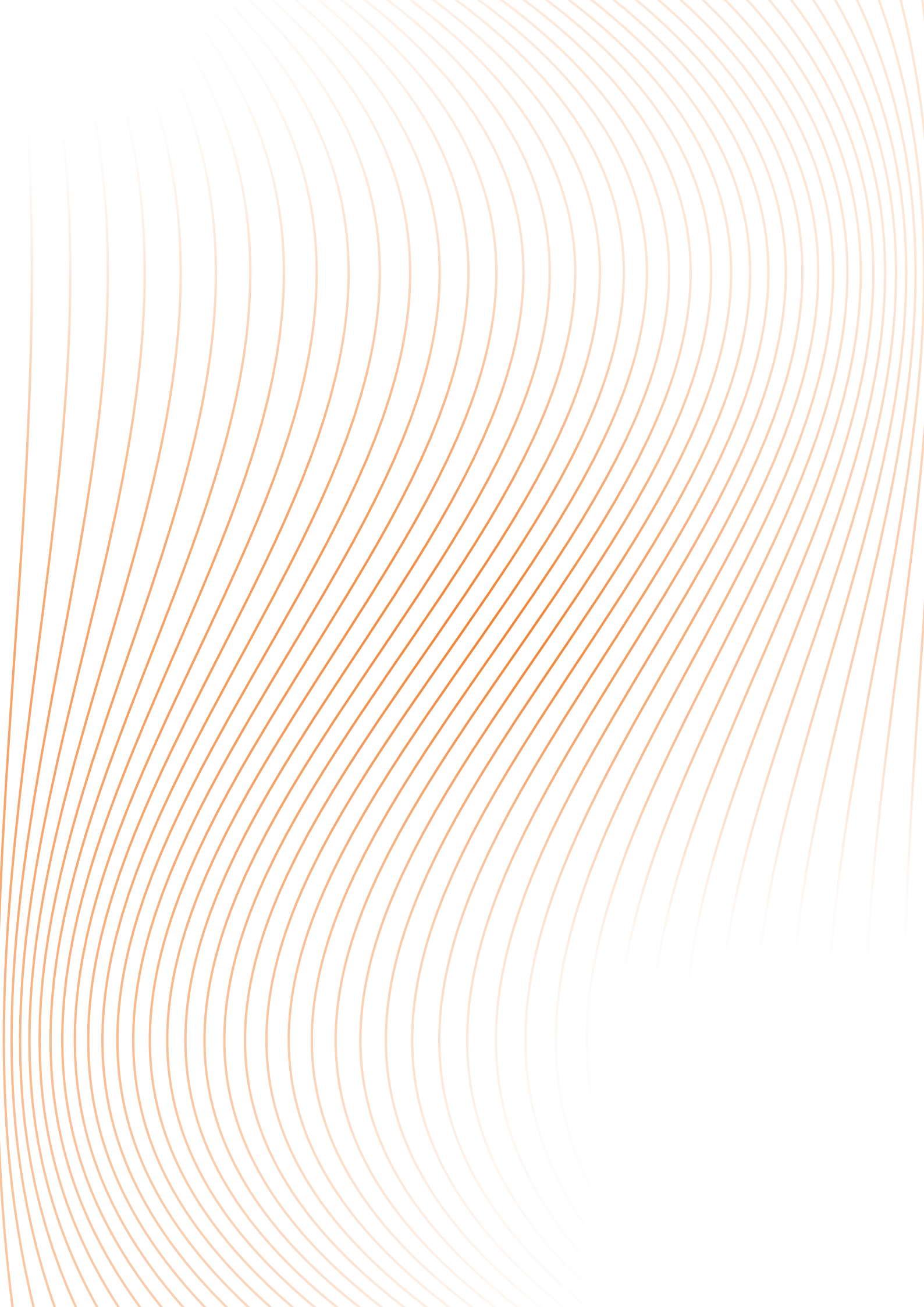


OUTRAS SOLUÇÕES EM:

SAÚDE FEMININA

◆ Incontinência urinária de esforço



◆ Prolapso de órgãos pélvicos

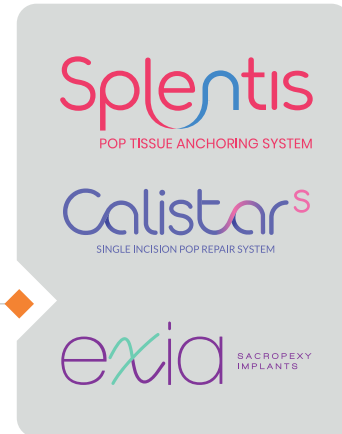


A SAÚDE MASCULINA

◆ Incontinência urinária



◆ Prótese peniana

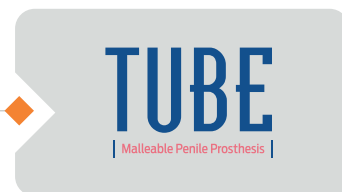

◆ Prótese testicular



◆ SAÚDE INFANTIL





Os produtos apresentados neste catálogo podem não estar disponíveis no seu país. Nesse caso, considere o conteúdo para fins informativos.

HEAD QUARTERS

PROMEDON S.A.
CÓRDOBA, ARGENTINA

Av. Gral Manuel Savio L3 M3
Parque Industrial Ferreyra
X5123XAD - Córdoba

Consultas: marketing@promedon.com

Promedon

Urology and Pelvic Floor

www.promedon-upf.com

2024

PSD-00000376 (05) / JUN-2024