

INDRIVEHYDRO+

VAINA DE ACCESO URETERAL

La **nueva vaina de acceso ureteral** provee un canal de trabajo continuo para el acceso reiterado con instrumentos y endoscopios durante la ureteroscopia flexible.

NUEVO

VENTAJAS DEL USO DE VAINAS

- Reduce las probabilidades de traumatismo en el uréter durante el intercambio repetido de instrumentos.
- Crea un canal de trabajo continuo que protege los instrumentos delicados y los endoscopios flexibles de daños, incrementando la vida útil de los equipos.
- Permite mejorar el flujo de salida de irrigación mediante un canal de trabajo continuo sin tortuosidad ni bloqueos ayudando a reducir la presión intrarrenal.

INDRIVEHYDRO+

VAINA DE ACCESO URETERAL

Clipsado en los
360° del cono



**Sección continua sin
resaltos** desde la vaina
al cono



Marcas de graduación para
un posicionamiento adecuado




**Doble capa de coating
hidrofílico** en vaina
y dilatador

Geometría de punta con
**incremento de diámetro
progresivo**



**Transición suave
y continua** entre vaina
y dilatador

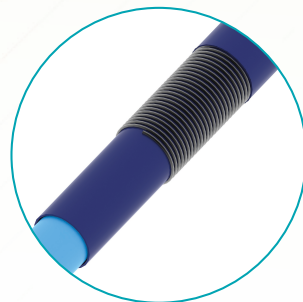

Estructura interna de
alambre de acero inoxidable

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CÓDIGO COMERCIAL	DIÁMETRO INT/EXT (FR)	LARGO (CM)
10/12-35-S-C-CO	10/12	35
10/12-45-S-C-CO	10/12	45