



La constitución de la uretra y la respuesta del piso pélvico varían entre los pacientes.

Los esfínteres urinarios artificiales se consideran los procedimientos gold standard para el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo en hombres. Anteriores conceptos de esfínteres urinarios artificiales no han sido exitosos en adaptarse a la variedad de condiciones de la uretra y del piso pélvico, pero creemos que cada paciente merece el tratamiento más personalizado posible. Es por ello que el esfínter artificial ajustable VICTO está disponible en dos configuraciones:



VICTO



VICTO+

VICTO
Adjustable Artificial Sphincter

INFORMACIÓN DE PEDIDO

VICTO y VICTO+		
DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE MANGUITO	CÓDIGO
VICTO 3.7	3.7	KIT-AUS-37-WS
VICTO 4.0	4.0	KIT-AUS-40-WS
VICTO 4.5	4.5	KIT-AUS-45-WS
VICTO 5.0	5.0	KIT-AUS-50-WS
VICTO 5.5	5.5	KIT-AUS-55-WS
VICTO+ 3.7	3.7	KIT-AUS-37
VICTO+ 4.0	4.0	KIT-AUS-40
VICTO+ 4.5	4.5	KIT-AUS-45
VICTO+ 5.0	5.0	KIT-AUS-50
VICTO+ 5.5	5.5	KIT-AUS-55

Kit de Accesorios	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
KIT DE ACCESORIOS VICTO / VICTO+	KITAC-01

Kit de Reemplazo	
BOMBA	CÓDIGO
VICTO / VICTO+	KITRP-03-10-06
BALÓN	CÓDIGO
VICTO / VICTO+	KITRB-01-06
MANGUITO (CUFF)	CÓDIGO
MANGUITO (CUFF) VICTO / VICTO+ 3.7	KITRC-37-10-06
MANGUITO (CUFF) VICTO / VICTO+ 4.0	KITRC-40-10-06
MANGUITO (CUFF) VICTO / VICTO+ 4.5	KITRC-45-10-06
MANGUITO (CUFF) VICTO / VICTO+ 5.0	KITRC-50-10-06
MANGUITO (CUFF) VICTO / VICTO+ 5.5	KITRC-55-10-06

Kit de Ajuste	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
KIT DE AJUSTE VICTO / VICTO+	KITAD-06

victosphincter.com

Promedon
Urology and Pelvic Floor



VICTO
Adjustable Artificial Sphincter

LLEVANDO EL CONCEPTO DEL ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL A OTRO NIVEL

- Dos configuraciones disponibles que se adaptan a las condiciones de incontinencia de cada paciente
- Sistema de ajuste mínimamente invasivo

VICTO y VICTO+ son esfínteres urinarios artificiales ajustables diseñados para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo en hombres.

La tecnología y las características de VICTO lo convierten en el esfínter urinario artificial más evolucionado del mercado:

SISTEMA DE AJUSTE MÍNIMAMENTE INVASIVO

Las dos configuraciones de VICTO incluyen un sistema de ajuste que permite variaciones de presión ilimitadas y fáciles de realizar en el producto ya implantado. Este procedimiento puede realizarse de forma ambulatoria.

EXCLUSIVO DISEÑO DE BOMBA

La bomba VICTO, fabricada con silicona blanda, tiene un diseño fácil de palpar, por lo que su uso es muy simple para los pacientes.

DISPOSITIVO PRECONECTADO

Los dispositivos VICTO y VICTO+ se entregan preconectados y listos para su llenado e implantación.

DISEÑO CIRCUNFERENCIAL

Presión homogénea alrededor de la uretra.

VARIOS TAMAÑOS DE MANGUITOS

Para maximizar el rendimiento del producto y, a la vez, minimizar el riesgo de erosión, es necesario contar con opciones de tamaño de manguitos que proporcionen una presión uniforme alrededor de la uretra. VICTO ofrece cinco medidas, que deben elegirse de acuerdo con la anatomía de cada paciente.



- Implantación simple
- Mínima cantidad de material extraño

La cantidad de material extraño implantado generalmente debe reducirse al mínimo; por lo tanto, la configuración de un solo balón es ideal para los pacientes que presentan las siguientes condiciones:

- A** Piso pélvico intacto y funcional (interrupción de la micción posible)
- B** Tejido uretral fuerte y vital (sin cicatrices graves)




- Las estructuras pélvicas dañadas necesitan incrementos de la presión en situaciones de esfuerzo.
- La presión oclusiva alta y permanente aumenta el riesgo de complicaciones.
- VICTO+ ofrece presión de oclusión efectiva más baja, a la vez que incrementa la presión del sistema en situaciones de esfuerzo (ajuste de presión automático inteligente).

La presión alta y permanente, especialmente en estructuras de piso pélvico gravemente dañadas, es considerada la principal causa de las complicaciones que surgen con el tiempo.

Los pacientes con un piso pélvico disfuncional no son capaces de interrumpir el flujo urinario. Necesitan presión adicional en el manguito para mantener la uretra cerrada en situaciones de esfuerzo físico.

VICTO+ es la solución perfecta para estos pacientes, ya que cuenta con un balón adicional que incrementa la presión del manguito, según sea necesario, trasladando la presión abdominal en condiciones de esfuerzo.

En conjunto, el sencillo sistema de ajuste y la exclusiva característica de respuesta dinámica de VICTO+ permiten una presión inicial baja, a la vez que mantienen la continencia en los pacientes con piso pélvico disfuncional en situaciones de esfuerzo.

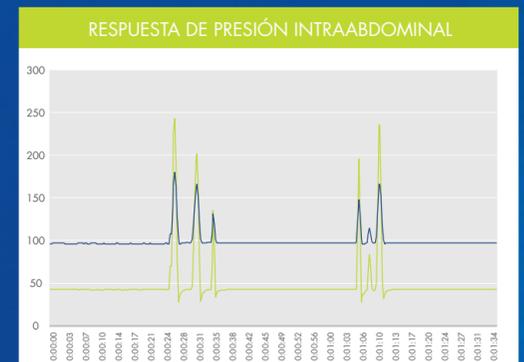

Fuente: Datos de pruebas de rendimiento.